

Little Wave "Clik"

USER INSTRUCTION MANUAL & WARRANTY
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA



2022-10-26

I. INTRODUCTION

Thank you for purchasing a Ki Mobility wheelchair!



WARNING: Do not use this without first reading this entire manual. Use without first reading this entire manual could result in serious injury to the user and/or attendant.

Ki Mobility recommends training by an Assistive Technology Professional (ATP) or other competent clinical or technical professional in the safe use of this chair prior to use.

If you have any questions or concerns about any aspect of this wheelchair, this manual or the service provided, do not hesitate to contact your authorized supplier, an authorized representative or Ki Mobility. Ki Mobility can be reached at:

(1)715-254-0991



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
U.S.A



www.kimobility.com (Includes Dealer locator and access to printed information)

Or via our Authorized EU Representative:



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
33233 Anderstorp
Sweden

II. TABLE OF CONTENTS

I.	INTRODUCTION	
II.	TABLE OF CONTENTS	
III.	NOTICE - READ BEFORE USE	
	A. Intended Use	3
	B. Your Safety	3
	C. Signal Words	4
	D. Serial Number Identification.....	4
	E. Symbol Glossary	5
	F. General Warnings and Cautions	6
	G. Positioning Belts or Harnesses	8
	H. Riding Your Wheelchair	8
	I. Power Drives.....	10
	J. Your Wheelchair and the Environment.....	11
	K. Modifying your Wheelchair	11
	L. Wheelchair Stability	11
	M. Aftermarket Seating	12
IV.	WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION	
	A. Ascending Stairs	13
	B. Descending Stairs	13
	C. Transfers.....	14
	D. Transit Use.....	14
	E. Cushion Use	19
	F. Transporting of Unoccupied Wheelchair	19
	G. Your CliK & Its Parts	20
	H. Height Adjustable T-Arm	21
	I. Swing Away Armrests	22
	J. Height Adjustable Pediatric T-Arm.....	23
	K. Angle Adj. Locking Extendable Flip Up Armrest	24
	L. Rear Wheels	25
	M. Adjusting the Footrest	26
	N. Angle Adjustable Footrest	26
	O. High Mount Angle Adjustable Flip Under Footrest.....	27
	P. Wheel Locks	29
	Q. Anti-Tips	30
	R. Contact Surfaces	32
	S. Upholstery Fabric	33
	T. Folding Backrest	33
	U. Standard 5th Wheel	34
	V. Dynamic 5th Wheel	35
	W. Drum Brake	37
	X. Cane and Crutch Holder	38
	Y. Canopy	39
V.	MAINTENANCE AND CARE	
	A. Maintenance Table.....	40
	B. Cleaning.....	41
	C. Storage	42
	D. Disposal	42
VI.	TROUBLESHOOTING	
	A. Symptoms and Solutions	43
VII.	WARRANTY.....	44
VIII.	SPECIFICATION SHEET - CLIK.....	45

III. NOTICE - READ BEFORE USE

A. Intended Use

Ki Mobility Manual wheelchairs are manually operated devices with wheels that are intended for medical purposes to provide mobility to persons restricted to a sitting position.

B. Your Safety

NOTE: Contact Ki Mobility for information on safety recalls and notices.

Any serious adverse events or injuries related to the use of your wheelchair or its accessories must be reported immediately if the incident directly or indirectly leads to serious health decline or death of the user or other person. Report any serious events and/or injuries to Ki Mobility and, if required by local regulation, the competent health authority where the user and/or other person legally reside.

Do not use this wheelchair without first reading this entire manual. BEFORE riding, you should be trained in the safe use of this chair by an Assistive Technology Professional (ATP) or other competent clinical or technical professional. Ki Mobility manufactures many different wheelchairs that might meet your needs. The recognized best practice for selecting a wheelchair is to consult with an ATP or other competent technical professional and an experienced clinical professional such as a physical therapist, occupational therapist or physician. Final selection of the type of wheelchair, options and adjustments rests solely with you and your technical and clinical professionals. The options you choose, and the set-up and adjustment of the wheelchair have a direct impact on its performance, stability and its ability to meet your needs. Factors to consider that affect your safety and stability are:

- a. Your personal abilities and capabilities including strength, balance and coordination.
- b. The types of hazards and obstacles you might encounter during your day.
- c. The specific dimensions, options and set up. In particular, the seat height, seat depth, seat angle, back angle, size and position of the rear wheels and size and position of the front casters.

III. NOTICE - READ BEFORE USE

C. Signal Words

Within this manual you will find what are referred to as “Signal” words. These words are used to identify and convey the severity of varying hazards. Before using this chair you, and each person who may assist you, should read this entire manual. Please note the Signal word and consider any notes, cautions or warnings. Make sure to follow all instructions and use your chair safely. The Signal word refers to a hazard or unsafe practice that may cause severe injury or death to you or to other persons. The “Warnings” are in three main categories, as follows:

NOTE – Note indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in a decline in the performance of the chair or damage to your wheelchair.



CAUTION

CAUTION: Caution indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in damage to your wheelchair and injury to you.




WARNING

WARNING: Warning indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.

These signal words will be placed throughout the manual, where appropriate to highlight the hazardous situation. Refer to Section F. for hazardous situations that will apply to the general use of this wheelchair.

D. Serial Number Identification

The UDI (Unique Device Identifier) pictured is a representative sample. For information specific to your product check the UDI label located on your product as indicated in the image below.

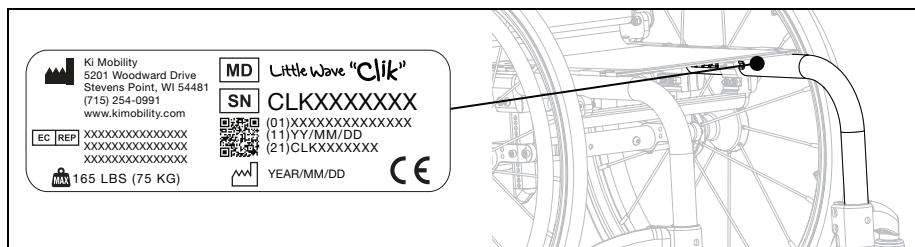

IV. NOTICE - READ BEFORE USE

E. Symbol Glossary

SYMBOL	DEFINITION
	Indicates the medical device manufacturer.
	Date of manufacture (YEAR/MM/DD).
	Indicates the need for the user to consult an instruction for safety reasons such as cautions and warnings. If presented on the medical device or packaging, it indicates the need for the user to consult the instructions for safety reasons such as cautions and warnings.
	Indicates the item is a medical device.
	Indicates the manufacturer's serial number so that a specific medical device can be identified.
	Indicates the authorized representative in the European Community.
	Indicates the manufacturer's declaration that the product meets the requirements of the applicable EC directives.
	Indicates the need for the user to consult the instructions for use.
	Indicates the need for the user to consult the listed website for instructions for use in an electronic format.
	Indicates a website where a user may obtain additional information about the medical product.
	Indicates a specified maximum weight limit (lbs/kg).
	Indicates a transit securement point.
	Indicates a potential pinch point.
	Indicates the entity importing the medical device into the locale.
	Conforms with ANSI/RESNA WC-4 Section 19 (WC19) and ISO 7176-19.
	Indicates not for transit use.

III. NOTICE - READ BEFORE USE

F. General Warnings and Cautions

WARNING

	Standard	Transit
Clik	165 lbs (75 kg)	165 lbs (75 kg)

WARNING: Limits refer to combined weight in pounds of user and all items carried. Do not exceed weight limit of chair. Exceeding weight limit may damage your chair or may increase your risk of falling or tipping over. A tip-over or fall could result in serious injury or death.


-  Do not use chair for weight training. The movement of the additional weight alters the chair's center of gravity increasing your risk of tipping over. A tip-over could result in damage to your chair or in serious injury or death.
-  Do not hang backpacks, bags or heavy objects above the occupants center of gravity. The additional weight alters the chair's center of gravity increasing your risk of tipping over. A tip-over could result in serious injury or death. If additional loads need to be carried, it is recommended to use under seat carriers and pouches. Objects hung on the chair may cause instability, may prevent access to the chair components, may become entangled in moving parts or may cause a premature wear of chair components such as back upholstery and push handles.
-  Keep tires inflated to correct tire pressure. Using a chair without properly inflated tires may affect its stability, increasing your risk of tipping over. A tip-over could result in damage to your chair or in serious injury or death to you or others. Correct tire pressure is indicated on the side wall of the tire. Your wheelchair provider can determine if your tires are inflatable if you are unsure.
-  Avoid ramps or slopes inclined more than 9 degrees. Steep slopes increase your risk of falling or tipping over. A tip-over or fall could result in damage to your chair or in serious injury or death to you or others. Do not use chair on ramps or slopes tilted more than 9 degrees (about 2 inches rise/drop per linear-foot): neither up/down nor across.
-  Avoid inclined surfaces slick or coated with ice, oil or water. Slippery inclines could result in an inability to control the wheelchair on the surface and result in a tip-over or fall. A tip-over or fall could result in damage to your chair or in serious injury or death.
-  Avoid leaning over the side or back of your wheelchair to extend your reach. Leaning over chair could change its center of gravity and cause an unstable situation resulting in a fall or tip-over. A tip-over or fall could result in damage to your chair or in serious injury or death.
-  Do not lift wheelchair by its removable parts while occupied. Lifting a wheelchair by removable parts while occupied could cause user to fall or lose control. A fall or loss of control could result in damage to your chair or in serious injury or death.
-  Packaging material must be kept out of the reach of children. Improper handling of packaging materials and the neglect of the duty to supervise children could result in suffocation and serious injury or death.
-  Your wheelchair meets ISO 7176-16 for flammability. Resistance to ignition can change with use, aging or cleaning. Precautions should be taken to avoid ignition sources and proximity to flammable materials that can increase ignition such as oxygen and alcohol. Also, be aware that adding components, seating, postural supports or materials to the chair may alter flammability. Changes to flammability may result in serious injury or death.

III. NOTICE - READ BEFORE USE


F. General Warnings and Cautions (Continued)

 Any body part that presses against a wheelchair frame or other wheelchair components may create skin deformation that results in a high pressure point. High pressure points negatively affect the tissue under stress and can cause you to develop a pressure injury or skin breakdown. If your skin develops redness, or any other symptoms of a pressure injury or skin breakdown, discontinue the use of this product immediately and consult your clinician. Continuing to use the wheelchair after skin changes are present can result in serious injury or death.

 For safe moving and lifting of the wheelchair without an occupant, it is recommended to fold the backrest (if configuration allows) and grip at points on the frame as indicated in diagram. Take care to not grip at points where components are removable or move during use of chair in order to avoid injury and a failure of the component.

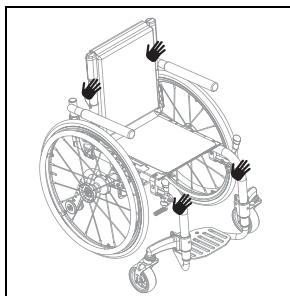

 Overall dimensions of wheelchairs vary according to its specific configuration such as seat depth, seat width, wheel and tire choices and the addition of aftermarket equipment not provided by Ki Mobility. If overall dimensions of your specific wheelchair exceeds the recommended dimensions in image below it may limit access to emergency escape routes. Inability to access an emergency escape may result in serious injury or death.

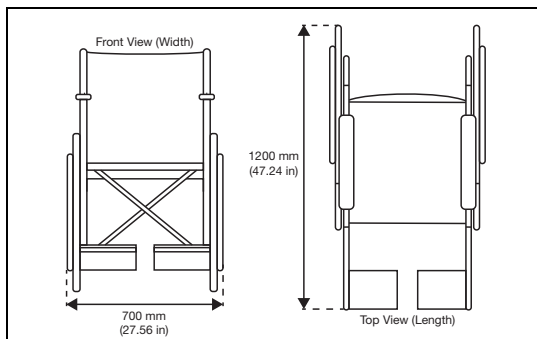

CAUTION

CAUTION: Avoid overtightening bolts and hardware that attach components to the frame. Overtightening could cause damage to the chair; affecting its durability and performance. Damage to the chair could result in injury to the user.

NOTE: Information about tightening hardware can be found in the maintenance section of this manual. If you are unsure how to properly tighten bolts or hardware or lack the tools necessary, consult your authorized supplier.

III. NOTICE - READ BEFORE USE

G. Positioning Belts or Harnesses

WARNING

WARNING: Improper use of positioning belts can cause the user to slide underneath the positioning belt in the wheelchair. If this should happen, chest compression or suffocation due to pressure from the belt can occur. If this occurs, the user's breathing may be hampered causing serious injury or death.



Improper use of positioning belts could cause body parts to become entangled which can restrict mobility and movement, which could result in serious injury or death.

Ki Mobility recommends the use of pelvic positioning belts. Pelvic positioning belts can reduce the risk of falling from your wheelchair.

Positioning belts, such as pelvic positioning belts and anterior trunk harnesses and straps, are designed to assist, retain and support proper positioning and posture in the wheelchair.

- Ensure the user does not slide underneath the positioning belt in the wheelchair seat.
- The positioning belt should have a snug fit; tight enough to hold their position, but not so tight as to restrict breathing. An open hand should be able to fit between the belt and the user.
- Proper use of cushions can contribute to pelvic stability and reduce sliding.
- NEVER Use Positioning Belts:
 - a. As a restraint. A restraint requires a doctor's order.
 - i. Unless you can remove the belts easily in an emergency. If you cannot do this, consult with your health care advisor for other options to help with your posture.
 - b. On a user who is unconscious or agitated.
 - c. As an occupant restraint or safety belt in a motor vehicle. A positioning belt is not designed to replace a seat belt that is attached to the frame of a vehicle, which would be required of an effective seat belt. During a sudden stop, with the force of the stop, the user would be thrown forward. Wheelchair seat belts will not prevent this, and further injury may result from the belts or straps. Reference Transit section of this manual for further information.

H. Riding Your Wheelchair

WARNING

WARNING: Avoid pushing or using your wheelchair on soft, rough, uneven, or slick surfaces (including but not limited to ice, sand, loose soil, grass, gravel, potholes, cracks, and broken pavement). Use on such surfaces could cause the wheelchair to lose stability causing it to tip unexpectedly resulting in a fall or loss of control. A fall or loss of control could result in damage to your wheelchair, serious injury or death.



Always look ahead for potential obstructions or surface transitions that could cause your front caster wheels to catch causing your wheelchair to abruptly stop. Failure to do so could cause the wheelchair to tip unexpectedly resulting in a fall or loss of control. A fall or loss of control could result in damage to your wheelchair, serious injury or death.

III. NOTICE - READ BEFORE USE

H. Riding Your Wheelchair (Continued)



Always look ahead for objects or obstructions that your wheelchair could potentially strike. Striking an object or obstruction could cause your wheelchair to tip unexpectedly resulting in a fall or loss of control. A fall or loss of control could result in damage to your wheelchair, serious injury or death. In addition, striking an object or obstruction could cause damage to your wheelchair. The risk of injuries and damage to your wheelchair when striking an object or obstruction increases with your rate of speed.



Using your wheelchair on public roads is extremely hazardous and is not recommended. Wheelchair users must obey pedestrian traffic rules. Review the traffic laws in your own state, some states do not permit wheelchair use on public roads.



Your balance is affected by the slope of the surfaces you ride on. Because balance is affected, your wheelchair will be less stable when it is at an angle. This is especially true when riding on a slope sideways. Riding your wheelchair on a slope could cause the wheelchair to tip unexpectedly and/or the user to lose stability resulting in a fall or loss of control. A fall or loss of control could result in damage to your wheelchair, serious injury or death.



When using your wheelchair in public or private areas (including but not limited to crosswalks, sidewalks, neighborhoods, parking lots and parks) be alert to the danger of motor vehicles. Due to your low position:

- When lighting is poor use reflective tape on your wheelchair and clothing.
- If you have the right-of-way always yield until the driver of the motor vehicle has seen you.



Use extreme caution when propelling backward. You may be unable to see an obstruction that could cause a tip over. Tipping over could result in damage to your wheelchair, serious injury or death.



Ki Mobility does not recommend balancing on just the rear wheels with the front casters off the ground (also known as doing a “wheelie”). A fall or tip over is very likely and could result in damage to your wheelchair, serious injury or death. If you choose to ignore this warning, do not attempt a wheelie unless you have been trained by a clinical or technical professional. You should always have the assistance of an able-bodied person prepared to prevent you from exceeding your tipping point.



Do not ride your wheelchair on an escalator. Use of a wheelchair on an escalator could cause a fall, tip-over or loss of control. A fall, tip over or loss of control could result in damage to your wheelchair, severe injury or death.



Avoid getting dressed or undressed in your wheelchair. Dressing or undressing in your wheelchair causes your weight to shift. Thus, increasing your risk of falling or tipping over. Falling or tipping over could result in damage to your wheelchair, serious injury or death.



Ki Mobility recommends using accessories such as heel loops and calf straps. When used properly, heel loops and calf straps can aid in preventing your legs and feet from accidentally slipping off the footplate or footrest potentially causing your feet to become entangled in the wheelchair and its components or strike the ground. Use of a wheelchair without accessories such as properly fitted heel loops and calf straps can result in a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in injury.

III. NOTICE - READ BEFORE USE

H. Riding Your Wheelchair (Continued)

When using your wheelchair always:

- Scan the area well ahead of your wheelchair as you ride.
- Ensure the surfaces you ride on are level and free of obstacles.
- Remove or cover threshold strips between rooms.
- If your wheelchair has anti-tips make sure they are locked in place when riding your wheelchair (Reference IV, Q. for proper use of anti-tips).
- Keep both of your hands on the handrims as you go over obstacles.
- Never push or pull off an object to propel your wheelchair.
- Make sure there is not a drop off at the bottom of ramps.
- On an up-slope, lean your upper body forward slightly to prevent tipping backwards.
- On a down-slope, press your upper body backwards to prevent tipping forward.
- Do not attempt to push over obstacles without assistance.
- Ensure all ramps, slopes or curb cuts you attempt to ride on are compliant with ADA (Americans with Disabilities Act) guidelines or the equivalent accessibility guidelines in your region.

ADA Guidelines and more information about accessible design are available at: www.ada.gov

I. Power Drives

WARNING

WARNING: Ensure the power drive system has been validated and approved by the manufacturer for use with your Ki wheelchair and its configuration. Use of an unapproved external power drive system could result in mechanical failure of the wheelchair or cause a fall. A fall could result in damage to your wheelchair, severe injury or death.



Power drive systems change the stability and performance of the wheelchair. Always use anti-tips with your power drive system. Failure to do so could result in your wheelchair tipping over backwards. Tipping over backwards could result in damage to your wheelchair, severe injury or death.



Always look ahead for objects or obstructions that your wheelchair could potentially strike. Power drive systems change the performance of the wheelchair and will increase the risk of tipping unexpectedly if you strike an object or obstruction. Tipping unexpectedly could result in a fall or loss of control. A fall or loss of control could result in damage to your wheelchair. The risk of injuries and damage to your wheelchair when striking an object or obstruction increases with your rate of speed.

Ki Mobility does not recommend the installation of power drive systems on any Ki Mobility wheelchair. Ki Mobility wheelchairs have not been designed or tested by Ki Mobility as power wheelchairs. If you add a power drive system to a Ki Mobility wheelchair, be sure the manufacturer of the power drive system has validated and approved the combination of the power drive system and wheelchair as safe and effective.

III. NOTICE - READ BEFORE USE

J. Your Wheelchair and the Environment

CAUTION

CAUTION: Exposure to water or excessive moisture may cause the metal in the wheelchair to rust or corrode and the fabric to tear. Dry your chair as soon as possible if exposed to water.



DO NOT USE YOUR WHEELCHAIR IN A SHOWER, POOL OR BODY OF WATER. This will cause your wheelchair to rust or corrode and eventually fail.



Do not operate your wheelchair in sand. Sand can get into the wheel bearings and moving parts. This will cause damage and eventually will cause the wheelchair to fail.

K. Modifying your Wheelchair

WARNING

WARNING: NO ONE SHOULD MODIFY THIS WHEELCHAIR EXCEPT BY ADJUSTING IT ACCORDING TO THIS MANUAL OR BY ADDING KI MOBILITY APPROVED OPTIONS. THERE ARE NO APPROVED OPTIONS THAT INVOLVE DRILLING OR CUTTING THE FRAME BY ANYONE OTHER THAN A TRAINED KI MOBILITY ASSOCIATE. Your wheelchair was engineered and manufactured under strict design controls. An integral part of this process is ensuring the various components work together correctly; they have been tested to various standards to ensure quality and are approved to work together. Contact an authorized supplier or Ki Mobility before adding any accessories or components not provided by Ki Mobility. Unapproved modifications or options could lead to fall and cause serious injury or death.

L. Wheelchair Stability

WARNING

WARNING: The stability of your wheelchair could be affected when using on soft, rough, uneven (incline or decline), or slick surfaces (including but not limited to ice, sand, loose soil, grass, gravel, potholes, cracks, and broken pavement). Use on such surfaces could cause the wheelchair to tip unexpectedly resulting in a fall or loss of control. A fall or loss of control could result in damage to your wheelchair, serious injury or death.



Shifting weight in your wheelchair, adding weight to your wheelchair and carry or reaching for objects could affect the stability of your wheelchair. Thus, increasing your risk of falling or tipping over. Falling or tipping over could result in damage to your wheelchair, serious injury or death.



Avoid getting dressed or undressed in your wheelchair. Dressing or undressing in your wheelchair causes your weight to shift. Thus, increasing your risk of falling or tipping over. Falling or tipping over could result in damage to your wheelchair, serious injury or death.



Ki Mobility does not recommend balancing on just the rear wheels with the front casters off the ground (also known as doing a "wheelie"). A fall or tip over is very likely and could result in damage to your wheelchair, serious injury or death. If you choose to ignore this warning, do not attempt a wheelie unless you have been trained by a clinical or technical professional. You should always have the assistance of an able-bodied person prepared to prevent you from exceeding your tipping point.

III. NOTICE - READ BEFORE USE

L. Wheelchair Stability (Continued)



WARNING: If the wheelchair is equipped with a system to vary the tilt angle of the seat frame, confirm it is stable throughout the range of angle changes before use. If the wheelchair is not stable throughout the range of tilt angles a fall or tip over is imminent. Falling or tipping over could result in damage to your wheelchair, serious injury or death.

Strategies to minimize the risk of falling:

- Ensure anti-tips are in the correct position (Reference IV, Q. for proper use of anti-tips).
- Lean forward when pushing up an incline.
- Lean back when pushing down a decline.
- Have an attendant behind you to provide assistance.
- Wheelchair set up should be done only by an authorized technician.
- Always use the accessories provided.
- Your wheelchair should be adjusted by an authorized technician when there are changes in your weight or how you sit.
- Always use anti-tips where appropriate (Reference IV, Q. for proper use of anti-tips).

To ensure proper stability of your wheelchair, you must make sure the center of gravity and the wheelchair's base of support is correct for your balance and abilities. Many factors can affect these two elements:

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| • Seat height | • Size and position of rear wheels |
| • Seat depth | • Size and position of front casters |
| • Back angle | • Seating system components |
| • Seat angle | • Tilt position (If applicable) |

There are additional actions that can have adverse effects on the stability of your wheelchair. You should consult with an assistive technology professional or clinical professional that is familiar with your needs and capabilities to determine what you are able to do safely while maintaining the stability of your wheelchair.

M. Aftermarket Seating



WARNING: The installation of a cushion on a wheelchair could affect the center of gravity of the wheelchair. Changes in your center of gravity may affect your stability in your wheelchair, resulting in tipping over or falling from your wheelchair which may result in serious injury. Always review the instructions for use of your wheelchair to see if changes to the wheelchair may be needed to provide sufficient stability after adding a cushion.



The integrity of your skin can be affected by many aspects of your daily life and medical condition, including the use of this product. Be sure to follow any skin care regimens established by your clinician. Consumers of this product should make sure their skin is inspected routinely for changes as directed by their clinician. Failure to do so could result in serious injury or death.

Selecting the Proper Seating Product

You should consult with a licensed clinician (i.e. Physician or therapist) trained in wheelchair seating and positioning before selecting any seating and positioning product. This will help ensure you receive the right product for your specific needs.

IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

A. Ascending Stairs



WARNING: Do not ascend stairs without the assistance of at least two people who are trained on the below steps and are able to handle the weight of you and the wheelchair. Ascending stairs can be challenging and may result in a fall that could result in damage to your wheelchair, serious injury or death to the user and/or those assisting.

NOTE: When ascending a set of stairs the user should be facing the bottom of the stairs.

1. Remove or turn the anti-tips up when ascending stairs. Always remember to reinstall or turn the anti-tips to the down position after they were removed or turned to the up position. If the anti-tips are left in the down position when ascending stairs, they can be bent or broken. If the anti-tips are bent or broken, they will no longer prevent the wheelchair from tipping over backwards. Tipping over backwards could result in damage to your chair, serious injury or death.
2. Position one person behind the user and one person in front. The person in front and back must hold on to a non-removable part of the wheelchair.
3. The person behind the user tilts the wheelchair back and both attendants lift together. Take one step at a time.

B. Descending Stairs



WARNING: Do not descend stairs without the assistance of at least two people who are trained on the below steps and are able to handle the weight of you and the wheelchair. Descending stairs can be challenging and may result in damage to your wheelchair, serious injury or death to the user and/or those assisting.

NOTE: When descending stairs, the user should be facing the top of the stairs.

1. Remove or turn the anti-tips up when descending stairs. Always remember to reinstall or turn the anti-tips to the down position after they were removed or turned to the up position. If the anti-tips are left in the down position when descending stairs, they can be bent or broken. If the anti-tips are bent or broken, they will no longer prevent the wheelchair from tipping over backwards. Tipping over backwards could result in damage to your chair, serious injury or death.
2. Position one person behind the user and one person in front. The person in front and back must hold on to a non-removable part of the wheelchair.
3. The person behind the user tilts the chair backward and guides the wheelchair down the stairs slow and one step at a time on the rear wheels of the chair.

IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

C. Transfers



WARNING

WARNING: There are many varied appropriate transfer techniques that depend on your level of disability and your unique individual functional capabilities. You should be trained by a clinical professional in the proper transfer technique for you. Assume that you can safely transfer on your own before attempting independent transfers. Be aware there is likely a point during the transfer when the wheelchair seat is not below you. Failure to perform a transfer properly can result in a fall that could result in severe injury or death.

NOTE: Before transferring out of your wheelchair every caution should be taken to reduce the gap between the two surfaces.

1. Engage the wheel locks to lock the rear wheels.
2. Rotate the casters forward to increase the wheelbase of the wheelchair.
3. Remove or swing away the footrests.
4. Have someone assist you unless you are well experienced and able in transfers.

D. Transit Use



WARNING

WARNING: Never use your wheelchair as a seat in a motor vehicle unless it has been equipped with the transit option. It is always safest to transfer out of your wheelchair onto a seat in a motor vehicle with appropriate seat and shoulder belts. Using your wheelchair as a seat in a motor vehicle, if not equipped with the transit option, could result in serious injury or death.

The wheelchair equipped with the transit option has been tested to and passed the RESNA WC-4, Section 19: Wheelchairs used as seats in motor vehicles and ISO 7176-19 Wheelchairs -- Part 19: Wheeled mobility devices for use as seats in motor vehicles. RESNA and ISO standards are designed to test the structural integrity of the wheelchair as a seat for use in a motor vehicle. These standards are also designed to create compatibility with Wheelchair Tie-down and Occupant Restraint Systems (WTORS).

Not every wheelchair configuration is compatible with the transit option. Ki Mobility manages the configuration and does not offer this wheelchair except in compatible configurations. If you make changes to your wheelchair after you receive it, you should contact your wheelchair provider or Ki Mobility to make sure it is appropriate to continue to use your wheelchair as a seat in a motor vehicle.

Crashworth Pelvic belt restraints and instructions for use are available from Ki Mobility Customer Service to be used in conjunction with a vehicle anchored shoulder belt.


Aftermarket seating may have replaced the original equipment seat and back support designed and tested as part of the transit option. Your wheelchair provider should tell you if the seating they provided is original equipment or replacement aftermarket seating. A complete system of wheelchair frame, seating, Wheelchair Tie-down and Occupant Restraint Systems and a properly equipped motor vehicle, that have all complied with the standards mentioned in this section, should be in place before using a wheelchair equipped with the transit option as a seat in a motor vehicle.

When using your wheelchair as a seat in a motor vehicle you should always observe the following instructions:


IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

D. Transit Use (Continued)

- The rider must be in a forward-facing position.
- The rider and all items carried must not weigh more than 165 lbs (75 kg).
- Some configurations of this model may exceed 28.5 in. (724 mm) in width which is the minimum width for lift platforms for ADA compliant vehicles.
- In case of heavy and oversized wheelchairs, transportation in larger vehicles is recommended when the option exists.
- Backpacks and pouches should be removed and secured separately in the motor vehicle. In the event of an accident these items can become dangerous projectiles, which may injure or kill you or other occupants of the motor vehicle.
- The rider must use a Wheelchair Tie-down and Occupant Restraint System that complies with RESNA WC-4, Section 18: Wheelchair tie-down and occupant restraint systems for use in motor vehicles or ISO 10542-1 Technical systems and aids for disabled or handicapped persons -- Wheelchair tie-down and occupant-restraint systems -- Part 1: Requirements and test methods for all systems.
- Attach the wheelchair tie-downs to the four securement points (two front, two rear) on the wheelchair with the transit option (Fig. 1) in accordance with the wheelchair tie-down manufacturer's instructions and RESNA WC-4, Section 18 or ISO 10542-1, - Part 1.
- Use only designated securement points to secure your wheelchair to a vehicle.

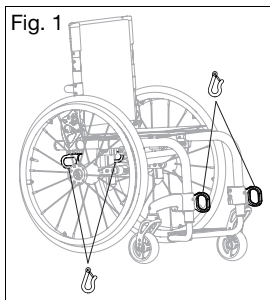

- Attach occupant restraints in accordance with the occupant restraint manufacturer's instructions and RESNA WC-4, Section 18 or ISO 10542-1, Part 1.
- Both pelvic and shoulder belt restraints should be used to reduce the possibility of head and chest impacts with vehicle components.

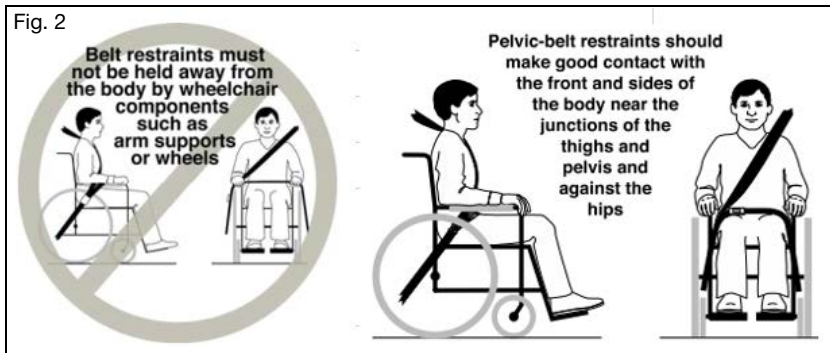

IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

D. Transit Use (Continued)

WARNING

WARNING: Ensure restraint release mechanisms will not be activated by wheelchair components during a crash. Activation of restraint release mechanisms during a crash may result in serious injury or death.



Use of headrests, lateral supports or other positioning accessories should not be used, or relied on as an occupant restraint. These belts should be positioned so that they don't interfere with the proper positioning of crash-worthy belt restraints and should not be relied on for occupant protection in crash situations unless the postural belt has been designed to comply with, and perform to, requirements 4.6, 5.2, 5.3 and 6.1 of RESNA WC-4.

WARNING

WARNING: Back supports with adjustable incline angles should not be reclined more than 30 degrees to vertical during vehicle travel unless necessary for the postural and medical needs of the occupant. After being fitted and adjusted, the top of the back support surface should be within 4 inches (10.2 cm) of the top of your shoulder. Failure to properly adjust backs support and incline angles may result in serious injury or death.


- Any aftermarket seating should be tested to comply with RESNA WC-4, Section 20 or ISO 16840-4 - Part 4.
- Attach the seating to the wheelchair frame in accordance with the seating manufacturer's instructions and RESNA WC-4, Section 20 or ISO 16840-4 - Part 4.
- Accessories such as trays, oxygen tank holders, oxygen tanks, IV poles, back packs, pouches and items not manufactured by Ki Mobility should be removed and secured separately in the motor vehicle. In the event of an accident, these items can become dangerous projectiles which may injure or kill you or other occupants of the motor vehicle.
- If the wheelchair has been involved in an accident, you should not continue to use it, as it may have suffered fatigue, or damage, that may not be visible.

IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

D. Transit Use (Continued)

⚠️ WARNING ⚠️

WARNING: If interior components of the vehicle cannot be removed from the clear zone (Fig. 3) especially those near the occupants head during a side impact or vehicle rollover, they should be padded with material that complies with FMVSS 201. Failure to pad interior components in the clear zone may result in serious injury or death.

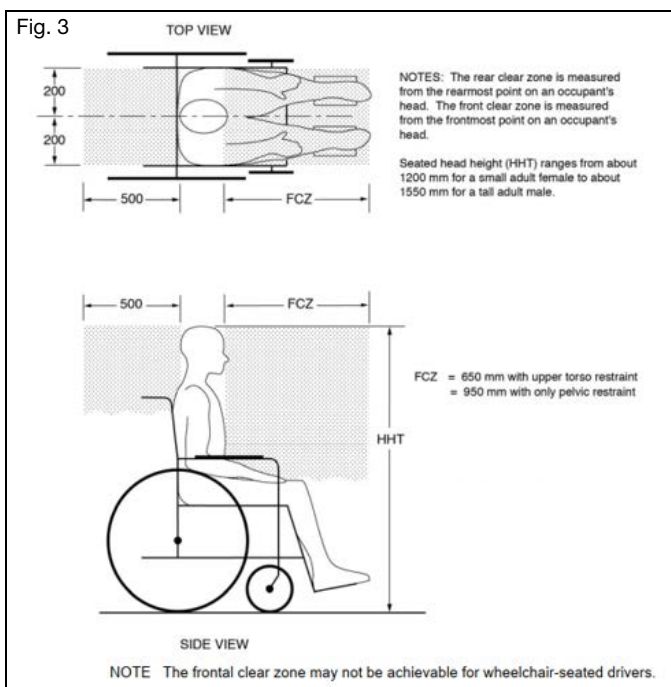

IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

D. Transit Use (Continued)



WARNING: Remove and secure any items temporarily attached to the chair while in a motor vehicle. Leaving items attached to the vent tray, battery tray or oxygen tank holder and not securing them properly and separately in a motor vehicle could result in these items becoming dangerous projectiles in the event of an accident. Additionally, oxygen tanks contain a highly pressurized gas that vigorously accelerates combustion. These factors could lead to serious injury or death to the user and/or anyone else in the vehicle.

- When using this wheelchair as a seat in a motor vehicle, you must remove any items attached to the vent tray, battery tray or oxygen tank holder and properly secure them separately.
- If the chair is equipped with an oxygen tank holder never use the wheelchair as a seat in a motor vehicle.

NOTE: To obtain copies of RESNA or ISO standards please contact the standards organizations below:

RESNA

www.resna.org

ANSI/RESNA Standards:

RESNA WC-4, Section 18:

Wheelchair tie-down and occupant restraint systems for use in motor vehicles.

RESNA WC-4, Section 19:

Wheelchairs used as seats in motor vehicles.

RESNA WC-4, Section 20:

Wheelchair seating systems for use in motor vehicles.

International Organization for Standardization (ISO)

www.iso.org

ISO Standards:

ISO 10542-1 Technical systems and aids for disabled or handicapped persons -- Wheelchair tie-down and occupant-restraint systems -- Part 1:

Requirements and test methods for all systems.

ISO 16840-4 Wheelchair seating – Part 4:

Seating systems for use in motor vehicles.

ISO 7176-19 Wheelchairs – Part 19:

Wheeled mobility devices for use as seats in motor vehicles.

U.S. Department of Transportation

FMVSS 201

www.nhtsa.gov

Occupant Protection in Interior Impact - Upper Head Impact Protection

Transit Test Results

Rating for lateral stability is Good.

Type of restraint: Three Point

Rating for ease of proper positioning a three point belt is Excellent.

Rating for the degree to which proper three point belt can be achieved is 16/16.

IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

E. Cushion Use



WARNING: Avoid sitting for long periods of time without a proper wheelchair cushion. Sitting for long periods of time without a proper wheelchair cushion could cause pressure ulcers which could lead to serious infections or even death.



Secure the cushion before use or transfer. Failure to secure a cushion can cause it to slide out during use or transfers, resulting in a fall or loss of control. A fall or loss of control could result in damage to your chair or in serious injury or death to you or others.

- a. This wheelchair was designed to be used with a proper wheelchair cushion.
- b. The standard sling upholstery is provided with hook and loop self fastening strips. The cushion being used should have hook type fasteners that can engage the loop of the seat sling to keep the cushion from sliding out from under you. Ensure the cushion is securely attached before transferring or sitting in the wheelchair.
- c. A standard seat sling may not have been provided with your chair. Check with your wheelchair provider if an aftermarket replacement to the original equipment sling has been provided. If so, make sure you follow the instructions for use provided by the aftermarket manufacturer.


F. Transporting of Unoccupied Wheelchair

Ki Mobility wheelchairs are generally suitable for transport in motor vehicles and airplanes. Wheelchairs should always be secured (specific instructions from carrier required). Depending on wheelchair configuration, any particular wheelchair may be too large for transport in some motor vehicles or airplanes. Refer to other sections on how to remove options and accessories to decrease size for stowing.

IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

G. Your Clik & Its Parts

1. Inspect and maintain your chair using information found in the Maintenance and Care section.
2. If you detect a problem, contact your authorized supplier immediately.

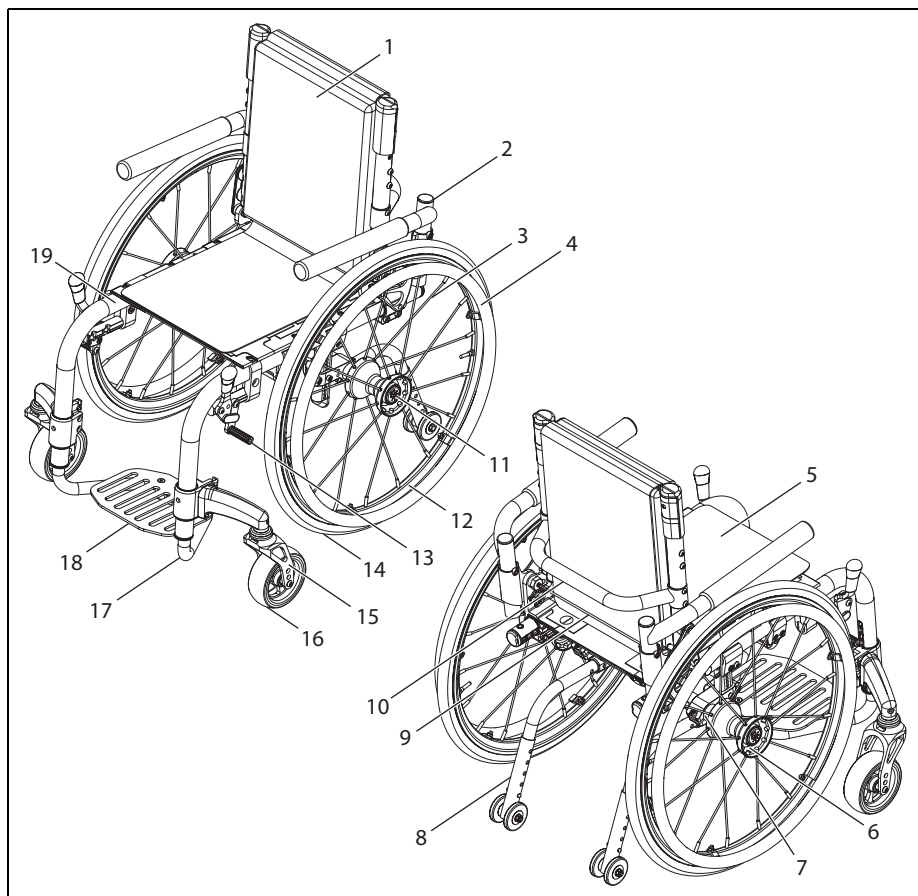

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Backrest Upholstery | 11. Quick-Release Axle |
| 2. Swing Away Armrest | 12. Aluminum Wheel Rim |
| 3. Spoke | 13. Wheel Lock |
| 4. Handrim | 14. Wheel |
| 5. Seat Upholstery | 15. Caster Fork |
| 6. Rear Wheel Hub | 16. Caster |
| 7. Camber Tube | 17. Footrest |
| 8. Anti-Tip | 18. Footplate |
| 9. Release Cable | 19. Seat Frame |
| 10. Rigidizer Bar | |

IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION


H. Height Adjustable T-Arm



WARNING: These arms offer only a lock against rotation and are designed to bear a downward force only. They will remove completely if pulled up on and cannot be used to lift or otherwise handle the chair. Failure to comply with the instructions above may result in the armrest accidentally disconnecting from the wheelchair and result in a fall or loss of control and may cause serious injury or death.

How to Use Your Armrest

1. Installation
 - a. Slide the outer armpost into the receiver mounted to the wheelchair frame.
 - b. The armrest will automatically lock into place. Check to make sure the locking lever is as shown (Fig. 4:B).
2. Height Adjustment
 - a. Rotate the release lever (Fig. 4:A).
 - b. Slide the armrest pad up or down to the desired height.
 - c. Return the lever to the locked position against the arm post.
 - d. Push the arm pad until the upper arm locks firmly into place. Check to make sure the locking lever is as shown (Fig. 4:A).
3. Removing the Armrest
 - a. Squeeze the release lever (Fig. 4:B) and remove the armrest.

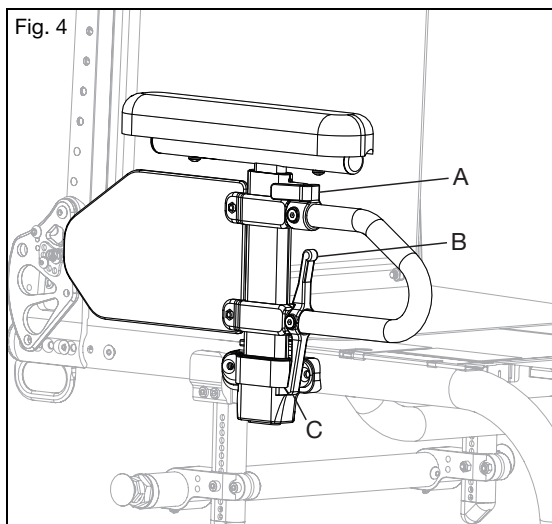

IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION


I. Swing Away Armrests



WARNING: These arms offer only a lock against rotation and are designed to bear a downward force only. They will remove completely if pulled up on and cannot be used to lift or otherwise handle the chair. Failure to comply with the instructions above may result in the armrest accidentally disconnecting from the wheelchair and result in a fall or loss of control and may cause serious injury or death.

How to Use Your Armrest

1. Installation (Fig. 5)
 - a. Slide the armrest into the tube of the receiver that is mounted on the rear side of the frame.
2. Swinging the Arm
 - a. Lift the armrest slightly so it is free of the receiver bolt. Rotate away from the chair.
3. Removing the Armrest
 - a. Lift the armrest straight out of the receiver.

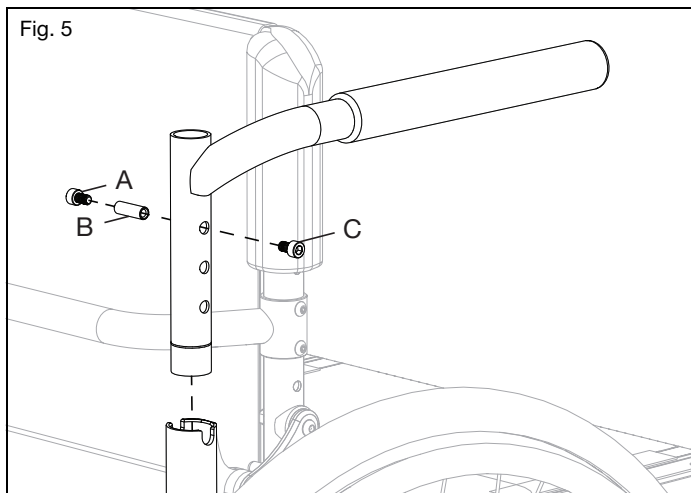

IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

J. Height Adjustable Pediatric T-Arm





WARNING

WARNING: These arms offer only a lock against rotation and are designed to bear a downward force only. They will remove completely if pulled up on and cannot be used to lift or otherwise handle the chair. Failure to comply with the instructions above may result in the armrest accidentally disconnecting from the wheelchair and result in a fall or loss of control and may cause serious injury or death.

How to Use Your Armrest

1. Installing the Armrest (Fig. 6)
 - a. Slide the armrest post into the receiver on the side frame. Ensure the pin in lever engages the receiver.
2. Removing the Armrest
 - a. Push the lever (Fig. 6:A) in towards the side guard panel to release the pin from the receiver.
 - b. Pull the armrest straight out of the receiver.
3. Adjusting the Armrest Height
 - a. Remove the armrest from the receivers.
 - b. Remove the two 6mm screws from the side guards (Fig. 7:A).
 - c. Remove the screw (Fig. 7:B) from the side guard post stop through the side guard post, but do not pull out entirely. Screw can remain in the lever assembly. Repeat on opposite arm.
 - d. Reset the post stop and lever assembly on the side guard post to the desired position. Retighten the screw (Fig. 7:B) and repeat on opposite arm.
 - e. Place the side guard in the desired position and replace two 6mm screws (Fig. 7:A) to secure the side guard in place. Tighten the two 6mm screws and repeat on opposite side.
 - f. Replace the armrest assemblies into the receiver (Fig. 6).

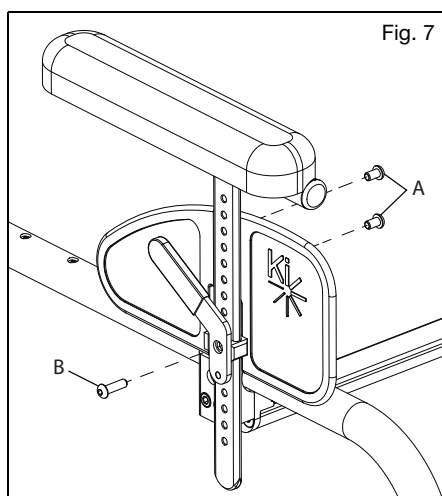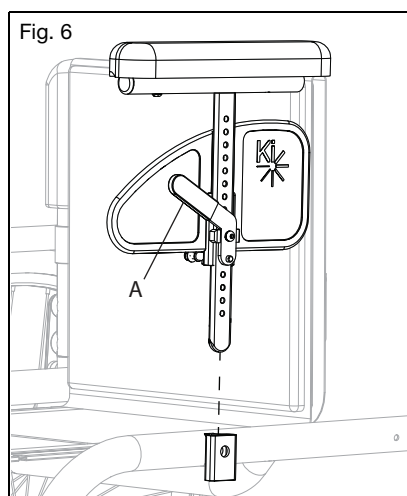

IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION


K. Angle Adj. Locking Extendable Flip Up Armrest

WARNING

WARNING: These arms offer only a lock against rotation and are designed to bear a downward force only. They will remove completely if pulled up on and cannot be used to lift or otherwise handle the chair. Failure to comply with the instructions above may result in the armrest accidentally disconnecting from the wheelchair and result in a fall or loss of control and may cause serious injury or death.

How to Use Your Armrest

- 1. Flip the Armrest Up
 - a. Press the release lever (Fig. 8:A) up to release the armrest.
 - b. Swing the released armrest up.
- 2. Return the Armrest to Operating Position
 - a. To return the armrest to the operating position, push the armrest down until the lever clicks and locks.

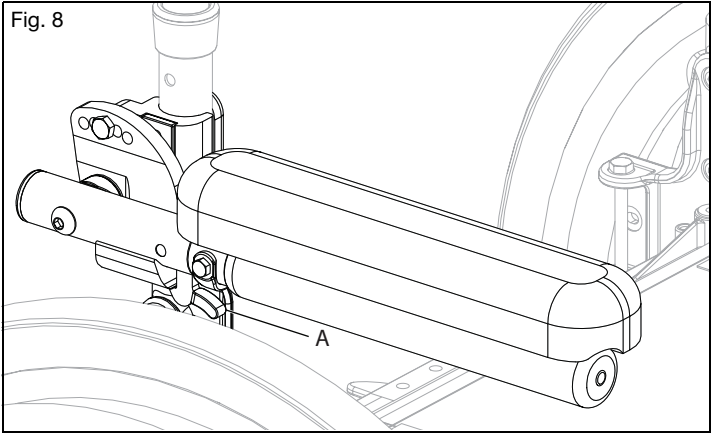

IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

L. Rear Wheels




WARNING: Before operating chair, assure the push button is completely extended and locking balls on the inside are fully engaged. Failure to do so may result in the wheel falling off, which could cause a fall or tip-over resulting in serious injury or death to you or others.

How to Use Your Rear Wheels

1. Installing Wheels (Fig. 9)

- a. Push in the quick release button on the axle to allow the locking balls to retract. Make note of the difference between the extended and depressed position of the axle release button and its effect on the locking balls on the other end of the axle.
- b. Insert the axle into the bearing housing on the wheel if it's separate.
- c. Push on quick release button again and slide axle into axle sleeve.
- d. Release the button to lock axle in sleeve. If release button does not fully extend and the locking balls do not move into the locked position after releasing the button, the axle length needs to be adjusted.
- e. If the wheel does not fit, try installing on the opposite side.

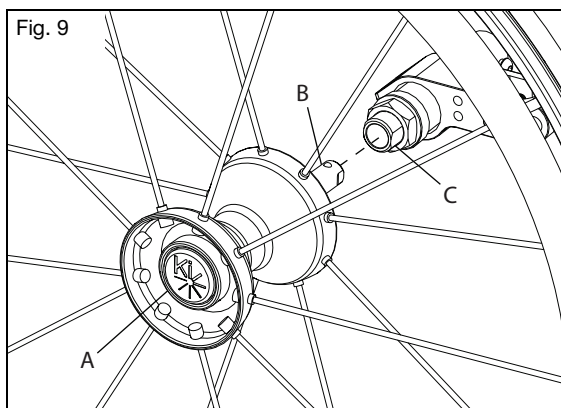

2. Removing Wheels

- a. Hold the wheel close to the hub and push in the button on the outside end of the axle.
- b. While still holding the button, pull the wheel and axle out of the axle sleeve.


IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

M. Adjusting the Footrest

How to Change the Height Adjustment of Your Footrest

NOTE: The footrest height should be determined by working with your clinician to ensure the proper fit for you individual needs.


1. On each side of the frame, loosen the lower 3mm screw (Fig. 10:A).
2. Adjust the footrest tube up or down to the desired height within the side frame. If the footrest was being replaced, the footrest tube would slide all the way out in this step.
3. Ensure both sides are adjusted equally and retighten the 3mm screw on each side to 40 in./lbs to secure.

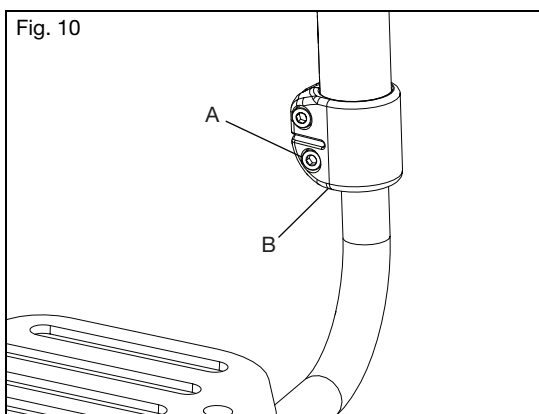

N. Angle Adjustable Footrest

How to Use Your Footrest

1. Adjust the Angle of the Footplate
 - a. Loosen the two screws (Fig. 11:A) on the bottom of the footrest using a 4mm Allen wrench.
 - b. Rotate footrest to desired angle and secure in place by retightening the two screws.

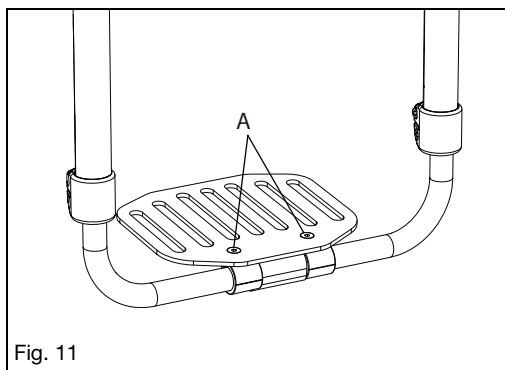


IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

O. High Mount Angle Adjustable Flip Under Footrest

How to Use Your Footrest

1. Adjusting the Angle
 - a. Loosen, but do not remove, the two 6mm screws on the center clamp.
 - b. Once loose, the clamp will rotate around the footrest extension tube. Adjust the clamp into the desired position.
 - c. Retighten the two 6mm screws to 80 in./lbs to secure.
2. Changing the Footplate Position
 - a. Remove both M6 screws (Fig. 12:A) from the footplate. Catch the nuts that may drop from the underside of the clamp.
 - b. Relocate the footplate and insert the screws into the appropriate holes.
 - c. Fit the nuts into the slot underneath the clamp and tighten the screws to secure.
3. Changing the Height of the Footplate
 - a. Slightly loosen both the 6mm screws (Fig. 12:B) from the footplate clamp. Keep the clamp snug so the assembly holds together and repeat on the opposite side.
 - b. The entire footplate assembly can now slide up or down along the frame. Move the footplate to the desired position.
 - c. Tighten one of the 6mm screws (Fig. 12:B) slightly on each side. Once secure, finish tightening the four 6mm screws (Fig. 12:B). Tighten each screw a little at a time to prevent the clamp from clamping down unevenly.

NOTE: Tightening the screws unevenly may result in damage to the threads inside the clamp.

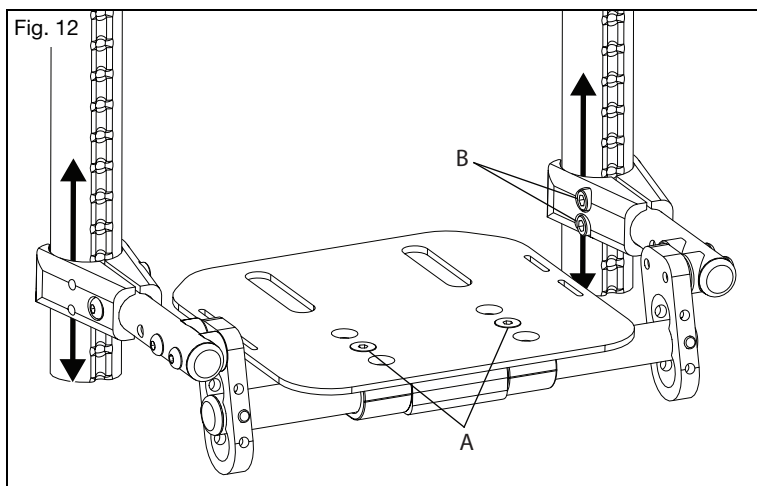

IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

O. High Mount Angle Adjustable Flip Under Footrest (Continued)



4. Removing the Footrest
 - a. Remove two 6mm screws (Fig. 13:A) from each side of the footrest frame clamp.
 - b. The entire footplate assembly can now be removed.
5. Replacing the Footrest
 - a. Loosen the two 6mm screws (Fig. 13:B) on the center clamp.
 - b. Slide the tube (Fig. 13:C) out of the center clamp.
 - c. Remove the two 6mm screw (Fig. 13:D) from the mount bracket.
 - d. Slide the tube (Fig. 13:C) out of the mount bracket.
 - e. Replace the tube (Fig. 13:C) with one of the new tubes from the growth kit.
 - f. Repeat steps a - e on the opposite side.
 - g. Reinsert the 6mm screw (Fig. 13:D) through the mount bracket and tube (Fig. 13:C). Retighten and repeat on the opposite side ensuring the same holes are used on both sides.

NOTE: There are three possible positions (Fig. 14:A). Choose the position that is optimal for the desired footrest height.

- h. Insert the tube (Fig. 13:C) through the pivot bracket (Fig. 13:E) and into the center clamp. Repeat on the opposite side.
- i. Mount the complete footrest assembly onto the front frame in the desired footrest height location by placing the clamps on the front frame.
- j. Replace the two 6mm screws (Fig. 13:A) into the clamp on each side.
- k. Tighten one of the 6mm screws slightly on each side. Once secure, finish tightening the four 6mm screws. Tighten each screw a little at a time to prevent the clamp from clamping down unevenly.

NOTE: Tightening the screws unevenly may result in damage to the threads inside the clamp.

- l. To set the footplate angle, rotate the center clamp around the footrest extension tube.
- m. Select the desired position and retighten the two 6mm screws (Fig. 13:B) to 80 in./lbs.

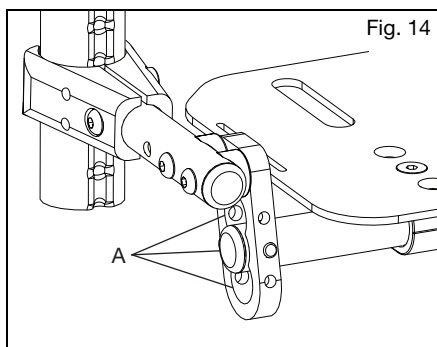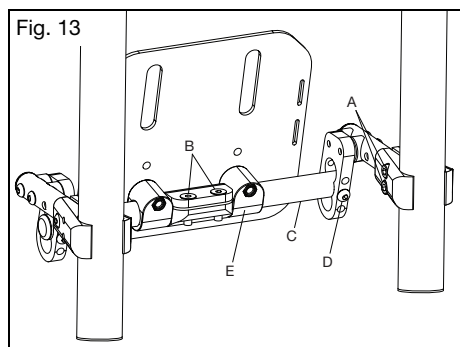

IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

P. Wheel Locks





WARNING: Underinflated or worn tires may cause your wheel locks to not function properly. Failure of the wheel locks to hold your chair could cause a loss of control or fall resulting in serious injury or death.

How to Adjust Your Wheel Locks

NOTE: Always loosen and tighten wheel lock hardware by alternating between the two bolts while loosening/tightening a little at a time. This prevents overclamping on one set of hardware which leads to binding of the fasteners and increased difficulty in removal.

1. Use a 5mm Allen wrench to turn one of the screws in the clamp until it runs easily (less than one turn).
2. Repeat step 1 with the second screws so the clamp can be adjusted on the frame.
3. Adjust the clamp along the frame so the wheel lock properly compresses the tire and prevents any wheel movement. See Fig. 15.
4. Retighten the screws.
5. Always test new wheel lock positioning on a flat level surface. Once wheel locks are engaged, the wheels should not slip or move. If the wheel locks are not fitted properly readjust wheel lock again. See Fig. 16.

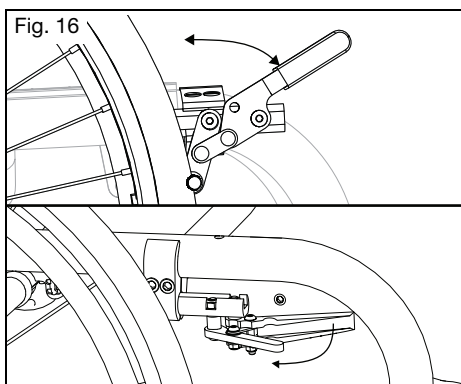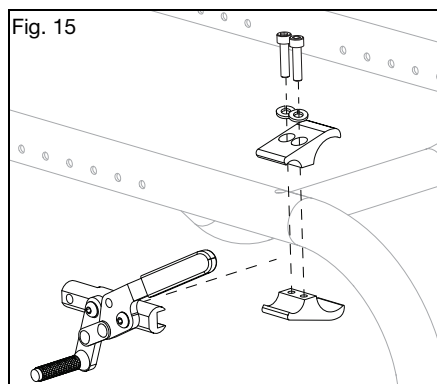

Wheel Lock Operation

1. Wheel lock operation is based on the lock style your chair is equipped with. Engagement of the wheel lock bar to tire is done by pushing or pulling on the wheel lock handle to fully engage wheel lock bar to tire.
2. To disengage wheel lock move in opposite direction.

IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

Q. Anti-Tips

⚠️ WARNING ⚠️

WARNING: Always keep anti-tips in the down position when they are not at risk of interference. Have a clinical or technical professional confirm your anti-tips are installed in the correct position. They can do so by tipping the occupied wheelchair back on to the anti-tips to test that they properly limit the rearward rotation of your wheelchair. If the anti-tips allow your wheelchair to tip to a point where your center of gravity (COG) is vertically aligned with the point where the wheel contacts the ground, the wheelchair is unstable and could result in the wheelchair tipping over. Tipping over could result in damage to your wheelchair, serious injury or death.

- ⚠️ New and experienced wheelchair users switching to a new wheelchair or adjusting the configuration of a current wheelchair should always use anti-tips. If the user has a change in physical capabilities, they should use anti-tips as well. Any change in the user's physical capabilities or wheelchair increases the risk of tipping over backwards. Tipping over backwards could result in damage to your wheelchair, serious injury or death. You should always use anti-tips until you have adapted to the new or adjusted wheelchair.
- ⚠️ Remove or turn the anti-tips up when ascending or descending curbs, obstacles and steps. If the anti-tips are left in the down position when ascending or descending curbs, obstacles and steps, they can become bent or broken. If the anti-tips are bent or broken, they will no longer prevent the wheelchair from tipping over backwards. Tipping over backwards could result in damage to your wheelchair, serious injury or death.
- ⚠️ Using your wheelchair on soft surfaces (including but not limited to sand, loose soil, grass and gravel), uneven grades and ramps can cause anti-tips to lose effectiveness resulting in the wheelchair tipping over backwards. Tipping over backwards could result in damage to your wheelchair, serious injury or death.
- ⚠️ Ki Mobility recommends using two anti-tips on your wheelchair. Use of a single anti-tip increases the risk of tipping over backwards. Tipping over backwards could result in damage to your wheelchair, serious injury or death.

Ki Mobility recommends using anti-tips with your wheelchair. Anti-tips help prevent your wheelchair from tipping over backwards. When adjusted properly, anti-tips provide a significant increase in rearward stability. Use of anti-tips does not guarantee your wheelchair will not tip over. Always remember to reinstall or turn the anti-tips to the down position after they were removed or turned to the up position.

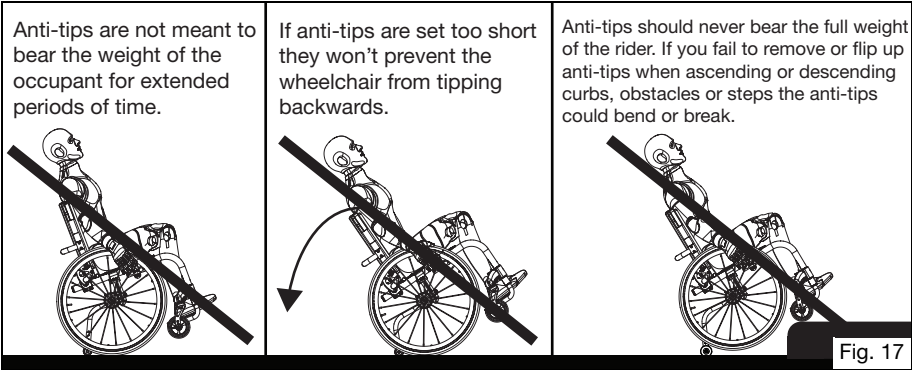



Fig. 17

IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

Q. Anti-Tips (Continued)


How to Install the Standard Anti-Tips (Fig. 18)

1. Press the rear anti-tip release pin (Fig. 18:A) on the anti-tip tube so both the release pins are drawn inside.
2. Insert the anti-tip tube into the receiver mounted on the camber tube.
3. Turn the anti-tip tube down until the release pin is positioned through the receiver mounting hole.
4. Insert the second anti-tip tube the same way.

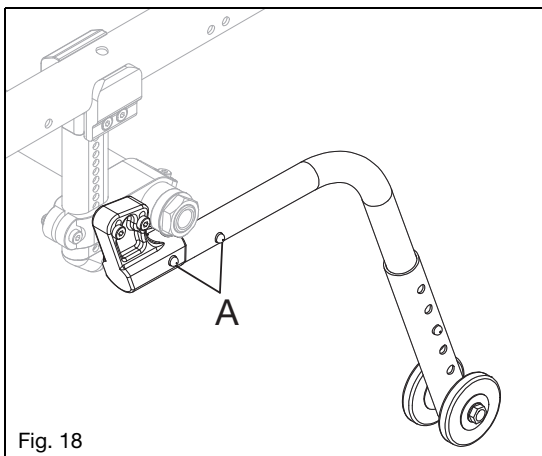

How to Adjust the Wheel Extension Height (Fig. 19)

1. Press the anti-tip wheel release pin so the release pin (Fig. 19:A) is drawn inside.
2. Raise or lower the anti-tip to any of the predrilled holes.
3. Release the pin.
4. Adjust the second anti-tip tube wheel the same way. Both of the wheels should be at exactly the same height.

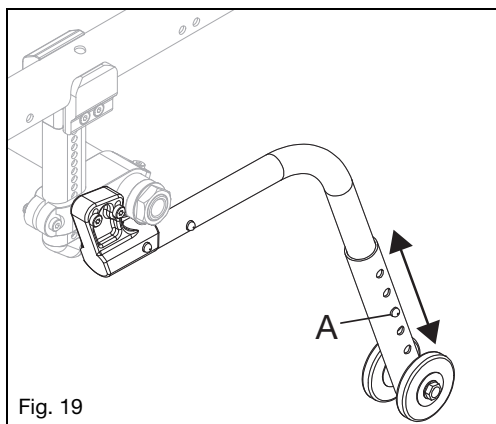


IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

Q. Anti-Tips (Continued)

How to Turn the Anti-Tip Tubes Up (Fig. 20)

1. Press the rear anti-tip tube release pin (Fig. 20:A).
2. Hold the pin in and turn the anti-tip tube up.
3. Release the pin.
4. Repeat with the second anti-tip tube.
5. Return the anti-tip tubes to the down position after completing the maneuver.

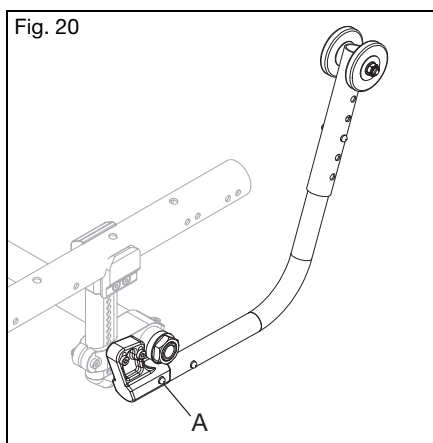

R. Contact Surfaces

WARNING

WARNING: Handling of wheelchair surfaces with elevated temperatures can result in a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in injury.



Do not expose the chair and components to any extreme cold. Extremely cold metal surfaces may result in skin freezing to the surface and resulting in skin damage.

Be aware that prolonged exposure to direct sunlight or other sources of radiant heat may increase the temperature of surfaces on your wheelchair above recommended limits estimated by standards.

Caretakers should assess patients for adverse reactions on the skin from contact surfaces such as redness, swelling, irritation sensitization, allergy, immune response or other reactions.

IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

S. Upholstery Fabric

WARNING

WARNING: You must immediately replace seat and back upholstery that has worn through and shows signs of failing. If you fail to do so, the seat or back may fail which could cause a fall resulting in serious injury or death.

The seat sling material will weaken over time. The repeated action of transferring to your wheelchair will weaken your sling material quicker. Inspect your upholstery for fraying, thin spots or stretching of fabrics especially at edges and seams. This should be done monthly. Also, be aware that laundering or excess moisture will reduce flame retardation of the fabric. See the Maintenance and Care section for proper cleaning and maintenance notes. Contact your authorized supplier if you have concerns about your seat or back, or feel it needs to be replaced.

T. Folding Backrest



WARNING

WARNING: Do not lift the wheelchair by the release bar (Fig. 21:A). Lifting the wheelchair by the release bar may cause parts to fail which could cause a fall resulting in serious injury or death.

 Do not occupy or operate the chair when backrest is not latched. Doing so could in a fall which could result in serious injury or death.

How to Use the Folding Backrest

1. Pull the release bar (Fig 21:A), located behind the back frame, outward to release the latch and fold the backrest downwards toward the seat frame (Fig. 22).
2. To latch the backrest back into place, pull the release cable outward and the back will release and can be pushed back into the upright position. The backrest will automatically latch onto the side frame.
3. Ensure a solid engagement onto the latches by pulling back on the backrest frame into the upright position.

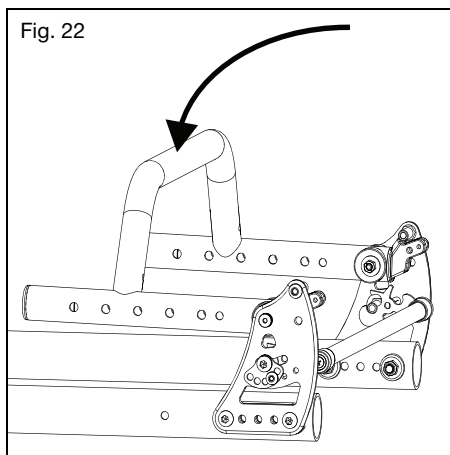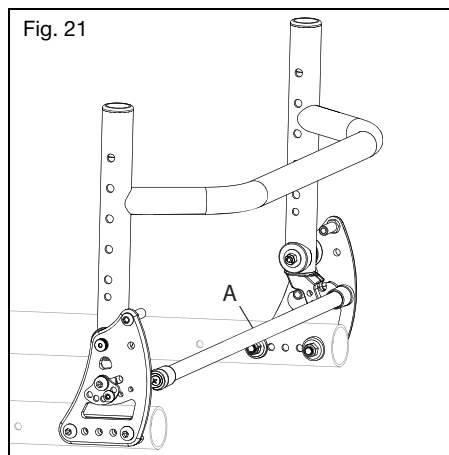


IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

U. Standard 5th Wheel

When adjusting the 5th wheel, consider the environmental obstacles that may be encountered. If the 5th wheel caster touches the ground, it is possible that the large rear wheels might not touch the ground. Always ensure enough clearance between the ground and the 5th wheel caster.

How to Use the Standard 5th Wheel

1. Inserting and Removing the Standard 5th Wheel
 - a. Press the two release buttons (Fig. 23:A) on the support tube so both buttons are drawn inside.
 - b. Insert the assembly into the support tube receiver (Fig. 23:B).
 - c. Rotate the support tube down until the release pin buttons are positioned through the receiver mounting holes.
2. Adjusting the Position from the Floor
 - a. The caster housing is adjustable within the support tube.
 - b. Remove the wing nut (Fig. 23:C) from the bolt holding the caster housing into the support tube.
 - c. Slide the housing to the desired height and replace the bolt and secure the wing nut.

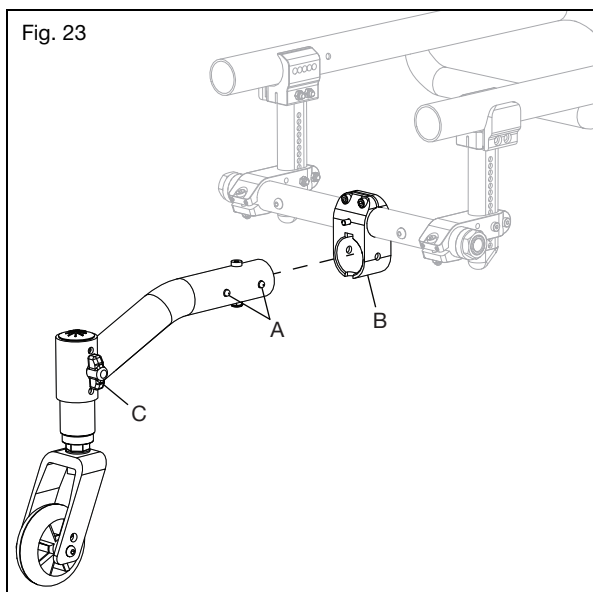



IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

V. Dynamic 5th Wheel

When adjusting the 5th wheel, consider the environmental obstacles that may be encountered. If the 5th wheel caster touches the ground, it is possible that the large rear wheels might not touch the ground. Always ensure enough clearance between the ground and the 5th wheel caster.

How to Use the Standard 5th Wheel

1. Inserting and Removing the Standard 5th Wheel
 - a. To remove, pull the release knob (Fig. 24:A) to disengage the locking pin and slide the assembly out of the tubular receiver (Fig. 24:B).
 - b. To insert the assembly, pull the release knob (Fig. 24:A) and insert the assembly into the tubular receiver (Fig. 24:B).
 - c. Rotate the assembly in the receiver to align the slot (Fig. 24:C) and the cross pin (Fig. 24:D).
 - d. Release the knob (Fig. 24:A).
2. Adjusting the Position from the Floor
 - a. The caster stem is adjustable within the Dynamic 5th wheel arm.
 - b. Loosen the 6mm bolt in the clamping ring (Fig. 25:A).
 - c. Grasp the caster fork assembly and move up or down to the desired position. Take care to not rotate the caster stem within the housing while repositioning.
 - d. Retighten the 6mm bolt in the clamping ring (Fig. 25:A).

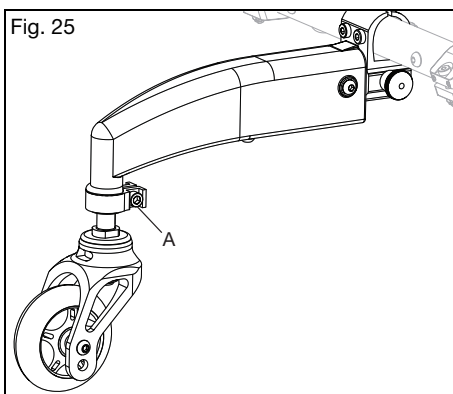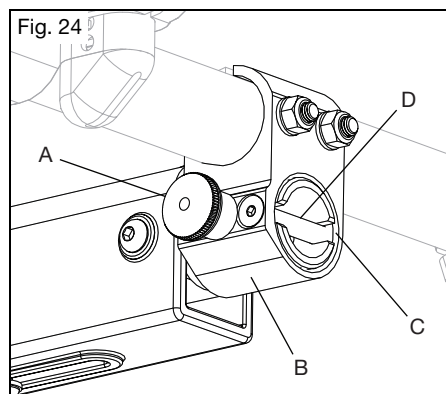

IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

V. Dynamic 5th Wheel (Continued)



3. Adjusting the Spring Force

- a. Remove the Dynamic 5th wheel assembly from the chair. Refer to step 1 in this section for directions.
- b. Loosen the 6mm screw located on the underside of the assembly (Fig. 26).
- c. To decrease the spring rate, slide the screw and elastomer away from the caster fork assembly. To increase the spring rate, slide the screw and elastomer towards the caster fork assembly.
- d. Retighten the 6mm screw (Fig. 26). Do not overtighten.

4. Changing or Replacing the Elastomer

The Klik has been provided with two elastomers for the Dynamic 5th wheel. The harder one is black and the softer one is yellow.

- a. Remove the Dynamic 5th wheel assembly from the chair. Refer to step 1 of this section for directions.
- b. Remove the 6mm screw from one side of Dynamic 5th wheel arm (Fig. 27:A) using two 4mm Allen wrenches.
- c. Using an Allen wrench, push the threaded barrel (Fig. 27:B) out of the arm assembly.
- d. Slide the tubular receiver (Fig. 27:C) out of the assembly.
- e. Remove the 6mm screw located on the underside of the assembly. This will release the elastomer (Fig. 27:D). Remove the elastomer and set aside.
- f. Insert the new elastomer into the opening on the arm assembly with the threaded insert facing down towards the slot, aligned with the slot in the arm.
- g. Thread the 6mm screw and the washer (Fig. 27:D) through the slot and into the threaded insert in the elastomer.
- h. Retighten the 6mm screw (Fig. 27:D). Do not overtighten.
- i. Reinsert the tubular receiver (Fig. 27:C) into the arm. Ensure the flat arm of the tubular receiver is placed over the top of the elastomer.
- j. Align the holes on the arm and the tubular receiver to insert the threaded barrel (Fig. 27:B) and the 6mm screw (Fig. 27:A).
- k. Tighten the 6mm screws (Fig. 27:A) using two 4mm Allen wrenches.

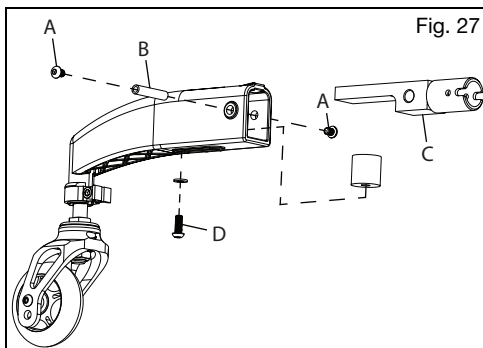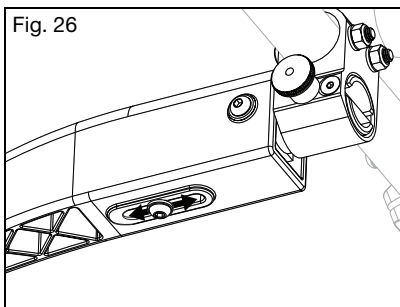

IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

W. Drum Brake

⚠ WARNING ⚠


WARNING: Ensure the drum brakes are properly adjusted. Using your wheelchair without properly adjusted drum brakes can affect the stability of the wheelchair causing a loss of control resulting in serious injury.

⚠ CAUTION ⚠

CAUTION: When stowing or transporting your wheelchair with the drum brakes removed, take care not to damage the exposed brake pads which can cause damage to your chair and affect the proper operation of the drum brakes (Fig. 29:C).


1. Brake Operation

- Squeeze the brake levers (Fig. 28:A) on both sides of chair to activate brakes. Each side is operated independently and may be squeezed with more or less force to get more or less braking action.
- Let go of brake levers to release brake.
- For parking brake function, squeeze each brake lever and, with trigger squeezed, use index finger to flip locking lever (Fig. 28:B) down into the teeth on the lever mount. While holding the locking lever down, release brake handles and parking brake will remain engaged.
- To release the parking brake, squeeze the brake levers until spring loaded locking levers snap back. Release the brake levers to deactivate the brake.

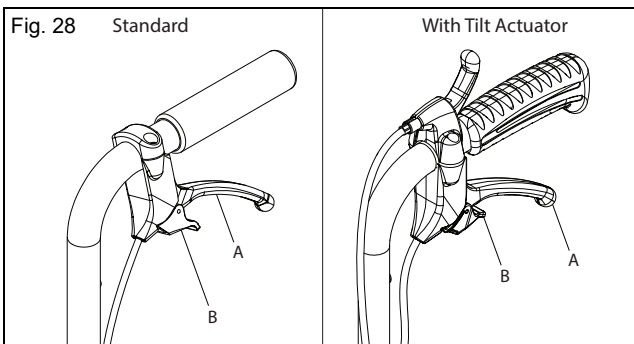

2. Brake Adjustment

- Using a 10mm wrench, unlock the jam nut (Fig. 29:A) on adjuster (Fig. 29:B). Unthread adjuster to get tighter braking action or thread adjuster in to reduce the braking action.
- It is recommended to adjust the brake until there is a slight bit of drag on the wheel when spun. Then thread the adjuster inward about $\frac{1}{2}$ turn, or whatever is necessary to remove all drag from the spinning wheel.
- Retighten jam nut to lock the adjustment in place. Repeat for opposite side of chair.
- Verify that the drum brake, when fully engaged, still prevents the wheels from rotating by attempting to push the wheelchair with the occupant in it and the wheels locked.

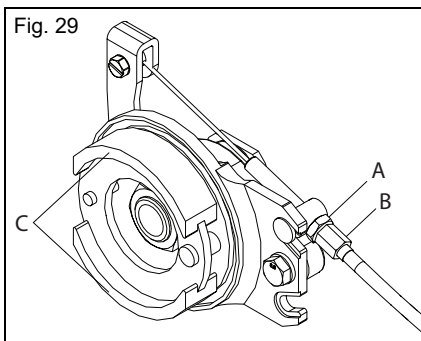

IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

X. Cane and Crutch Holder



WARNING




WARNING: Always remove any items temporarily attached to the wheelchair while in a motor vehicle. Leaving items attached and not storing them securely and separately in a motor vehicle could result in these items becoming dangerous projectiles in the event of a sudden or abrupt change in speed or direction. Additionally, secure canes or crutches in a proper manner while riding your wheelchair. These items may become entangled in the wheelchair resulting in a fall or tip-over. A fall or tip-over may result in damage to your chair or in serious injury or death.

How to Use Cane or Crutch Holder

1. Place narrow end of cane or crutch in the bottom receiving cup (Fig. 30:B).
2. Use the hook and loop fastener (Fig. 30:A) to secure the cane or crutch to the upper back cane. Confirm the canes or crutches will stay securely in place, both vertically and horizontally, when the wheelchair is in motion.

Fig. 30

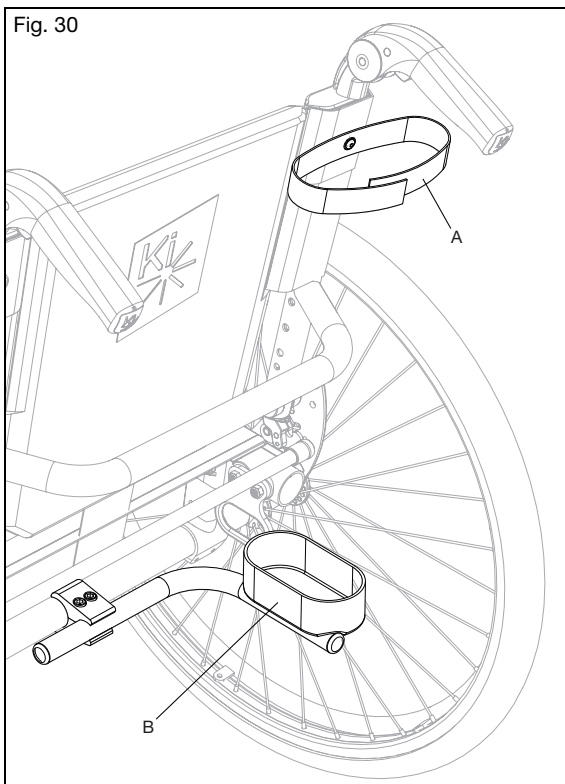


IV. WHEELCHAIR USE & CONFIGURATION

Y. Canopy

How to Use the Canopy

1. Folding the Canopy (Fig. 31:A)
 - a. To close, lift the front end of the canopy and take the front end all the way to the back end and fold the canopy out of the way.
 - b. To open, take the front end of the canopy and pull out and down until the canopy is fully stretched out.
2. Quick Removal and Quick Install (Fig. 31:C)
 - a. Push in the latches (Fig. 31:D) on both sides of the canopy and lift up and out of the receivers.
 - b. To reinstall the canopy, install both ends into the receivers until the latches catch the bottoms of the tube mount clamps and "lock" into place.
3. Rain Catch (Fig. 31:B)
 - a. The edge of the canopy will fold up to catch and direct rain away from the chair user.

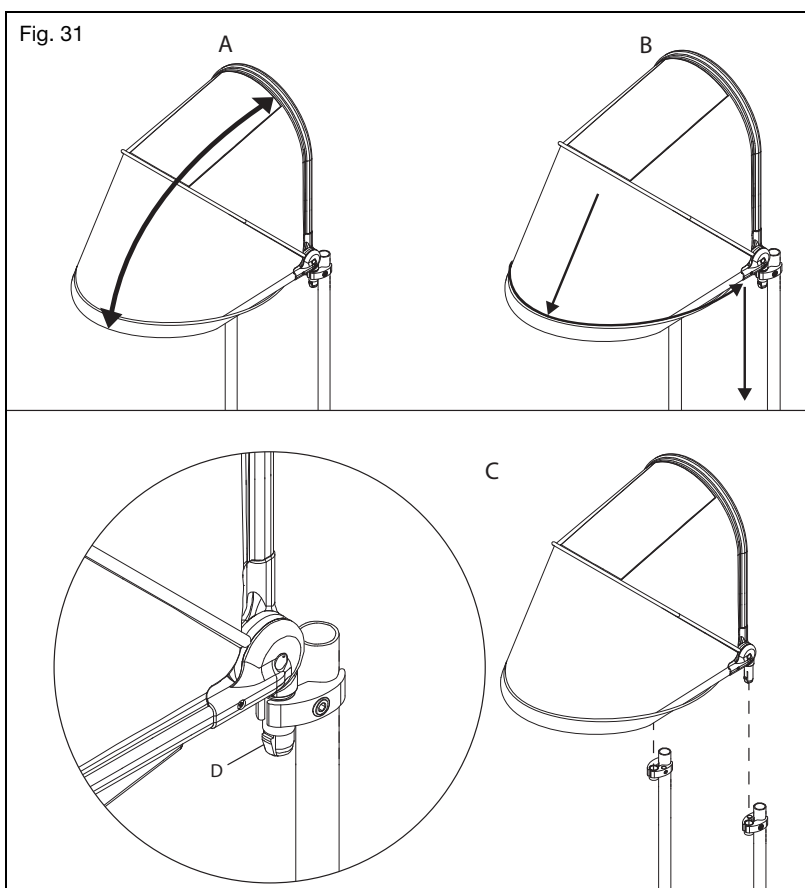

V. MAINTENANCE AND CARE

A. Maintenance Table

Regular and routine maintenance will extend the life of your wheelchair while improving its performance. Wheelchair repairs, the replacement of parts and any maintenance check that you are not comfortable performing should be done by an authorized supplier. Only use Ki Mobility approved parts when replacing components. Contact your Authorized Service Representative (Dealer locator can be found at Ki Mobility website) for parts information, identification, ordering and additional technical information or instruction. Most components are illustrated in "Ki Parts" on the Ki Mobility website.

Common tools to perform user authorized maintenance include: Tire pressure gauge, open end metric wrenches and metric allen wrenches.




CAUTION: Do not use petroleum-based solvents, degreasers or dewatering agents (including but not limited to automotive cleaners, alcohols or WD-40). Damage to components, bearings or finishes may occur.

Check	Weekly	Monthly	Annually
Check the tire inflation levels and inflate as needed. The correct inflation levels are found on the tire. (See pressure conversion table below if required - Fig. 32)	✓		
Check wheel lock engagement and disengagement. Tire pressure changes and tire wear will require the wheel locks to be adjusted. Wheel lock adjustment instructions can be found in the Wheel Locks section of this manual.	✓		
Check the axle sleeves to ensure the axle sleeve nuts are tight.	✓		
Check that quick release axles engage and disengage properly.	✓		
Check that caster wheels, anti-tip wheels and rear wheels spin freely. Cleaning or replacement parts may be needed if there are any issues.	✓		
Clean area around the caster housing and bearings. This is a common location for hair build up.	✓		
Clean your wheelchair. In the event of corrosive spills or exposure to biohazards, remove contaminants immediately. See the Cleaning section in this manual for instructions.	✓		
Check the rear tires, anti-tip wheels and the caster wheels for wear spots or damage. Replace immediately if needed.	✓		
Check handrims to ensure they are secure and not damaged.	✓		
Check that the hand grips do not rotate or pull off. Replace if needed.	✓		
Check armrest receivers for loose or missing fasteners and check they are secure, adjusted properly and maintain position.	✓		
Check that anti-tips are level and functional.	✓		
Inspect the frame(s) and anti-tips for deformities, defects, cracks, dimples or bends. These could be signs of fatigue in the wheelchair which could result in a failure. Discontinue use of the wheelchair immediately and contact an authorized supplier.		✓	
Check upholstery for signs of wear, fraying or holes. Replace upholstery immediately if needed.		✓	
Check arm pads, cushions and back rest for damage, rips or tears.		✓	
Check wheels for any loose, broke or bent spokes. Replace immediately if needed.		✓	
Check that all fasteners are tight. Unless otherwise noted, fasteners should be tightened to 40 in./lbs (4.51 N*m).		✓	
Verify the wheelchair rolls easily and straight.		✓	
Have the wheelchair checked and adjusted by a qualified technician at your authorized supplier.			✓

V. MAINTENANCE AND CARE

A. Maintenance Table (Continued)

Pressure Conversion Table

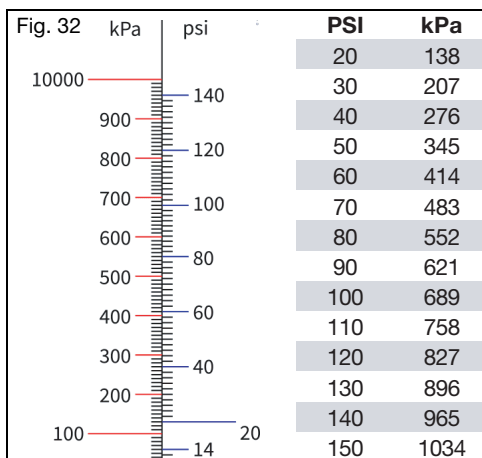

B. Cleaning

⚠ CAUTION ⚠

CAUTION: Washing upholstered components containing flame retardants, as indicated on the labeling of the upholstery, may reduce the flame retardants' efficacy over time. This may increase the risk of ignition when exposed to open flame or other ignition sources, which may increase the risk of injury.

Axles, Wheels, Tires and Moving Parts:

1. Clean around the axles and wheels weekly with a damp rag.
2. Hair and lint will lodge in and around the caster housing and rear wheel axles. Remove with a stiff brush or pick. Take care not to damage bearing seals.

Painted Surfaces

1. Hand wash using a cloth and mild detergent.
2. Dry using a clean cloth or allow wheelchair to air dry.
3. Nonabrasive wax may be used to help preserve painted surfaces.

Upholstery:

1. Hand wash using a cloth and mild detergent.
2. Allow upholstery to air dry. **DO NOT** machine dry.

Plastic Components

1. Hand wash using a cloth and mild detergent.
2. Do not use solvents or aggressive cleaners as they may damage plastic components.

Sanitizing

1. Disinfect surfaces with over the counter disinfecting sanitizer of at least 70% alcohol or wipes. Do not soak or allow pooling of cleaning solutions.
2. Allow sanitizer to remain on surface for at least 15 minutes and remove with aseptic cloth.

V. MAINTENANCE AND CARE

C. Storage

1. When not in use, keep your chair in a clean, dry area. Failure to do so may result in your chair rusting and/or corroding.
2. If your chair has been in storage for more than two months, it should be serviced and inspected by an authorized supplier before use.

D. Disposal

Specific waste disposal or recycling regulations may be in force locally and these should be taken into consideration when disposal arrangements are made. This may include the cleaning or de-contamination of the wheelchair before disposal.

If recycling of materials is a requirement, please refer to the following list of general materials used in the components of the wheelchair:

- Aluminum - Frame, caster fork, caster mount, bearing housing, camber tube assembly, backrest mount plates, backrest frame, backrest release bar, push handles, footrest tubes, footplate, seat rails, handrim and wheel rim.
- Steel - Fasteners, QR axles, caster stems, backrest release latch, wheel spokes, bearings and axle sleeve.
- Plastic - Rear wheels, caster tires, push handle grips, armrest pads and tube plugs.
- Upholstery - Woven polyester fabric and polyurethane foam.

If recycling of materials is desired or a requirement, such as per Directive 2012/19/EU, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) in Europe, both REAC and Mascot are compliant to WEEE and provide guidance on recycling and disposal. Proper dismantling is necessary to achieve a high proportion of reuse or recycle. Care to use proper tools and protective measures in handling are required to avoid contact with sharp edges.

Plastics marked with recycling symbols and thermoplastic parts can be recycled. Aluminum, copper and steel parts, including fasteners, may be recycled. Cables, batteries and PCB are to be disposed separately per local requirements.

Return your chair and accessories to your authorized supplier for proper disposal if you are not comfortable or able to dispose of your wheelchair properly.

VI. TROUBLESHOOTING

A. Symptoms and Solutions

For optimum performance, your wheelchair needs to be adjusted occasionally. The following is a list of potential symptoms you may encounter over the life of your wheelchair and the suggested solutions for each symptom. For best results when troubleshooting, try one solution at a time before proceeding to a second solution. If symptoms are not relieved or you are not confident in performing the solution, it is recommended to take the wheelchair to an authorized service center for repair.

Solutions:

A - Self Correct if capable or contact Authorized Distributor

B - Contact Authorized Distributor

		Symptoms						
		Chair pulls to one side	Looseness in chair	Difficulty turning	Caster Float	Caster Flutter	Squeaking, clicking or rattling	Wobbling
Solutions	A	Ensure all tire pressures are correct and equal.	X		X			X
	A	Check to make sure all fasteners are tightened appropriately, tighten if necessary.	X	X	X	X	X	X
	B	Tighten spokes (if present).	X				X	X
	A	Check to make sure casters are contacting the ground and float is not present.	X		X	X		
	B	Optimize CG setting.		X		X		
	A	Check for interference at rear wheel and front casters.	X		X		X	X
	A	Lubricate w/Teflon based lubricant between frame connections and mating parts in suspect areas.					X	
	A	Remove caster/bearing debris.	X		X	X		X

VII. WARRANTY

Ki Mobility warrants the frame and quick-release axles of this wheelchair against defects in materials and workmanship for the life of the original purchaser. All other Ki Mobility-made parts and components of this wheelchair are warranted against defects in materials and workmanship for one year from the date of first consumer purchase.

The expected life of the frame is five years.

Limitations to the Warranty

1. We do not warrant:
 - a. Wear items: Upholstery, tires, armrest pads, tubes, armrests and push-handle grips.
 - b. Damage resulting from neglect, misuse or from improper installation or repair.
 - c. Damage from exceeding weight limit.
2. This warranty is VOID if the original chair serial number tag is removed or altered.
3. This warranty is VOID if the original chair has been modified from its original condition and it is determined the modification resulted in failure.
4. This warranty applies in North America only. Check with your supplier to find out if international warranties apply.

Ki Mobility's Responsibility

Ki Mobility's only liability is to replace or repair, at our discretion, the covered parts. There are no other remedies, expressed or implied.

Your Responsibility

- a. Notify Ki Mobility, via an authorized supplier, prior to the end of the warranty period and get a return authorization (RA) for the return or repair of the covered parts.
- b. Have the supplier send the authorized return, freight pre-paid, to:
Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
- c. Pay any charges for labor to repair or install parts.

VIII. SPECIFICATION SHEET - CLIK

Manufacturer: Ki Mobility	Maximum Occupant Mass: 75 kg, 165 lb
Address: 5201 Woodward Dr., Stevens Point, WI 54481	Occupant Mass Group (I, II or III): II
Model: Little Wave Klik	

Disclosure Information (ISO)								
Standard Reference	Measurement	Fixed or minimum value	Maximum value, if relevant	Standard Reference	Measurement	Dim. No.	Fixed or minimum value	Maximum value, if relevant
ISO 7176-5 8.2	Overall length with leg rest (Std or SRC)	885 mm 34.8 in	- mm - in	ISO 7176-1 11	Did anti-tip device prevent chair from tipping over?			Yes
ISO 7176-5 8.2	Overall length with leg rest (MDC/MAC)	1524 mm 60 in	- mm - in	ISO 7176-3 7.2	Max Slope Uphill/Downhill	N/A	>10°	9°
ISO 7176-5 8.3	Overall width	510 mm 20.1 in	- mm - in	ISO 7176-3 6b	Brake Operating Force	N/A	50 N 11.2 lb	- N - lb
ISO 7176-5 8.4	Handgrip Height (SRC/MDC)	675 mm 26.6 in	-mm - in	ISO 7176-30 5.10	Lever operating force (tilt/recline)	N/A	N lb	N lb
ISO 7176-5 8.5	Folded Length (SRC/MDC)	735 mm 28.9 in	- mm - in	ISO 7176-30 8	Reclining back adjustment force	N/A	165 N 37 lb	- N - lb
ISO 7176-5 8.6	Folded Width (SRC/MDC)	540 mm 21.3 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.2	Seat plane angle	(1)	4.3°	°
ISO 7176-5 8.7	Folded Height (SRC/MDC)	675 mm 26.6 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.3	Effective seat depth	(2)	290 mm 11.4 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.8	Rising	38 mm 1.5 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.5	Effective seat width	(4)	280 mm 11.0 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.9	Total Mass	14 kg 31 lb	- kg - lb	ISO 7176-7 7.3.6	Seat surface height at front	(5)	360 mm 14.2 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.10	Mass of the heaviest part	6 kg 13 lb	- kg - lb	ISO 7176-7 7.3.7	Backrest angle	(6)	8.9°	°
ISO 7176-5 8.13	Turning Radius (SRC/MDC)	1050 mm 413.3 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.8	Backrest Height	(7)	350 mm 13.8 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.15	Required width of angled corridor (SRC/MDC)	650 mm 25.6 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.12	Footrest to seat distance	(11)	228 mm 9.0 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.16	Required doorway entry depth (SRC/MDC)	960 mm 37.8 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.16	Leg to seat surface angle	(15)	85°	- °
ISO 7176-5 8.17	Required corridor width for side opening (SRC/MDC)	645 mm 25.4 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.17	Armrest to seat distance	(16)	229 mm 9 in	- mm - in
ISO 7176-1 8	Static stability downhill	>11°	°	ISO 7176-7 7.3.18	Front armrest to backrest distance	(17)	241 mm 9.5 in	- mm - in
ISO 7176-1 9	Static stability uphill	>10°	°	ISO 7176-7 7.3.23	Front location of armrest structure	(22)	173 mm 6.8 in	- mm - in
ISO 7176-1 10	Static stability sideways	>9°	°	ISO 7176-7 7.3.24	Handrim diameter	(23)	446 mm 17.6 in	- mm - in
ISO 7176-1 11	Static stability with anti-tips	>10°	°	ISO 7176-7 7.3.26	Horizontal location of axle	(25)	51 mm 2 in	- mm - in

This wheelchair conforms to the following standards:		Yes	No	N/A
a) Requirements & test methods for static, impact and fatigue strengths (ISO 7176-8 and ISO 7176-30 as applicable)			X	
b) Requirements for resistance to ignition in accordance with ISO 7176-16			X	

See General Warnings section of manual for further information on flammability.

Little Wave "Clik"

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA



2022-10-26

I. INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar una silla de ruedas Ki Mobility!



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: No use esta silla de ruedas sin antes leer todo este manual. Usar la silla de ruedas sin leer primero el presente manual por completo podría ocasionar lesiones graves al usuario o a su asistente.

Ki Mobility aconseja capacitarse con un profesional de tecnologías asistivas (ATP) u otro profesional clínico o técnico competente en la seguridad de esta silla antes de su uso.

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre cualquier aspecto de esta silla de ruedas, este manual o el servicio prestado, no dude en ponerse en contacto con su proveedor autorizado, un representante autorizado o Ki Mobility. Puede comunicarse con Ki Mobility llamando al:

(1)715-254-0991



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
U.S.A



www.kimobility.com (Incluye localizador de distribuidores y acceso a información impresa)

O a través de nuestro representante autorizado de la UE:



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
33233 Anderstorp
Sweden

II. CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN

II. CONTENIDO

III. AVISO - LEA ANTES DE USAR

A.	Uso previsto.....	49
B.	Su seguridad.....	49
C.	Palabras de aviso.....	50
D.	Identificación del número de serie	50
E.	Glosario de símbolos.....	51
F.	Advertencias y precauciones generales.....	52
G.	Cinturones o arneses de posicionamiento	54
H.	Cómo desplazarse en su silla de ruedas	54
I.	Sistema a motor externo.....	56
J.	Su silla de ruedas y el medio ambiente.....	57
K.	Modificar su silla de ruedas	57
L.	Estabilidad de la silla de ruedas.....	57
M.	Asientos postventa.....	59

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

A.	Subir escaleras	60
B.	Bajar escaleras.....	60
C.	Transferirse	61
D.	Uso en tránsito.....	61
E.	Uso del cojín	66
F.	Transporte de una silla de ruedas desocupada	66
G.	Su Clic y sus partes	67
H.	Brazo en T de altura regulable.....	68
I.	Apoyabrazos abatibles swing away.....	69
J.	Brazo en T pediátrico regulable en altura.....	70
K.	Apoyabrazos abatible y extensible con bloqueo de la regulación del ángulo.....	71
L.	Ruedas posteriores	72
M.	Ajuste del apoyapiés	73
N.	Apoyapiés de ángulo regulable.....	73
O.	Apoyapiés High Mount de angulación regulable y basculante.....	74
P.	Seguros de las ruedas	76
Q.	Antivuelco	77
R.	Superficies de contacto.....	79
S.	Tapizado	80
T.	Espaldar plegable	80
U.	Quinta rueda estándar.....	81
V.	Quinta rueda dinámica	82
W.	Frenos a tambor	84
X.	Soporte para bastón y muletas	85
Y.	Cubierta.....	86

V. MANUTENCIÓN Y CUIDADO

A.	Tabla de manutención.....	87
B.	Limpieza	88
C.	Almacenamiento	89
D.	Eliminación.....	89

VI. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A.	Problemas y soluciones	90
----	------------------------------	----

VII. GARANTÍA 91

VIII. ESPECIFICACIONES - CLIK..... 92

III. AVISO - LEA ANTES DE USAR

A. Uso previsto

Las sillas de ruedas manuales Ki Mobility son dispositivos de accionamiento a mano con ruedas, diseñados con fines médicos para brindar movilidad a personas reducidas a la posición sentada.

B. Su seguridad

AVISO: Comuníquese con Ki Mobility para obtener información sobre retiros y avisos de seguridad.

Cualquier incidente o lesión relacionados con el uso de la silla de ruedas o sus accesorios debe informarse de inmediato si dicho incidente ha conducido, directa o indirectamente, a un deterioro de salud grave, o muerte, del usuario o de otra persona. Informe cualquier evento grave o lesión a Ki Mobility y, si así lo exige la normativa local, a la autoridad sanitaria competente donde reside legalmente el usuario u otra persona.

No use esta silla de ruedas sin antes leer todo este manual. ANTES de sentarse en esta silla de ruedas, un profesional de tecnologías asistivas (ATP) u otro profesional clínico o técnico competente debe capacitarlo en el uso seguro de la misma. Ki Mobility fabrica muchas sillas de ruedas diferentes que pueden satisfacer sus necesidades. El mejor método comprobado para elegir una silla de ruedas es consultar un profesional de tecnologías asistivas u otro profesional técnico competente y un profesional clínico experimentado, como un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional o un médico. La elección definitiva del tipo de silla de ruedas, sus opciones de configuración y su regulación está exclusivamente a cargo suyo y de sus profesionales técnicos y clínicos. Las opciones que elija, la configuración y la regulación de la silla de ruedas influyen directamente sobre su rendimiento, estabilidad y capacidad de satisfacer sus necesidades. Los factores a tener en cuenta que influyen sobre su seguridad y estabilidad son:

- a. Sus habilidades y capacidades personales, incluyendo la fuerza, equilibrio y coordinación.
- b. Los tipos de peligros y obstáculos que puede encontrar durante su día.
- c. Las dimensiones, opciones y configuración específicas. En particular la altura y la profundidad del asiento, la angulación del asiento y espaldar, el tamaño y la posición de las ruedas posteriores y de los casters.

III. AVISO - LEA ANTES DE USAR

C. Palabras de aviso

En este manual encontrará palabras que se denominan de “aviso”. Estas palabras se utilizan para identificar y transmitir la gravedad de los riesgos variables. Antes de usar esta silla de ruedas, usted y toda persona que pueda ayudarle deben leer este manual completo. Preste atención a estas palabras de Aviso y tenga en cuenta toda nota, precaución o advertencia. Asegúrese de seguir todas las instrucciones y use su silla de ruedas de manera segura. La palabra de Aviso se refiere a un peligro o una práctica no segura que puede causar lesiones graves o la muerte a usted u otras personas. Las “Advertencias” se encuentran en tres categorías principales, de la siguiente manera:

NOTA - Nota indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar una disminución en el rendimiento de la silla de ruedas o causar daños a la misma.



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN: Precaución indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar daños a su silla de ruedas y lesiones a usted.




ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o la muerte.

Estas palabras de Aviso se colocan a lo largo de todo el manual, donde sea apropiado para resaltar la situación de peligro. El capítulo F. contiene las situaciones peligrosas que se relacionan con el uso general de esta silla de ruedas.

D. Identificación del número de serie

El UDI (identificador único del dispositivo) aquí ilustrado es sólo una muestra. Vea la información específica de su producto en la etiqueta del UDI que se encuentra en el mismo, como se indica en la figura abajo.

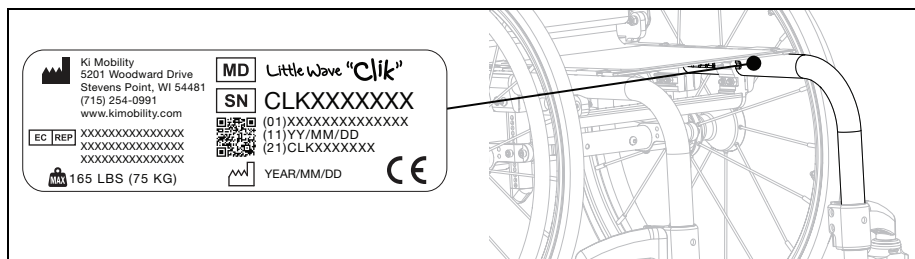

III. AVISO - LEA ANTES DE USAR

E. Glosario de símbolos

SÍMBOLO	DEFINICIÓN
	Indica al fabricante del dispositivo médico.
	Fecha de fabricación (YEAR/MM/DD).
	Indica la necesidad de que el usuario consulte una instrucción por motivos de seguridad, tales como precauciones y advertencias. Si se presenta en el dispositivo médico o en su empaque, indica la necesidad de que el usuario consulte las indicaciones por motivos de seguridad, tales como precauciones y advertencias.
	Indica que el artículo es un dispositivo médico.
	Indica el número de serie del fabricante de modo que se pueda identificar un dispositivo médico específico.
	Indica al representante autorizado en la Comunidad Europea.
	Indica la declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las directivas de la CE aplicables.
	Indica la necesidad de que el usuario consulte las indicaciones de uso.
	Indica la necesidad de que el usuario consulte el sitio web indicado a fin de obtener instrucciones de uso en formato electrónico.
	Indica un sitio web donde los usuarios pueden obtener información adicional sobre el producto médico.
	Indica un límite máximo de peso especificado (lb/kg).
	Indica un punto de seguridad de tránsito.
	Indica un posible punto de pellizco.
	Indica la entidad que importa el dispositivo médico al lugar.
	Cumple con ANSI/RESNA WC-4 Sección 19 (WC19) e ISO 7176-19.
	Indica que no es para uso en tránsito.

III. AVISO - LEA ANTES DE USAR

F. Advertencias y precauciones generales

ADVERTENCIA

	Estándar	Tránsito
Clik	165 libras (75 kg)	165 libras (75 kg)

ADVERTENCIA: Los límites se refieren al peso total en libras del usuario más todos los artículos transportados. No exceda el límite de peso de la silla. Exceder el límite de peso puede dañar su silla o aumentar su riesgo de caerse o volcarse. Un vuelco o una caída pueden provocar lesiones graves o la muerte.


-  No use la silla para entrenamiento con pesas. El movimiento del peso adicional altera el centro de gravedad de la silla y aumenta el riesgo de volcar. Un vuelco puede provocar daños en la silla o lesiones graves o la muerte.
-  No cuelgue mochilas, bolsas u objetos pesados por arriba del centro de gravedad del ocupante. El movimiento del peso adicional altera el centro de gravedad de la silla y aumenta el riesgo de volcar. Un vuelco podría provocar lesiones graves o la muerte. Si es necesario transportar cargas adicionales, se recomienda utilizar soportes y bolsas debajo del asiento. Los objetos colgados de la silla de ruedas pueden causar inestabilidad, pueden impedir el acceso a sus componentes, enredarse en piezas móviles o causar un desgaste prematuro de los componentes, como el tapizado del espaldar y las manijas de empuje.
-  Mantenga los neumáticos inflados a la presión correcta. El uso de una silla sin neumáticos inflados adecuadamente puede afectar su estabilidad, lo que aumenta el riesgo de vuelco. Un vuelco puede provocar daños en la silla o lesiones graves o la muerte a usted u otros. La presión correcta del neumático se indica en la pared lateral del neumático. Si no está seguro, su proveedor de silla de ruedas puede determinar si sus neumáticos son inflables.
-  Evite rampas o pendientes con más de 9 grados de inclinación. Las pendientes pronunciadas aumentan el riesgo de caerse o volcarse. Un vuelco o caída puede provocar daños en la silla o lesiones graves o la muerte a usted u otros. No use la silla en rampas o pendientes con más de 9 grados de inclinación (aproximadamente 2 pulgadas de subida/bajada por pie lineal): ni para arriba/abajo ni transversal.
-  Evite las superficies inclinadas resbaladizas o cubiertas de hielo, aceite o agua. Circular en pendientes resbaladizas puede imposibilitar el control de la silla de ruedas y provocar un vuelco o una caída. Un vuelco o caída puede provocar daños en la silla o lesiones graves o la muerte.
-  Evite inclinarse sobre el costado o la parte posterior de su silla de ruedas para extender su alcance. Inclinarse sobre la silla podría cambiar su centro de gravedad, provocar inestabilidad y por consiguiente una caída o un vuelco. Un vuelco o caída puede provocar daños en la silla o lesiones graves o la muerte.
-  No levante la silla de ruedas por sus partes removibles mientras está ocupada. Levantar una silla de ruedas por partes removibles mientras está ocupada podría causar que el usuario se caiga o pierda el control. Una caída o pérdida de control puede provocar daños en la silla o lesiones graves o la muerte.
-  El material de embalaje debe mantenerse fuera del alcance de los niños. La manipulación inadecuada de los materiales de embalaje y el incumplimiento del deber de supervisar a los niños podría provocar asfixia y lesiones graves o la muerte.
-  Su silla de ruedas cumple con la norma ISO 7176-16 en cuanto a inflamabilidad. La resistencia a la ignición puede cambiar con el uso, el paso del tiempo o la limpieza. Se deben tomar precauciones para evitar las fuentes de ignición o la cercanía con materiales inflamables que puedan aumentar la capacidad de ignición, como el oxígeno y el alcohol. También tenga en cuenta que agregarle a la silla componentes, sistemas posturales, soportes o materiales puede alterar la inflamabilidad. Los cambios a la inflamabilidad pueden dar como resultado lesiones graves o la muerte.

III. AVISO - LEA ANTES DE USAR


F. Advertencias y precauciones generales (continuación)

 Cualquier parte del cuerpo que presione contra el chasis de la silla de ruedas u otros elementos de la misma puede deformar la piel y generar un punto de alta compresión. Éstos son daños para el tejido bajo estrés y pueden hacerle desarrollar una lesión por compresión o laceración de la piel. Si su piel enrojece o presenta cualquier otro síntoma de lesión por compresión o laceración de la piel, suspenda el uso de este producto de inmediato y consulte a su médico. Seguir usando la silla de ruedas después de que se presenten cambios en la piel puede dar como resultado lesiones graves o la muerte.

 Para mover y alzar la silla de ruedas sin el ocupante de forma segura, se recomienda plegar el espaldar (si lo permite la configuración) y agarrar en los puntos del chasis que se indican en el diagrama. Tenga cuidado de no sujetar donde los componentes son extraíbles o moverlos durante el uso de la silla para evitar lesiones y falla del componente.

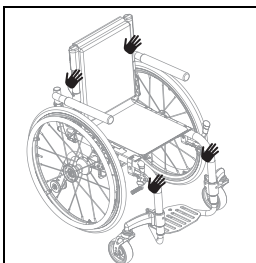

 La dimensión total de las sillas de ruedas varía según su configuración específica, como la profundidad y el ancho del asiento, el tipo de ruedas y neumáticos y el agregado de accesorios de postventa no suministrados por Ki Mobility. Si la dimensión total de su silla de ruedas en particular supera aquella recomendada en la imagen a continuación, puede verse limitado el acceso a vías de escape de emergencia. No poder acceder a una vía de escape de emergencia puede dar como resultado lesiones graves o la muerte.

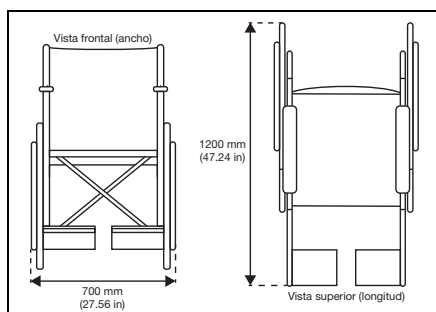

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN: Evite ajustar demasiado los pernos y las piezas que sujetan los componentes al chasis. Apretar demasiado puede dañar la silla, lo que afecta su durabilidad y rendimiento. El daño a la silla puede provocar lesiones al usuario.

NOTA: El capítulo de mantenimiento del presente manual explica cómo ajustar pernos y sujetadores. Si no está seguro de cómo apretar correctamente los pernos o las piezas o carece de las herramientas necesarias, consulte a su proveedor autorizado.

III. AVISO - LEA ANTES DE USAR

G. Cinturones o arneses de posicionamiento



ADVERTENCIA: El uso inadecuado de los cinturones de posicionamiento puede hacer que el usuario se deslice por debajo de ellos en la silla de ruedas. Si esto sucediera, se puede producir una compresión del pecho o asfixia debido a la presión del cinturón. Si esto ocurre, la respiración del usuario puede verse obstaculizada y causar lesiones graves o la muerte.



El uso incorrecto de los cinturones de posicionamiento puede hacer que partes del cuerpo queden trabadas en ellos, limitando la movilidad y el movimiento y provocando lesiones graves o la muerte.

Ki Mobility recomienda el uso de cinturones de posicionamiento pélvico. Los cinturones de posicionamiento pélvico pueden reducir el riesgo de caerse de su silla de ruedas.

Los cinturones de posicionamiento, como los cinturones de posicionamiento pélvico y los arneses y correas del tronco anterior, están diseñados para ayudar, retener y mantener el posicionamiento y la postura adecuados en la silla de ruedas.

- Asegúrese de que el usuario no se deslice debajo del cinturón de posicionamiento en el asiento de la silla de ruedas.
- El cinturón de posicionamiento debe tener un ajuste perfecto, lo suficientemente apretado como para mantener su posición, pero no tanto como para restringir la respiración. Debe haber una mano abierta entre el cinturón y el usuario.
- El uso adecuado de cojines puede contribuir a la estabilidad pélvica y reducir el deslizamiento.
- NUNCA use cinturones de posicionamiento:
 - a. Como restricción. Una restricción requiere la orden de un médico.
 - i. A menos que pueda quitarse los cinturones fácilmente en caso de emergencia. Si no puede hacer esto, consulte con su proveedor de atención médica para conocer otras opciones que le ayuden con su postura.
 - b. En un usuario inconsciente o agitado.
 - c. Como sujeción del ocupante o cinturón de seguridad en un vehículo automotor. El cinturón de posicionamiento no está diseñado para reemplazar el cinturón de seguridad que está sujeto a la carrocería de un vehículo, tal como se requiere para un cinturón de seguridad eficaz. En una frenada, la fuerza de la misma arrojaría el usuario hacia adelante. Los cinturones de las sillas de ruedas no pueden evitarlo, y en consecuencia esos mismos cinturones o correas pueden provocar más lesiones. El capítulo Tránsito del presente manual brinda mayor información al respecto.

H. Cómo desplazarse en su silla de ruedas



ADVERTENCIA: Evite empujar o desplazarse con su silla de ruedas sobre superficies flojas, accidentadas, desiguales o resbaladizas (como hielo, arena, tierra suelta, césped, grava, baches, grietas y pavimentación rota). El uso en tales superficies podría hacer que la silla de ruedas pierda estabilidad y se incline inesperadamente y provoque una caída o pérdida de control. Una caída o pérdida de control puede provocar daños a su silla de ruedas, lesiones graves o la muerte.

III. AVISO - LEA ANTES DE USAR

H. Cómo desplazarse en su silla de ruedas (continuación)

-  Siempre mire hacia adelante para ver posibles obstáculos o cambios en el suelo que podrían hacer atascar los casters y frenar de golpe la silla de ruedas. Si no lo hace, la silla de ruedas podría volcarse inesperadamente y provocar una caída o pérdida de control. Una caída o pérdida de control puede provocar daños a su silla de ruedas, lesiones graves o la muerte.
-  Siempre mire hacia adelante para detectar objetos u obstáculos que la silla de ruedas podría golpear. Golpear un objeto u obstrucción podría hacer que su silla de ruedas vuelque inesperadamente y provoque una caída o pérdida de control. Una caída o pérdida de control puede provocar daños a su silla de ruedas, lesiones graves o la muerte. Además, golpear un objeto u obstáculo podría dañar su silla de ruedas. El riesgo de lesiones y daños a su silla de ruedas al golpear un objeto u obstáculo aumenta con la velocidad.
-  Usar su silla de ruedas en vías públicas es extremadamente peligroso y no se recomienda. Los usuarios de sillas de ruedas deben obedecer las reglas de tráfico peatonal. Consulte las leyes de tránsito de su propio lugar de residencia; algunos no permiten el uso de sillas de ruedas en las vías públicas.
-  El equilibrio del usuario se ve afectado por la pendiente de las superficies sobre las que circula. Con un menor equilibrio, su silla de ruedas será menos estable cuando esté en angulación. Esto se verifica más aún cuando se transita por una pendiente lateralmente. Trasladarse en su silla de ruedas en una pendiente podría hacer que vuelque inesperadamente o que el usuario pierda estabilidad, lo que provocaría una caída o pérdida de control. Una caída o pérdida de control puede provocar daños a su silla de ruedas, lesiones graves o la muerte.
-  Cuando use su silla de ruedas en áreas públicas o privadas (incluyendo, entre otros, cruces peatonales, aceras, vecindarios, estacionamientos y parques), esté alerta al peligro de vehículos automotores. Debido a su baja posición:
 - Cuando la iluminación sea escasa, aplique cinta reflectante en su ropa y silla de ruedas.
 - Si tiene el derecho de paso, siempre ceda el paso hasta que el conductor del vehículo automotor lo haya visto.
-  Tenga mucho cuidado al ir hacia atrás. Es posible que no pueda ver una obstrucción que podría provocar un vuelco. Un vuelco puede dañar su silla de ruedas, causar lesiones graves o la muerte.
-  Ki Mobility desaconseja balancearse sobre las ruedas posteriores con los casters levantados del suelo (también conocido como “caballito”). Es muy probable que se caiga o vuelque y podría provocar daños a su silla de ruedas, lesiones graves o la muerte. Si elige ignorar esta advertencia, no intente hacer un caballito a menos que haya sido capacitado por un profesional clínico o técnico. Siempre debe tener la ayuda de una persona capacitada y preparada para evitar que exceda su punto de inflexión.
-  No se traslade en escaleras mecánicas sentado en la silla de ruedas. El uso de una silla de ruedas en una escalera mecánica puede provocar una caída, un vuelco o la pérdida de control. Una caída, vuelco o pérdida de control puede provocar daños a su silla de ruedas, lesiones graves o la muerte.
-  Evite vestirse o desvestirse en su silla de ruedas. Vestirse o desvestirse en su silla de ruedas hace que su peso cambie. Por lo tanto, aumenta su riesgo de caerse o volcarse. Una caída o un vuelco pueden dañar su silla de ruedas, causar lesiones graves o la muerte.
-  Ki Mobility recomienda el uso de accesorios como aros para talón y pantorrilleras. Cuando se usan correctamente, los aros para talones y pantorrilleras pueden ayudar a evitar que piernas y pies se resbalen accidentalmente de la bandeja apoyapiés o del apoyapiés, lo que podría hacer trabar los pies en la silla de ruedas y sus componentes o golpear el suelo. Usar la silla de ruedas sin accesorios tales como aros para talones y pantorrilleras adecuadamente ajustadas puede provocar un potencial peligro que, si no se evita, podría generar lesiones.

III. AVISO - LEA ANTES DE USAR

H. Cómo desplazarse en su silla de ruedas (continuación)

Cuando use su silla de ruedas, siempre:

- Observe el área muy por delante de su silla de ruedas mientras conduce.
- Asegúrese de que las superficies sobre las que circule estén niveladas y sin obstáculos.
- Retire o cubra los dinteles de las puertas entre las habitaciones.
- Si su silla de ruedas tiene dispositivos antivuelco, asegúrese de que estén bloqueados en su lugar cuando utilice la silla de ruedas (Consulte IV, Q. para el uso adecuado de los antivuelco).
- Mantenga ambas manos sobre los aros de las ruedas cuando pase sobre un obstáculo.
- Nunca empuje ni tire de un objeto para impulsar su silla de ruedas.
- Asegúrese de que no haya una caída en la parte inferior de rampas.
- Al subir una pendiente, incline el tronco ligeramente hacia adelante para evitar volcarse hacia atrás.
- Al bajar una pendiente, mantenga su tronco presionado firme hacia atrás para evitar volcarse hacia adelante.
- No intente superar obstáculos sin ayuda.
- Asegúrese de que toda rampa, pendiente o acera en las que intente desplazarse cumpla con las pautas de ADA (Ley de Estadounidenses con Discapacidades) o las pautas de accesibilidad equivalentes en su región.

Las pautas de la ADA y más información sobre diseño accesible están disponibles en: www.ada.gov

I. Sistema a motor externo



ADVERTENCIA: Asegúrese de que el fabricante haya validado y aprobado su sistema a motor para usarlo con la silla de ruedas Ki y su configuración. Emplear un sistema a motor externo no aprobado podría ocasionar un desperfecto mecánico de la silla de ruedas y hacerla caer. Una caída puede dañar su silla de ruedas, causar lesiones graves o la muerte.



Los sistemas a motor externo modifican la estabilidad y el desempeño de la silla de ruedas. Use siempre antivuelco con su sistema a motor. Si no lo hace, su silla de ruedas podría volcarse hacia atrás. Un vuelco hacia atrás puede dañar su silla de ruedas, causar lesiones graves o la muerte.



Siempre mire hacia adelante para detectar objetos u obstáculos que la silla de ruedas podría golpear. Los sistemas a motor externo cambian el desempeño de la silla de ruedas y aumentan la posibilidad de un vuelco inesperado cuando se golpea un objeto u obstáculo. Un vuelco inesperado podría resultar en una caída o pérdida de control. Una caída o pérdida de control puede provocar daños a su silla de ruedas. El riesgo de lesiones y daños a su silla de ruedas al golpear un objeto u obstáculo aumenta con la velocidad.

Ki Mobility desaconseja instalar sistemas a motor externo en cualquiera de las sillas de ruedas Ki Mobility. Las sillas de ruedas Ki Mobility no han sido diseñadas ni probadas por Ki Mobility como sillas de ruedas electrónicas. Si agrega un sistema a motor externo a una silla de ruedas Ki Mobility, asegúrese de que el fabricante del mismo haya validado y aprobado la combinación del sistema a motor externo con la silla de ruedas como segura y efectiva.

III. AVISO - LEA ANTES DE USAR

J. Su silla de ruedas y el medio ambiente



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN: La exposición al agua o la humedad excesiva puede causar que el metal en la silla de ruedas se oxide o corroa y que la tela se rasgue. Seque su silla lo antes posible si se expone al agua.



NO UTILICE SU SILLA DE RUEDAS EN DUCHAS, PISCINAS O EN EL AGUA EN GENERAL. Esto hará que su silla de ruedas se oxide o corroa y finalmente sufra desperfectos.



No utilice su silla de ruedas en la arena. La arena puede entrar en los cojinetes de las ruedas y las piezas móviles. Esto causará daños y finalmente hará que la silla de ruedas falle.

K. Modificar su silla de ruedas



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: NADIE DEBE MODIFICAR ESTA SILLA DE RUEDAS, EXCEPTO AL AJUSTARLA DE ACUERDO CON ESTE MANUAL O AL AGREGAR LAS OPCIONES APROBADAS DE KI MOBILITY. NO EXISTEN OPCIONES APROBADAS QUE SIGNIFIQUEN TALADRAR O CORTAR EL CHASIS POR PARTE DE PERSONAS QUE NO SEAN TÉCNICOS CAPACITADOS DE KI MOBILITY. Su silla de ruedas fue diseñada y fabricada bajo estrictos controles de construcción. Una parte integral de este proceso es garantizar que los diversos componentes trabajen juntos correctamente; han sido probados según diversos estándares para garantizar la calidad y están aprobados para trabajar juntos. Póngase en contacto con un proveedor autorizado o Ki Mobility antes de agregar cualquier accesorio o componente no proporcionado por Ki Mobility. Las modificaciones u opciones no aprobadas pueden provocar caídas y causar lesiones graves o la muerte.

L. Estabilidad de la silla de ruedas



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: La estabilidad de la silla de ruedas puede alterarse cuando se transita sobre superficies flojas, accidentadas, desiguales (en subida o bajada) o resbaladizas (como hielo, arena, tierra suelta, césped, grava, baches, grietas y pavimentación rota). El uso en tales superficies podría hacer que la silla de ruedas se incline inesperadamente y provoque una caída o pérdida de control. Una caída o pérdida de control puede provocar daños a su silla de ruedas, lesiones graves o la muerte.



Desplazar el peso sobre la silla de ruedas, agregarle cargas, transportar o extenderse para alcanzar objetos podría afectar la estabilidad de su silla. Por lo tanto, aumenta su riesgo de caerse o volcarse. Una caída o un vuelco pueden dañar su silla de ruedas, causar lesiones graves o la muerte.



Evite vestirse o desvestirse en su silla de ruedas. Vestirse o desvestirse en su silla de ruedas hace que su peso cambie. Por lo tanto, aumenta su riesgo de caerse o volcarse. Una caída o un vuelco pueden dañar su silla de ruedas, causar lesiones graves o la muerte.



Ki Mobility desaconseja balancearse sobre las ruedas posteriores con los casters levantados del suelo (también conocido como “caballito”). Es muy probable que se caiga o vuelque y podría provocar daños a su silla de ruedas, lesiones graves o la muerte. Si elige ignorar esta advertencia, no intente hacer un caballito a menos que haya sido capacitado por un profesional clínico o técnico. Siempre debe tener la ayuda de una persona capacitada y preparada para evitar que exceda su punto de inflexión.

III. AVISO - LEA ANTES DE USAR

L. Estabilidad de la silla de ruedas (continuación)



ADVERTENCIA: Si la silla de ruedas está equipada con un sistema para variar el ángulo de inclinación del chasis del asiento, antes de usarla cerciórese de que sea estable en todo el rango de posibles cambios de ángulo. Si la silla de ruedas no es estable en todo el rango de ángulos de inclinación, es inminente una caída o un vuelco. Una caída o un vuelco pueden dañar su silla de ruedas, causar lesiones graves o la muerte.

Estrategias para minimizar el riesgo de caerse:

- Asegúrese de que los antivuelco estén en la posición correcta (Consulte IV, Q. para conocer el uso adecuado de los antivuelco).
- Inclínese hacia adelante al empujar para subir una pendiente.
- Inclínese hacia atrás al empujar para bajar una pendiente.
- Tenga un asistente detrás de usted para brindarle ayuda.
- El seteo de la silla de ruedas debe hacerlo sólo un técnico autorizado.
- Use siempre los accesorios proporcionados.
- La silla de ruedas debe ser regulada por un técnico autorizado siempre que se produzcan cambios en su peso o en el modo en que se sienta.
- Use siempre dispositivos antivuelco donde sea apropiado (Consulte IV, Q. para conocer el uso adecuado de los antivuelco).

Para garantizar la estabilidad adecuada de su silla de ruedas, debe asegurarse de que el centro de gravedad y la base de apoyo de la silla de ruedas sean correctos para su equilibrio y habilidades. Muchos factores pueden afectar estos dos elementos:

- | | |
|---------------------------|---|
| • Altura del asiento | • Tamaño y posición de las ruedas posteriores |
| • Profundidad del asiento | • Tamaño y posición de los casters |
| • Angulación del espaldar | • Componentes del conjunto del asiento |
| • Angulación del asiento | • Posición de inclinación (si corresponde) |

Hay acciones adicionales que pueden tener efectos adversos sobre la estabilidad de su silla de ruedas. Contacte a un profesional de tecnologías asistivas o a un profesional clínico familiarizado con sus necesidades y capacidades para determinar qué puede hacer de manera segura a la vez que conserva la estabilidad de su silla de ruedas.

III. AVISO - LEA ANTES DE USAR

M. Asientos postventa

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Añadir un cojín en una silla de ruedas podría afectar el centro de gravedad de la misma. Los cambios en su centro de gravedad pueden afectar la estabilidad en su silla de ruedas, lo que puede provocar que vuelque o se caiga de la silla de ruedas, lo que puede provocar lesiones graves. Siempre revise las instrucciones de uso de su silla de ruedas para saber si puede ser necesario hacerle cambios a fin de garantizar suficiente estabilidad después de añadir un cojín.



La integridad de su piel puede verse afectada por muchos aspectos de su vida diaria y su condición médica, incluyendo el uso de este producto. Asegúrese de seguir los regímenes de cuidado de la piel establecidos por su médico. Los usuarios de este producto deben exigir que su piel sea controlada periódicamente a fin de detectar cambios según las indicaciones de su médico. Si no lo hace, podría sufrir lesiones graves o la muerte.

Selección del producto de asiento adecuado

Debe consultar con un profesional con licencia (es decir, un médico o terapeuta) capacitado en asientos y posicionamiento de sillas de ruedas antes de seleccionar cualquier producto de asiento y posicionamiento. Esto ayudará a garantizar que reciba el producto adecuado para sus necesidades específicas.

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

A. Subir escaleras



ADVERTENCIA: No suba escaleras sin la ayuda de al menos dos personas capacitadas en los siguientes pasos y que puedan cargar su peso y la silla de ruedas. Subir escaleras puede ser un desafío que puede provocar una caída y daños a su silla de ruedas, lesiones graves o la muerte del usuario o de quienes lo ayudan.

NOTA: Al subir escaleras, el usuario debe mirar hacia la parte inferior de las escaleras.

1. Al subir escaleras, quite o gire hacia arriba los antivuelco. Recuerde volver a activar o girar hacia abajo los antivuelco cada vez que los haya quitado o girado hacia arriba. Si los antivuelco se dejan activados hacia abajo al subir escaleras, pueden doblarse o romperse. Si los antivuelco están doblados o quebrados, ya no evitarán que la silla de ruedas se vuelque hacia atrás. Un vuelco hacia atrás puede dañar su silla, causar lesiones graves o la muerte.
2. Un asistente debe ubicarse detrás del usuario y uno adelante. La persona que está adelante y la que está atrás deben sostener una parte no removible de la silla de ruedas.
3. La persona que está detrás del usuario inclina la silla de ruedas hacia atrás y ambos ayudantes levantan juntos. Dé un paso a la vez.

B. Bajar escaleras



ADVERTENCIA: No baje escaleras sin la ayuda de al menos dos personas capacitadas en los siguientes pasos y que puedan cargar su peso y la silla de ruedas. Bajar escaleras puede ser un desafío que puede causar daños a su silla de ruedas, lesiones graves o la muerte del usuario o de quienes le ayudan.

NOTA: Al bajar escaleras, el usuario debe mirar hacia la parte superior de las escaleras.

1. Al bajar escaleras, quite o gire hacia arriba los antivuelco. Recuerde volver a activar o girar hacia abajo los antivuelco cada vez que los haya quitado o girado hacia arriba. Si los antivuelco se dejan activados hacia abajo al subir escaleras, pueden doblarse o romperse. Si los antivuelco están doblados o quebrados, ya no evitarán que la silla de ruedas se vuelque hacia atrás. Un vuelco hacia atrás puede dañar su silla, causar lesiones graves o la muerte.
2. Un asistente debe ubicarse detrás del usuario y uno adelante. La persona que está adelante y la que está atrás deben sostener una parte no removible de la silla de ruedas.
3. La persona detrás del usuario inclina la silla hacia atrás y guía la silla de ruedas, lentamente y un paso a la vez, escaleras abajo sobre las ruedas posteriores de la silla.

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

C. Transferirse



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Existen muchas técnicas de transferencia apropiadas y variadas según su nivel de discapacidad y sus capacidades funcionales individuales. Debe capacitarse junto a un profesional clínico en la técnica de transferencia adecuada para usted. Asegúrese de que puede transferirse de forma segura por su propia cuenta antes de intentar transferencias independientes. Esté atento: cada vez que se transfiera habrá un momento en el que la silla de ruedas no esté debajo de usted. No lograr transferirse correctamente puede dar como resultado una caída que podría provocar graves lesiones o la muerte.

NOTA: Antes de transferirse desde su silla de ruedas hacia otro asiento, debe hacer lo posible por reducir el espacio entre los mismos.

1. Active los seguros de las ruedas para fijar las ruedas posteriores.
2. Gire los casters hacia adelante para aumentar la distancia entre ejes de la silla de ruedas.
3. Extraiga o haga pivotar los apoyapiés
4. Salvo que haya adquirido mucha experiencia y habilidad para transferirse, pida ayuda a un asistente.

D. Uso en tránsito



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Nunca viaje sentado en su silla de ruedas dentro de un vehículo automotor a menos que haya sido equipado con la opción Tránsito. Siempre es más seguro transferirse de su silla de ruedas hacia un asiento en un vehículo automotor con cinturones de seguridad del asiento y hombros apropiados. Viajar sentado en su silla de ruedas dentro de un vehículo automotor no equipado con la opción Tránsito podría provocar lesiones graves o la muerte.

La silla de ruedas equipada con la opción Tránsito ha sido probada y aprobada por RESNA WC-4, Capítulo 19: Sillas de ruedas utilizadas como asientos en vehículos automotores e ISO 7176-19 Sillas de ruedas - Parte 19: Dispositivos de movilidad con ruedas para su uso como asientos en vehículos automotores. Las normas RESNA e ISO están diseñadas para probar la integridad estructural de la silla de ruedas como asiento para su uso en un vehículo automotor. Estas normas también tienen el objetivo de crear compatibilidad con los sistemas de retención de silla de ruedas y ocupante (WTORS).

No todas las configuraciones de sillas de ruedas son compatibles con la opción de tránsito. La configuración es ámbito exclusivo de Ki Mobility, que no suministra esta silla de ruedas sin configuraciones compatibles. Si realiza cambios en su silla de ruedas después de recibirla, debe comunicarse con su proveedor de la silla de ruedas o con Ki Mobility para asegurarse de que sea apropiado continuar usando su silla de ruedas como asiento en un vehículo automotor. Las sujeciones de cinturón pélvico resistentes a choques y las instrucciones de uso están disponibles en el Servicio al Cliente de Ki Mobility para ser utilizadas junto con un cinturón de hombro anclado en el vehículo.


El asiento y el soporte del espaldar originales, diseñados y probados como parte de la opción Tránsito, pueden haber sido reemplazados con asientos postventa. Su proveedor de la silla de ruedas debe poder informarle si los asientos recibidos son equipos originales o asientos postventa. Antes de viajar sentado en una silla de ruedas equipada con la opción Tránsito en un vehículo a motor, debe haber ya un sistema completo de chasis y asiento de silla de ruedas, un sistema de retención de silla de ruedas y ocupante (WTORS), así como un vehículo a motor debidamente equipado, y el sistema por entero debe cumplir con las normas mencionadas en este capítulo.

Cada vez que viaje sentado en su silla de ruedas dentro de un vehículo automotor, cumpla las siguientes instrucciones:


IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

D. Uso en tránsito (continuación)

- El pasajero debe sentarse orientado en el sentido de marcha.
- El pasajero y todos los artículos transportados no deben pesar más de 165 libras (75 kg).
- Algunas configuraciones de este modelo pueden superar las 28,5 pulgadas (724 mm) de ancho, que es el ancho mínimo para las plataformas elevadoras en vehículos que cumplen con ADA.
- En el caso de una silla de ruedas pesada y de gran tamaño, se recomienda el transporte en vehículos más grandes cuando exista la posibilidad.
- Las mochilas y bolsas deben retirarse y asegurarse por separado en el vehículo automotor. En caso de accidente, estos elementos pueden convertirse en proyectiles peligrosos que pueden lesionar o matar a usted u otro ocupante del vehículo automotor.
- El pasajero debe usar un sistema de retención de silla de ruedas y ocupante que cumpla con RESNA WC-4, Capítulo 18: Sistemas de sujeción de sillas de ruedas y restricción del pasajero para uso en vehículos automotores o ISO 10542-1 Sistemas técnicos y auxilios para personas discapacitadas o minusválidas - Sistemas de retención de silla de ruedas y ocupante - Parte 1: Requisitos y métodos de prueba para todos los sistemas.
- Fije los amarres de la silla de ruedas a los cuatro puntos de anclaje (dos delanteros, dos traseros) de la silla de ruedas equipada con la opción Tránsito (Fig. 1) cumpliendo con las instrucciones del fabricante de los amarres para silla de ruedas y con la norma RESNA WC-4, Capítulo 18 o ISO 10542-1, Parte 1.
- Use únicamente los puntos de fijación designados para sujetar su silla de ruedas a un vehículo.

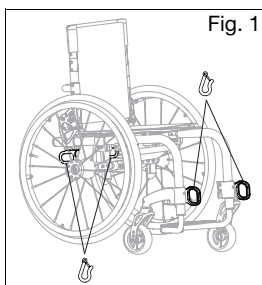

- Fije las retenciones para el ocupante siguiendo las instrucciones del fabricante de las mismas y la norma RESNA WC-4, Capítulo 18 o ISO 10542-1, Parte 1.
- Se deben usar ambas sujeciones, de cinturón pélvico y de hombro, a fin de reducir la posibilidad de impactos de la cabeza y el pecho con los componentes del vehículo.

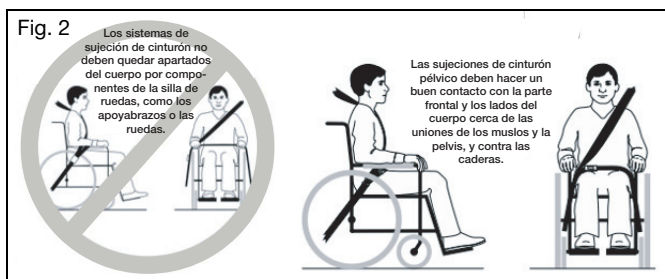

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

D. Uso en tránsito (continuación)

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Asegúrese de que los mecanismos de liberación de la sujeción no se vean activados por los componentes de la silla de ruedas durante una colisión. La activación de los mecanismos de liberación de la sujeción durante una colisión puede provocar lesiones graves o la muerte.

- No deben utilizarse apoyacabezas, soportes laterales u otros accesorios de posicionamiento ni se debe depender de ellos como sujeción del ocupante. Estos cinturones deben colocarse de tal manera que no interfieran con el posicionamiento adecuado de las sujeciones de cinturón resistentes a colisiones y no se debe depender de ellos para la protección de los ocupantes en situaciones de colisión, a menos que el cinturón postural se haya diseñado para que cumpla con los requisitos 4.6, 5.2, 5.3 y 6.1 de la norma RESNA WC-4.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Los soportes del espaldar con ángulos de inclinación ajustables no deben estar reclinados a más de 30 grados de la vertical durante el viaje del vehículo, a menos que sea necesario por las necesidades posturales y médicas del ocupante. Después de adaptarse y regularse, la parte superior de la superficie de soporte del espaldar debe estar a 4 pulgadas (10,2 cm) de la parte superior de su hombro. No regular debidamente el soporte del espaldar y los ángulos de inclinación puede dar como resultado lesiones graves o la muerte.


- Todo asiento postventa debe ser testeado y comprobar que sea conforme a la norma RESNA WC-4, Capítulo 20 o ISO 16840-4 - Parte 4.
- Fije el asiento al chasis de la silla de ruedas siguiendo las instrucciones del fabricante del asiento y la norma RESNA WC-4, Capítulo 20 o ISO 16840-4 - Parte 4.
- Accesorios como bandejas, tubos de oxígeno y sus respectivos soportes, portasueros, mochilas, bolsas y cualquier otro artículo no fabricado por Ki Mobility, deben retirarse y sujetarse por separado en el vehículo automotor. En caso de accidente, estos elementos pueden convertirse en proyectiles peligrosos que pueden lesionar o matar a usted u otro ocupante del vehículo automotor.
- Si la silla de ruedas hubiese estado involucrada en un accidente de tránsito, interrumpa su uso puesto que pueden haberse creado desgastes o daños no visibles.

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

D. Uso en tránsito (continuación)

⚠️ ADVERTENCIA ⚠️

ADVERTENCIA: Si los componentes interiores del vehículo no se pueden retirar de la zona despejada, especialmente los que están cerca de la cabeza del ocupante durante un impacto lateral o una volcadura del vehículo, deben estar acolchados con material que cumpla con la norma FMVSS 201. No acolchar los componentes interiores de la zona despejada puede dar como resultado lesiones graves o la muerte.

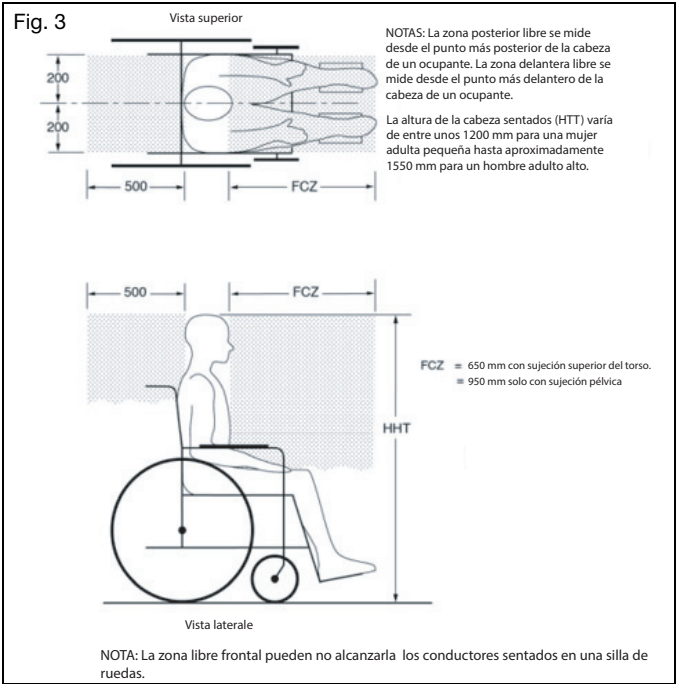

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

D. Uso en tránsito (continuación)



ADVERTENCIA: Quite y asegure cualquier elemento fijado temporalmente a la silla mientras está en un vehículo automotor. Dejar puestos elementos sobre la bandeja de ventilación, de la batería o en el soporte del tubo de oxígeno sin fijarlos de manera adecuada y por separado en un vehículo automotor podría convertirlos en peligrosos proyectiles durante un accidente. Además, los tubos de oxígeno contienen un gas altamente presurizado que acelera vigorosamente la combustión. Estos factores pueden provocar lesiones graves o la muerte del usuario o cualquier otra persona en el vehículo.

- Antes de viajar sentado en esta silla de ruedas dentro de un vehículo automotor, retire cualquier elemento fijado a la bandeja de ventilación, de la batería o al soporte del tubo de oxígeno y guárdelos al seguro por separado.
- Si la silla de ruedas viene con soporte para tubo de oxígeno, nunca la use para viajar sentado en ella dentro de un vehículo automotor.

NOTA: Para obtener copias de las normas RESNA o ISO, comuníquese con las siguientes organizaciones titulares de las mismas:

RESNA

www.resna.org

Normas ANSI/RESNA:

RESNA WC-4, Capítulo 18:

Sistemas de retención de silla de ruedas y ocupante para uso en vehículos automotores.

RESNA WC-4, Capítulo 19:

Sillas de ruedas utilizadas como asientos en vehículos automotores.

RESNA WC-4, Capítulo 20:

Sistemas de asientos para sillas de ruedas para usar en vehículos automotores.

Organización Internacional de Normalización (ISO)

www.iso.org

Normas ISO:

ISO 10542-1 Sistemas técnicos y auxilios para personas discapacitadas o minusválidas –

Sistemas de retención de silla de ruedas y ocupante - Parte 1:

Requisitos y métodos de prueba para todos los sistemas.

ISO 16840-4 Asientos de silla de ruedas - Parte 4:

Sistemas de asientos para uso en vehículos automotores.

ISO 7176-19 Sillas de ruedas - Parte 19:

Dispositivos de movilidad con ruedas para su uso como asientos en vehículos automotores.

Ministerio de Transportes de los E.E.U.U.

FMVSS 201

www.nhtsa.gov

Protección del ocupante durante un impacto interno – Protección de la parte superior de la cabeza durante un impacto

Resultados de la prueba de tránsito

La calificación de la estabilidad lateral es Buena.

Tipo de sujeción - De tres puntos

La calificación de un fácil posicionamiento adecuado de un cinturón de tres puntos es Excelente

La calificación del grado en que se puede lograr el cinturón de tres puntos adecuado es 16/16.

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

E. Uso del cojín



ADVERTENCIA: Evite sentarse durante largos períodos de tiempo sin un cojín de silla de ruedas adecuado. Sentarse por largos períodos de tiempo sin un cojín de silla de ruedas adecuado podría causar úlceras por presión que podrían provocar infecciones graves o incluso la muerte.



Sujete el cojín antes de usarlo o de transferirse. Si el cojín no está correctamente sujetado, puede deslizarse fuera de la silla de ruedas durante el uso o las transferencias, dando como resultado caídas o pérdida de control. Una caída o pérdida de control puede provocar daños a su silla o lesiones graves o la muerte a usted u otros.

- a. Esta silla de ruedas fue diseñada para usarse con un cojín de silla de ruedas adecuado.
- b. El tapizado estándar de la eslinga viene con tiras autoajustables de gancho y bucle. El cojín que se utilice debe contar con sujetadores de tipo gancho que puedan pegarse a los bucles de la eslinga del asiento para evitar que el cojín se le deslice debajo de usted. Asegúrese de que el cojín esté bien sujeto antes de transferirse o sentarse en la silla de ruedas.
- c. Es posible que la silla de ruedas no haya sido suministrada con una eslinga estándar de asiento. Consulte con el proveedor de su silla de ruedas si la eslinga del equipo original ha sido sustituida por un accesorio postventa. En tal caso, cumpla con las indicaciones de uso del fabricante del accesorio postventa.


F. Transporte de una silla de ruedas desocupada

Las sillas de ruedas Ki Mobility son generalmente adecuadas para ser transportadas en vehículos de motor y aviones. Las sillas de ruedas siempre deben estar sujetadas (se requieren instrucciones específicas del transportista). En función de la configuración de la silla de ruedas, cualquier silla de ruedas en particular puede ser demasiado grande para el transporte en algunos vehículos de motor o aviones. Consulte otros capítulos sobre cómo desmontar opcionales y accesorios para disminuir el tamaño con objeto de guardarla.

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

G. Su Clik y sus partes

1. Inspeccione y mantenga su silla utilizando la información que se encuentra en la sección **Manutención y Cuidado**.
2. Si detecta un problema, comuníquese con su proveedor autorizado de inmediato.

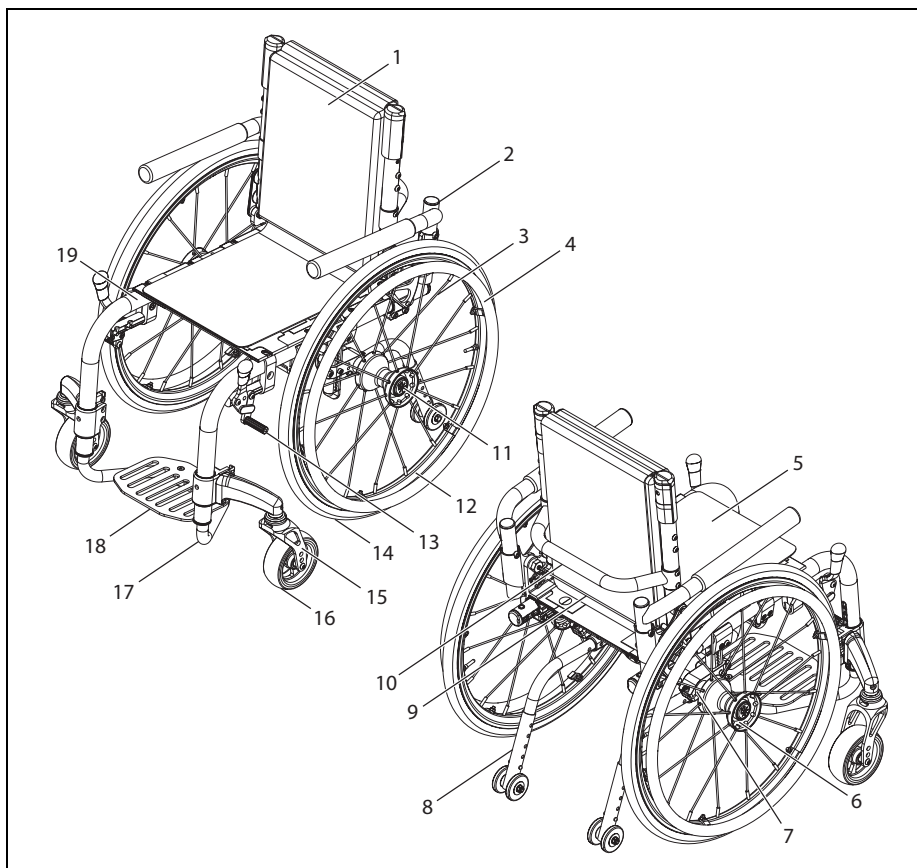

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Tapizado del espaldar | 11. Eje de liberación rápida |
| 2. Apoyabrazos abatible swing away | 12. Aro de rueda de aluminio |
| 3. Radio | 13. Bloqueo de ruedas |
| 4. Aro de rueda | 14. Rueda |
| 5. Tapizado del asiento | 15. Horquilla del caster |
| 6. Cubo de la rueda posterior | 16. Caster |
| 7. Tubo del camber | 17. Apoyapiés |
| 8. Antivuelco | 18. Bandeja apoyapiés |
| 9. Cable de liberación | 19. Chasis del asiento |
| 10. Barra rigidizadora | |

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS


H. Brazo en T de altura regulable

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Estos brazos pueden bloquearse sólo contra la rotación y están diseñados para resistir fuerza descendente únicamente. Si se los tira hacia arriba se saldrán por completo. No deben usarse para levantar o movilizar la silla de ruedas de cualquier otro modo. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar que el apoyabrazos se salga de la silla de ruedas accidentalmente y dé como resultado una caída o pérdida de control y, a su vez, provocar grave daño o muerte.

Cómo usar el apoyabrazos

1. Instalación
 - a. Inserte el bastón exterior del brazo en el correspondiente alojamiento del chasis de la silla de ruedas.
 - b. El apoyabrazos se fijará automáticamente en su lugar. Verifique que la palanca de bloqueo esté como se muestra (Fig. 4:B).
2. Regular la altura
 - a. Gire la palanca de liberación (Fig. 4:A).
 - b. Deslice la almohadilla del apoyabrazos hacia arriba o hacia abajo hasta la altura deseada.
 - c. Coloque nuevamente la palanca en posición bloqueada contra el bastón del brazo.
 - d. Empuje la almohadilla hasta que la parte superior del brazo quede bien sujeta en su lugar. Verifique que la palanca de bloqueo esté como se muestra (Fig. 4:A).
3. Extraer el apoyabrazos
 - a. Presione la palanca de liberación (Fig. 4: B) y extraiga el apoyabrazos.

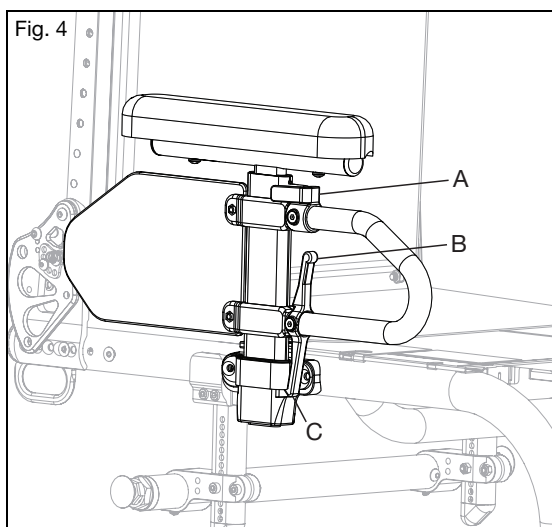

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS


I. Apoyabrazos abatibles swing away

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Estos brazos pueden bloquearse sólo contra la rotación y están diseñados para resistir fuerza descendente únicamente. Si se los tira hacia arriba se saldrán por completo. No deben usarse para levantar o movilizar la silla de ruedas de cualquier otro modo. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar que el apoyabrazos se salga de la silla de ruedas accidentalmente y dé como resultado una caída o pérdida de control y, a su vez, provocar grave daño o muerte.

Cómo usar el apoyabrazos

1. Instalación (Fig. 5)
 - a. Inserte el apoyabrazos en el tubo del alojamiento que está montado en el lado posterior del chasis.
2. Hacer pivotar el brazo
 - a. Alce un poco el apoyabrazos de manera tal que se libere del perno del alojamiento. Hágalo girar hacia afuera.
3. Extraer el apoyabrazos
 - a. Alce el apoyabrazos y quítelo directamente de su alojamiento.

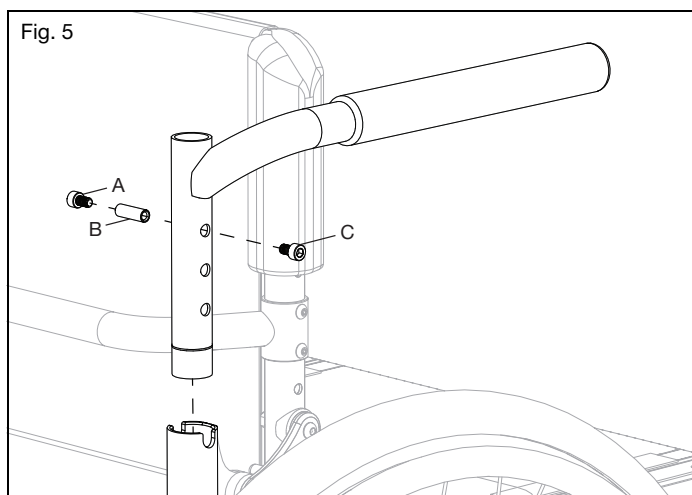

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS



J. Brazo en T pediátrico regulable en altura

⚠ ADVERTENCIA ⚠

ADVERTENCIA: Estos brazos pueden bloquearse sólo contra la rotación y están diseñados para resistir fuerza descendente únicamente. Si se los tira hacia arriba se saldrán por completo. No deben usarse para levantar o movilizar la silla de ruedas de cualquier otro modo. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar que el apoyabrazos se salga de la silla de ruedas accidentalmente y dé como resultado una caída o pérdida de control y, a su vez, provocar grave daño o muerte.

Cómo usar el apoyabrazos

1. Cómo instalar el apoyabrazos (Fig. 6)
 - a. Deslice el poste del apoyabrazos en el receptor del chasis lateral. Asegúrese de que el pasador de la palanca enganche en el receptor.
2. Extraer el apoyabrazos
 - a. Empuje la palanca (Fig. 6:A) hacia el panel de protección lateral para liberar el pasador del receptor.
 - b. Saque el apoyabrazos directamente de su alojamiento.
3. Regular la altura del apoyabrazos
 - a. Quite el apoyabrazos de los alojamientos.
 - b. Quite los dos tornillos de 6 mm de los protectores laterales (Fig. 7:A).
 - c. Quite el tornillo (Fig. 7:B) del tope del poste del protector lateral a través de dicho poste, pero no lo retire por completo. El tornillo puede permanecer en el conjunto de la palanca. Repita en el brazo opuesto.
 - d. Restaure el tope del bastón y el conjunto de la palanca en el poste del protector lateral a la posición deseada. Vuelva a apretar el tornillo (Fig. 7:B) y repita en el brazo opuesto.
 - e. Ponga el protector lateral en la posición deseada y coloque de nuevo los dos tornillos de 6 mm (Fig. 7:A) para fijar en su sitio el protector lateral. Apriete los dos tornillos de 6 mm y repítalo del lado opuesto.
 - f. Vuelva a colocar los conjuntos de los apoyabrazos en el alojamiento (Fig. 6).

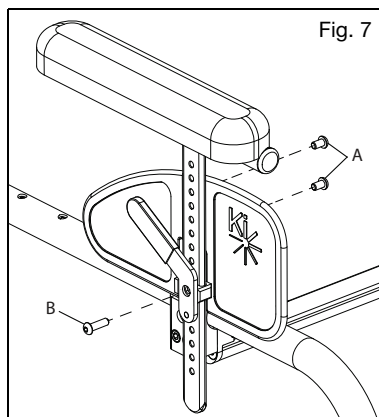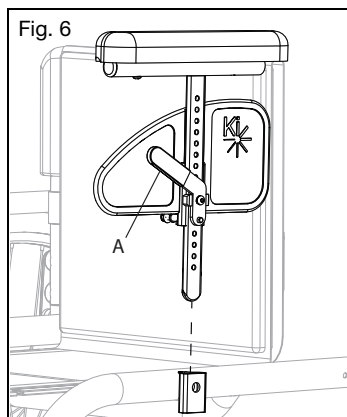

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

K. Apoyabrazos abatible y extensible con bloqueo de la regulación del ángulo




ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Estos brazos pueden bloquearse sólo contra la rotación y están diseñados para resistir fuerza descendente únicamente. Si se los tira hacia arriba se saldrán por completo. No deben usarse para levantar o mover la silla de ruedas de cualquier otro modo. El incumplimiento de las instrucciones anteriores puede provocar que el reposabrazos se desconecte accidentalmente de la silla de ruedas y provoque una caída o pérdida de control que puede causar lesiones graves o la muerte.

Cómo usar el apoyabrazos

1. Deslice el apoyabrazos hacia arriba
 - a. Presione la palanca de liberación (Fig. 8:A) hacia arriba para liberar el apoyabrazos.
 - b. Gire el apoyabrazos liberado hacia arriba.
2. Vuelva a colocar el apoyabrazos en la posición de funcionamiento
 - a. Para regresar el apoyabrazos a la posición de operación, empuje el apoyabrazos hacia abajo hasta que la palanca haga clic y se bloquee.

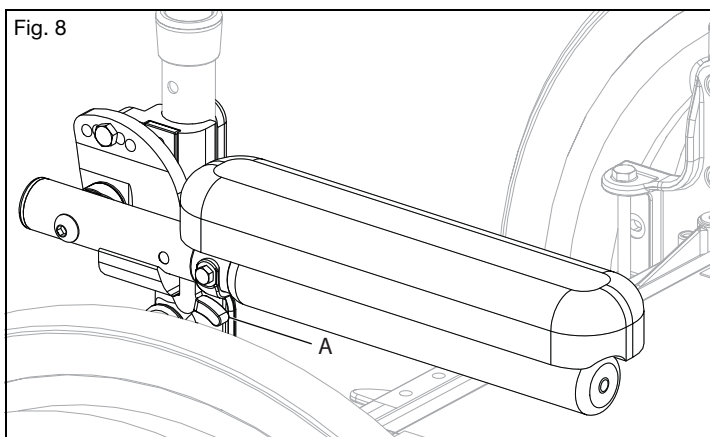

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

L. Ruedas posteriores



ADVERTENCIA




ADVERTENCIA: Antes de poner en uso su silla de ruedas, cerciórese que el botón de liberación rápida esté sobresalido por completo y las bolillas bloqueadoras en su interior, bien activadas. De lo contrario, la rueda podría zafarse, lo que podría provocar una caída o un vuelco y ocasionarle lesiones graves o la muerte a usted u otras personas.

Cómo usar sus ruedas posteriores

1. Instalación de las ruedas (Fig. 9)

- Presione el botón de liberación rápida del eje para permitir que las bolillas de bloqueo se retraigan. Preste atención a la diferencia entre las posiciones sobresalida y contraída del botón de liberación del eje, y cómo influye sobre las bolillas bloqueadoras en el otro extremo del eje.
- Inserte el eje en el alojamiento del cojinete de la rueda, si ésta está separada de la silla de ruedas.
- Presione nuevamente el botón de liberación rápida y deslice el eje dentro del manguito del eje.
- Suelte el botón para bloquear el eje en el manguito. Si el botón de liberación no se extiende por completo y las bolillas bloqueadoras no se mueven a la posición de bloqueo después de soltar el botón, es necesario ajustar la longitud del eje.
- Si la rueda no ajusta, intente instalarla en el lado opuesto.

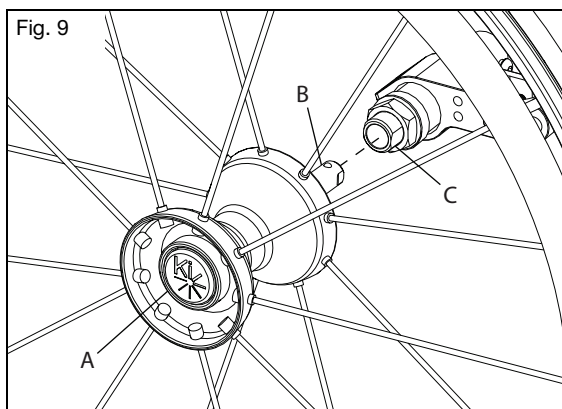

2. Cómo quitar las ruedas

- Sostenga la rueda cerca del cubo y presione el botón en el extremo exterior del eje.
- Mientras sigue presionado el botón, extraiga la rueda y el eje del manguito del eje.


IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

M. Ajuste del apoyapiés

Cómo cambiar el ajuste de altura de su apoyapiés

NOTA: La altura del apoyapiés debe determinarse trabajando con su terapeuta para garantizar el ajuste adecuado para usted.


1. A cada lado del chasis, afloje el tornillo de 3 mm de abajo (Fig. 10:A).
2. Regule el tubo del apoyapiés hacia arriba o hacia abajo a la altura deseada dentro del chasis lateral. Si el apoyapiés estaba siendo reemplazado, su tubo se deslizaría completamente hasta el final en este paso.
3. Asegúrese de que ambos lados estén ajustados por igual y vuelva a apretar el tornillo de 3 mm a cada lado a 40 in/lb para fijarlo.

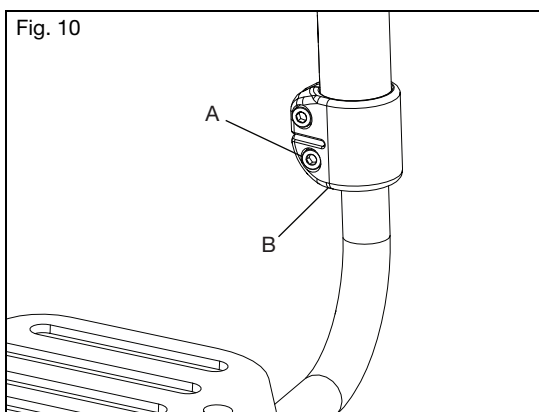

N. Apoyapiés de ángulo regulable

Cómo usar su apoyapiés

1. Cómo regular el ángulo de la bandeja apoyapiés
 - a. Afloje los dos tornillos (Fig. 11:A) en la parte inferior del apoyapiés con una llave Allen de 4 mm.
 - b. Gire el apoyapiés al ángulo deseado y fíjelo en su lugar apretando de nuevo los dos tornillos.

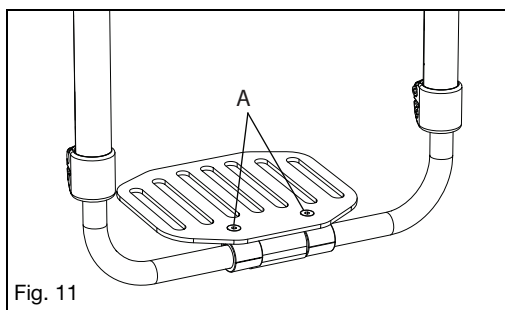


IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

O. Apoyapiés High Mount de angulación regulable y basculante

Cómo usar su apoyapiés

1. Regular la angulación
 - a. Afloje, pero no quite, los dos tornillos de 6 mm de la abrazadera central.
 - b. Una vez suelta, la abrazadera girará en torno al tubo de extensión del apoyapiés. Regule la abrazadera a la posición deseada.
 - c. Vuelva a apretar los dos tornillos de 6 mm a 80 in/lb para fijarlos.
2. Reposicionar la bandeja apoyapiés
 - a. Quite ambos tornillos M6 (Fig. 12:A) de la bandeja apoyapiés. Atrape las tuercas que pueden caer de la parte inferior de la abrazadera.
 - b. Reposicione la bandeja apoyapiés e inserte los tornillos en sus respectivos orificios.
 - c. Coloque las tuercas en la ranura debajo de la abrazadera y apriete firmemente los tornillos para fijarla.
3. Modificar la altura de la bandeja apoyapiés
 - a. Afloje ligeramente los dos tornillos de 6 mm (Fig. 12:B) de la abrazadera de la bandeja apoyapiés. Mantenga la abrazadera ajustada de modo que el conjunto se mantenga unido y repítalo del lado opuesto.
 - b. Deslice ahora el conjunto completo de la bandeja apoyapiés hacia arriba o hacia abajo a lo largo del chasis. Coloque la bandeja apoyapiés en la posición que necesita.
 - c. Apriete uno de los tornillos de 6 mm (Fig. 12:B) ligeramente a cada lado. Una vez fijado, termine de apretar los cuatro tornillos de 6 mm (Fig. 12:B). Apriete cada tornillo un poco a la vez para evitar que la abrazadera fije de manera desigual.

NOTA: Apretar los tornillos de manera desigual puede provocar daños en las roscas del interior de la abrazadera.

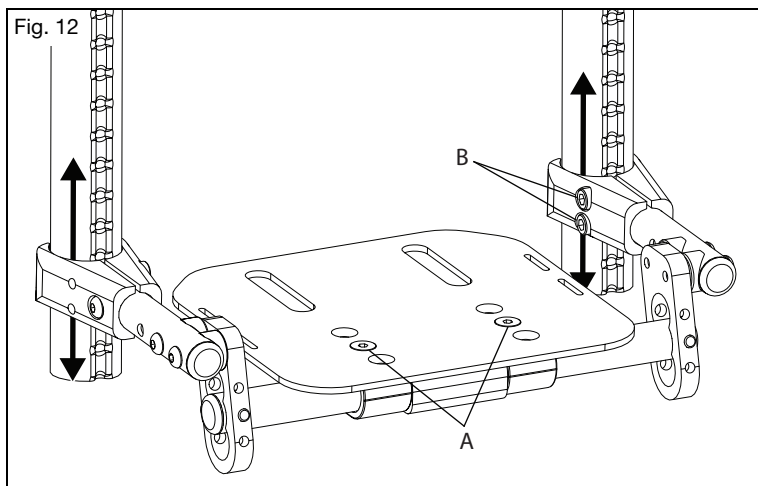

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

O. Apoyapiés High Mount de angulación regulable y basculante (continuación)



4. Quitar el apoyapiés
 - a. Quite ambos tornillos de 6 mm (Fig. 13:A) de cada lado de la abrazadera del chasis del apoyapiés.
 - b. Ahora puede retirar el conjunto completo de la bandeja apoyapiés.
5. Reemplazo del apoyapiés
 - a. Afloje los dos tornillos de 6 mm (Fig. 13:B) en la abrazadera central.
 - b. Deslice el tubo (Fig. 13:C) sacándolo de la abrazadera central.
 - c. Quite los dos tornillos de 6 mm (Fig. 13:D) del soporte de instalación.
 - d. Deslice el tubo (Fig. 13:D) sacándolo del soporte de instalación.
 - e. Reemplace el tubo (Fig. 13:C) con uno de los nuevos tubos del kit de crecimiento.
 - f. Repita los pasos a - e en el lado opuesto.
 - g. Vuelva a introducir el tornillo de 6 mm (Fig. 13:D) a través del soporte de instalación y el tubo (Fig. 13:C). Vuelva a apretar y repita en el lado opuesto, asegurándose de que se utilicen los mismos agujeros a ambos lados.

NOTA: Hay tres posiciones posibles (Fig. 14:A). Elija la posición óptima para la altura deseada del apoyapiés.

- h. Introduzca el tubo (Fig. 13:C) a través del soporte giratorio (Fig. 13:B) e introduciéndolo en la abrazadera central. Repítalo en el lado opuesto.
- i. Instale el conjunto completo del apoyapiés en el chasis frontal, en la ubicación de altura deseada del apoyapiés colocando las abrazaderas en el chasis frontal.
- j. Coloque de nuevo los dos tornillos de 6 mm (Fig. 13:A) en la abrazadera a cada lado.
- k. Apriete ligeramente uno de los tornillos de 6 mm a cada lado. Una vez fijado, termine de apretar los cuatro tornillos de 6 mm. Apriete cada tornillo un poco a la vez para evitar que la abrazadera fije de manera desigual.

NOTA: Apretar los tornillos de manera desigual puede provocar daños en las roscas del interior de la abrazadera.

- l. Para regular la angulación de la bandeja apoyapiés, gire la abrazadera central en torno al tubo de extensión del apoyapiés.
- m. Seleccione la posición deseada y vuelva a apretar los dos tornillos de 6 mm (Fig. 13:B) a 80 in/lb.

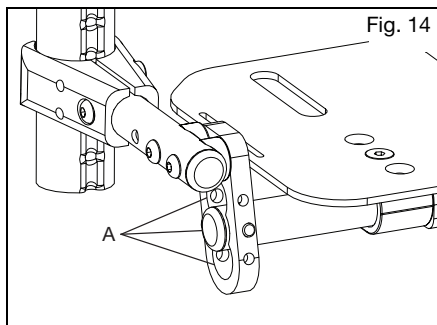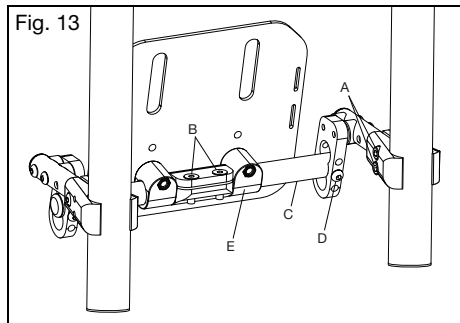

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

P. Seguros de las ruedas

ADVERTENCIA



ADVERTENCIA: Los neumáticos desinflados o desgastados pueden hacer que los seguros de las ruedas no funcionen correctamente. Si los seguros de las ruedas no logran retener la silla de ruedas, podría originarse una pérdida de control o caída que podría provocar lesiones graves o la muerte.

 Los seguros de las ruedas no se deben utilizar como frenos para reducir la velocidad de su silla de ruedas o detenerla. Usar un seguro de rueda como freno podría provocar pérdida de control o una caída que podría ocasionar lesiones graves o la muerte.

Cómo regular los seguros de las ruedas

NOTA: Siempre afloje y apriete los pernos u otros elementos de las ruedas aflojando y apretando un poco cada vez a cada lado. Evitará así un exceso de presión sobre un set de pernos o elementos que provoca atascamiento y mayor dificultad para retirarlos.

1. Use una llave Allen de 5 mm para girar uno de los tornillos de la abrazadera hasta que salga con facilidad (menos de una vuelta).
2. Repita el paso 1 con los siguientes tornillos para que la abrazadera pueda ajustarse sobre el chasis.
3. Ajuste la abrazadera a lo largo del chasis para lograr que el seguro de la rueda trabaje bien el neumático y detenga cualquier movimiento. Ver Fig. 15.
4. Vuelva a apretar los tornillos.
5. Pruebe siempre el nuevo estado del seguro de la rueda sobre una superficie plana y nivelada. Con los seguros activados, las ruedas no deben poder desplazarse ni moverse. Si los seguros de las ruedas no están ajustados correctamente, es indispensable modificarlos hasta que así lo estén. Ver Fig. 16.

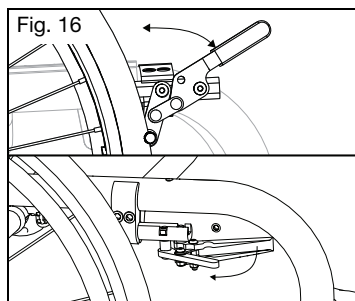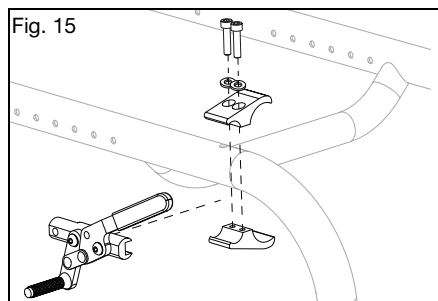

Funcionamiento del seguro de las ruedas

1. El funcionamiento del seguro de las ruedas se basa en el estilo de seguro con el que esté equipada su silla. El enganche de la barra del seguro de la rueda con el neumático se hace empujando o tirando de la manija del seguro de la rueda para enganchar completamente la barra del seguro de la rueda al neumático.
2. Para desenganchar el seguro de la rueda, muévelo en dirección opuesta.

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

Q. Antivuelco

⚠️ ADVERTENCIA ⚠️

ADVERTENCIA: Mantenga en todo momento los antivuelco activados hacia abajo siempre que no haya riesgo de interferencia. Haga que un profesional clínico o técnico confirme que sus antivuelco están correctamente instalados. El control se realiza inclinando hacia atrás la silla de ruedas con el usuario sentado, cargando el peso sobre los antivuelco, para probar que limitan adecuadamente la rotación hacia atrás de la silla de ruedas. Si los antivuelco permiten que la silla de ruedas se incline hasta un punto en el cual su centro de gravedad (COG) está alineado verticalmente con el punto donde la rueda toca el suelo, significa que la silla de ruedas es inestable y podría volcarse. Un vuelco puede dañar su silla de ruedas, causar lesiones graves o la muerte.

⚠️ Los usuarios, ya sean nuevos o expertos, que se pasan a otra silla de ruedas o bien que regulan la configuración de su silla actual, deben activar en todo momento los antivuelco. Si existe algún cambio en las capacidades físicas del usuario, también debe usar antivuelco. Cualquier cambio en las capacidades físicas del usuario o en la silla de ruedas aumenta el riesgo de volcar hacia atrás. Un vuelco hacia atrás puede dañar su silla de ruedas, causar lesiones graves o la muerte. Es importante activar siempre los antivuelco hasta que se haya adaptado a una silla de ruedas nueva o reconfigurada.


⚠️ Quite o desplace hacia arriba los antivuelco al subir o bajar bordillos, obstáculos y escalones. Si los antivuelco se dejan en posición hacia abajo al subir o bajar bordillos, obstáculos y escalones, pueden doblarse o quebrarse. Si los antivuelco están doblados o quebrados, ya no evitarán que la silla de ruedas se vuelque hacia atrás. Un vuelco hacia atrás puede dañar su silla de ruedas, causar lesiones graves o la muerte.

⚠️ Los antivuelco pueden no ser eficaces cuando se transita con la silla de ruedas por superficies flojas (como por ejemplo arena, tierra suelta, césped y grava), rampas y pendientes irregulares. Si el antivuelco no es eficaz, la silla de ruedas puede volcarse hacia atrás. Un vuelco hacia atrás puede dañar su silla de ruedas, causar lesiones graves o la muerte.


⚠️ Ki Mobility recomienda usar dos antivuelco en su silla de ruedas. El uso de un solo antivuelco aumenta el riesgo de vuelco hacia atrás. Un vuelco hacia atrás puede dañar su silla de ruedas, causar lesiones graves o la muerte.

Ki Mobility recomienda usar antivuelco con su silla de ruedas. Los antivuelco ayudan a evitar que su silla de ruedas se incline hacia atrás. Cuando se ajustan adecuadamente, los antivuelco proporcionan un aumento significativo en la estabilidad hacia atrás. El uso de antivuelco no garantiza que su silla de ruedas no vuelque. Recuerde volver a activar o girar hacia abajo los antivuelco cada vez que los haya quitado o girado hacia arriba.

Los antivuelco no tienen por objeto soportar el peso del ocupante durante largos períodos de tiempo.

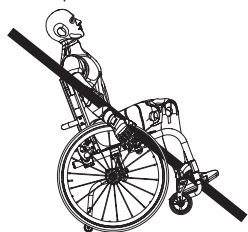

Si los antivuelco se ajustan demasiado cortos, no evitarán que la silla de ruedas se vuelque hacia atrás.

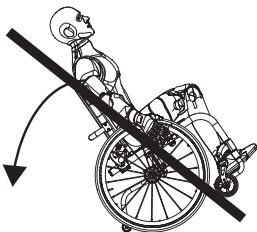

Los antivuelco nunca deben sostener la totalidad del peso del usuario. Para evitar que los antivuelco se doblen o se rompan es necesario quitarlos o girarlos hacia arriba al subir o bajar bordillos, obstáculos o escalones.

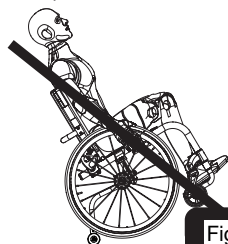


Fig. 17

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

Q. Antivuelco (Continuación)

Cómo instalar los antivuelco estándar (Fig. 18)

1. Empuje el pasador de liberación posterior de los antivuelco (Fig. 18:A) dentro del correspondiente tubo de tal manera que ambos pasadores queden dentro.
2. Inserte el tubo del antivuelco en el alojamiento que se halla sobre el tubo del camber.
3. Gire el tubo antivuelco hacia abajo hasta que el pasador de liberación entre en el orificio de montaje del alojamiento.
4. Inserte el segundo tubo antivuelco de la misma manera.

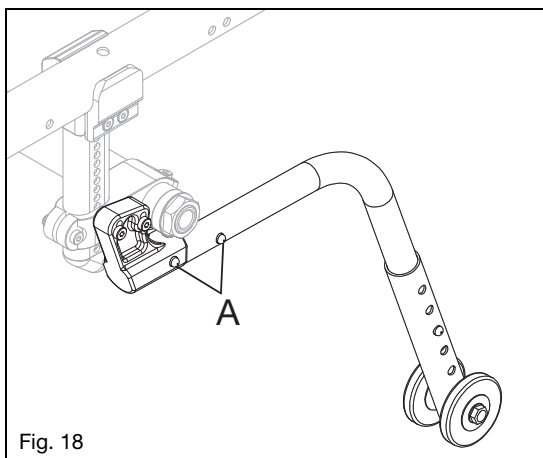


Fig. 18

Cómo ajustar la altura de la extensión de la rueda (Fig. 19)

1. Presione el pasador de liberación de la rueda antivuelco para que el pasador de liberación (Fig. 19:A) quede adentro.
2. Suba o baje el antivuelco hasta que encastre en uno de los agujeros existentes.
3. Suelte el pasador.
4. Regule el segundo tubo antivuelco de la misma manera. Ambas ruedas deben estar exactamente a la misma altura.

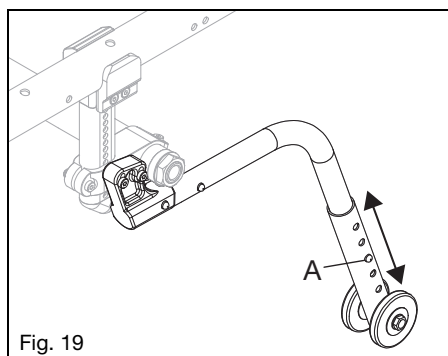



Fig. 19

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

Q. Antivuelco (Continuación)

Cómo girar los tubos antivuelco hacia arriba (Fig. 20)

1. Empuje el pasador de liberación del tubo antivuelco posterior (Fig. 20:A).
2. Sujete el pasador y gire el tubo antivuelco hacia arriba.
3. Suelte el pasador.
4. Repita con el segundo tubo antivuelco.
5. Vuelva a bajar los tubos antivuelco después de completar la maniobra.

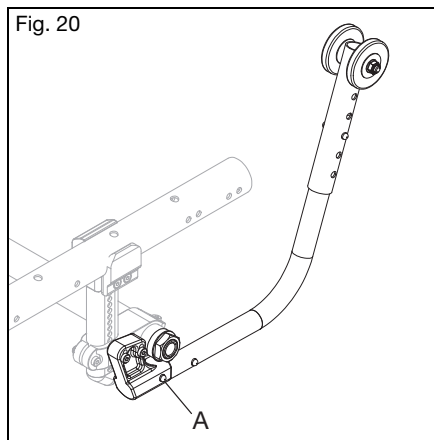

R. Superficies de contacto

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Las superficies calientes de las sillas de ruedas pueden crear situaciones potencialmente peligrosas que, si no se evitan, podrían causar lesiones.

 **No exponga la silla de ruedas ni sus componentes al frío extremo. Las superficies metálicas extremadamente frías pueden congelar la piel sobre la superficie y dañar la piel.**

Tenga en cuenta que la exposición prolongada a la luz solar directa u otras fuentes de calor radiante puede aumentar la temperatura de las superficies de su silla de ruedas por encima de los límites estimados recomendados por estándares.

Los cuidadores deben evaluar a los pacientes a fin de detectar reacciones adversas de la piel por las superficies de contacto tales como enrojecimiento, hinchazón, sensibilización a la irritación, alergia, respuesta inmune u otras reacciones.

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

S. Tapizado

⚠ ADVERTENCIA ⚠

ADVERTENCIA: Reemplace de inmediato el tapizado de asiento y espaldar que se haya desgastado y muestre signos de falla. Si no lo hace, el asiento o el espaldar pueden ceder y provocar caídas que dan como resultado graves lesiones o la muerte.

El material de la eslinga del asiento se debilitará con el tiempo. La acción repetida de transferirse a la silla de ruedas debilitará el material de la eslinga más rápido. Cerciérese de que el tapizado no esté deshilachado, debilitado en algunos puntos o que la trama no esté estirada, en particular en bordes y costuras. Esto debe hacerse mensualmente. Además, tenga en cuenta que el lavado o el exceso de humedad reducirán las propiedades retardantes de llama de la tela. Consulte las indicaciones del capítulo Mantenimiento y Cuidados para una correcta limpieza. Póngase en contacto con su distribuidor oficial si tiene inquietudes sobre su asiento o su espaldar, o cree que necesitan ser reemplazados.

T. Espaldar plegable



⚠ ADVERTENCIA ⚠

ADVERTENCIA: No levante la silla de ruedas usando la barra de liberación (Fig. 18:A). Levantar la silla de ruedas usando la barra de liberación puede ocasionar fallas en las piezas, lo que puede provocar una caída y lesiones graves o la muerte.

⚠ No ocupe ni opere la silla cuando el espaldar no esté asegurado. Si lo hace, podría provocar una caída que podría provocar lesiones graves o la muerte.

Cómo usar el espaldar plegable

1. Tire hacia afuera del cable de liberación (Fig. 21:A), situado detrás del chasis posterior, a fin de liberar el pestillo y doblar el espaldar hacia abajo, hacia el chasis del asiento (Fig. 22).
2. Para volver a enganchar el espaldar en su sitio, tire del cable de liberación hacia afuera y el espaldar se soltará y podrá empujarse nuevamente hacia atrás a la posición vertical. El espaldar se enganchará automáticamente en el chasis lateral.
3. Asegure un enganche sólido en los pestillos tirando hacia atrás del chasis del espaldar hacia la posición vertical.

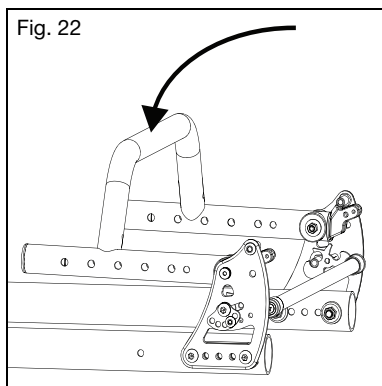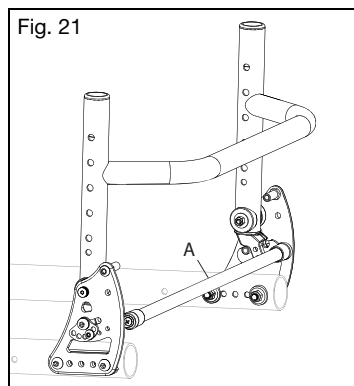


IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

U. Quinta rueda estándar

Al ajustar la quinta rueda, tenga en cuenta los obstáculos ambientales que pueden encontrarse. Si la quinta rueda caster toca el suelo, es posible que las ruedas posteriores grandes no toquen el suelo. Asegúrese siempre de mantener suficiente espacio libre entre el suelo y la quinta rueda caster.

Cómo usar la quinta rueda estándar

1. Inserción y extracción de la quinta rueda estándar
 - a. Presione los dos botones de liberación (Fig. 23:A) en el tubo de soporte de modo que ambos botones queden dentro.
 - b. Introduzca el conjunto en el alojamiento del tubo de soporte (Fig. 23:B).
 - c. Gire el tubo de soporte hacia abajo hasta que los botones del pasador de liberación pasen a través de los orificios de montaje del receptor.
2. Ajuste de la posición desde el suelo
 - a. El alojamiento del caster es ajustable dentro del tubo de soporte.
 - b. Quite la tuerca de mariposa (Fig. 23:C) del perno que sujeta el alojamiento del caster al tubo de soporte.
 - c. Deslice la cubierta a la altura deseada, vuelva a colocar el perno y fije la tuerca de mariposa.

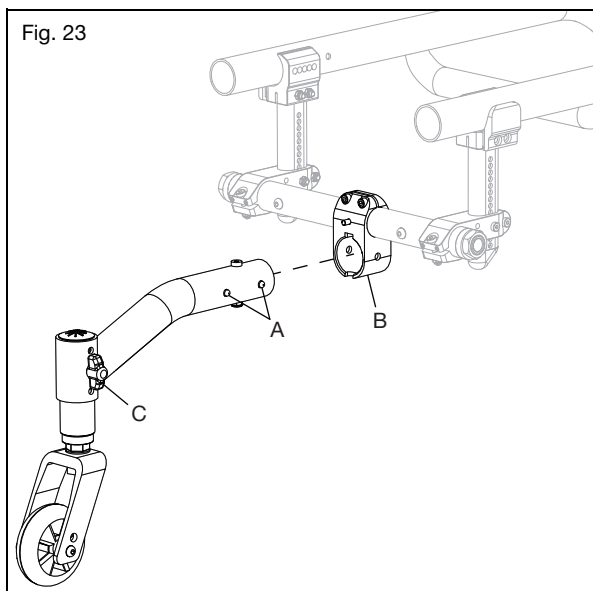



IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

V. Quinta rueda dinámica

Al ajustar la quinta rueda, tenga en cuenta los obstáculos ambientales que pueden encontrarse. Si la quinta rueda caster toca el suelo, es posible que las ruedas posteriores grandes no toquen el suelo. Asegúrese siempre de mantener suficiente espacio libre entre el suelo y la quinta rueda caster.

Cómo usar la quinta rueda estándar

1. Inserción y extracción de la quinta rueda estándar
 - a. Para quitarla, tire de la perilla de liberación (Fig. 24:A) para desenganchar el pasador de bloqueo y deslizar el conjunto fuera del receptor tubular (Fig. 24:B).
 - b. Para insertar el conjunto, tire de la perilla de liberación (Fig. 24:A) e inserte el conjunto en el receptor tubular (Fig. 24:B).
 - c. Gire el conjunto en el receptor para alinear la ranura (Fig. 24:C) y el pasador transversal (Fig. 24:D).
 - d. Suelte la perilla (Fig. 24:A).
2. Ajuste de la posición desde el suelo
 - a. El vástago del caster es ajustable dentro del brazo de la quinta rueda dinámica.
 - b. Afloje el perno de 6 mm en el anillo de sujeción (Fig. 25:A).
 - c. Sujete el conjunto de horquilla del caster y muévelo hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada. Cuide de no girar el vástago del caster dentro del alojamiento durante el reposicionamiento.
 - d. Vuelva a apretar el perno de 6 mm en el anillo de sujeción (Fig. 25:A).

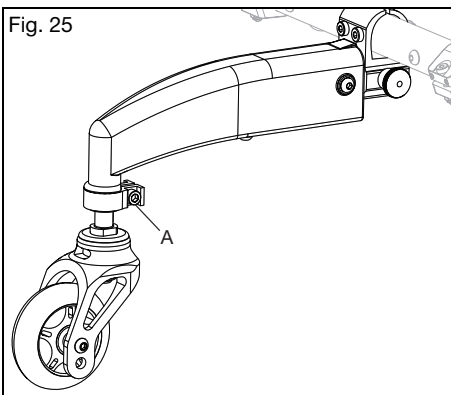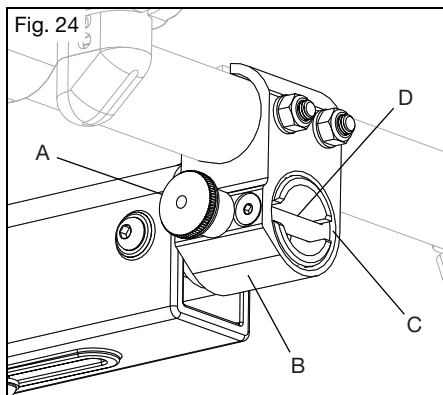

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

V. Quinta rueda dinámica (continuación)



3. Ajuste de la fuerza del resorte

- Quite de la silla el conjunto de la quinta rueda dinámica. Consulte el paso 1 de esta sección para obtener instrucciones.
- Afloje el tornillo de 6 mm ubicado en la parte inferior del conjunto (Fig. 26).
- Para disminuir el índice de elasticidad, deslice el tornillo y el elastómero lejos del conjunto de la horquilla del caster. Para aumentar el índice de elasticidad, deslice el tornillo y elastómero hacia el conjunto de la horquilla del caster.
- Vuelva a apretar el tornillo de 6 mm (Fig. 26). No lo apriete en exceso.

4. Cambio o sustitución del elastómero

La Clik ha sido provista de dos elastómeros para la quinta rueda dinámica. El más duro es negro y el más suave es amarillo.

- Quite de la silla el conjunto de la quinta rueda dinámica. Consulte el paso 1 de esta sección para obtener instrucciones.
- Quite el tornillo de 6 mm de un lado del brazo de la quinta rueda dinámica (Fig. 27:A) usando dos llaves Allen de 4 mm.
- Con una llave Allen, empuje el cilindro roscado (Fig. 27:B) fuera del grupo del brazo.
- Deslice el receptor tubular (Fig. 27:C) del ensamble.
- Quite el tornillo de 6 mm ubicado en la parte inferior del ensamble. Esto liberará el elastómero (Fig. 27:D). Quite el elastómero y coloque a un lado.
- Inserte el nuevo elastómero en la abertura del grupo del brazo con el inserto roscado orientado hacia abajo, hacia la ranura, alineado con la ranura del brazo.
- Enrosque el tornillo de 6 mm y la arandela (Fig. 27:D) a través de la ranura y dentro del inserto roscado del elastómero.
- Vuelva a apretar el tornillo de 6 mm (Fig. 27:D). No lo apriete en exceso.
- Vuelva a insertar el receptor tubular (Fig. 27:C) en el brazo. Asegúrese de que el brazo plano del receptor tubular esté colocado sobre la parte superior del elastómero.
- Alinee los orificios del brazo y el receptor tubular para insertar el cilindro roscado (Fig. 27:B) y el tornillo de 6 mm (Fig. 27:A).
- Apriete los tornillos de 6 mm (Fig. 27:A) usando dos llaves Allen de 4 mm.

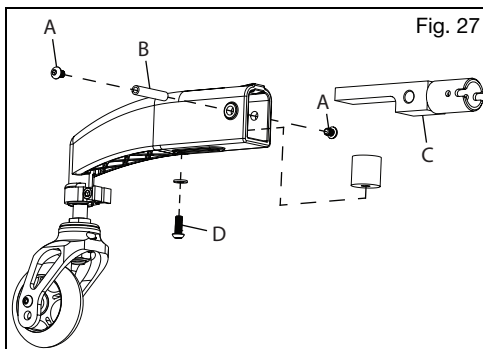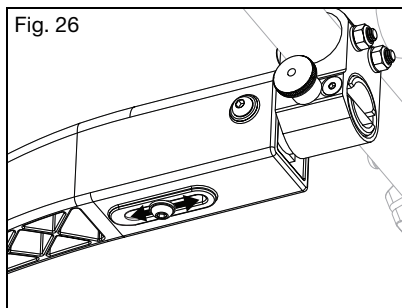

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

W. Frenos a tambor

⚠️ ADVERTENCIA ⚠️


ADVERTENCIA: Asegúrese de que los frenos a tambor estén debidamente regulados. Una silla de ruedas sin frenos a tambor debidamente regulados puede carecer de estabilidad y generar una pérdida de control que puede provocar lesiones graves.

⚠️ PRECAUCIÓN ⚠️

PRECAUCIÓN: Al guardar o transportar su silla de ruedas con los frenos a tambor desmontados, tenga cuidado de no dañar las pastillas de freno expuestas, lo cual puede dañar su silla y afectar el buen funcionamiento de los frenos a tambor (Fig. 29:C).


1. Cómo accionar los frenos

- Presione las palancas de freno (Fig. 28:A) a ambos lados de la silla para activarlos. Cada lado se acciona de forma independiente y se puede apretar con más o menos fuerza para obtener una mayor o menor acción de frenado.
- Suelte las palancas de freno para soltarlo.
- Para la función de freno de estacionamiento, apriete cada palanca de freno y, con el gatillo apretado, utilice el dedo índice para accionar la palanca de bloqueo (Fig. 28:B) hacia abajo sobre los dientes del soporte de la palanca. Mientras mantiene presionada la palanca de bloqueo, suelte las manijas del freno y el freno de estacionamiento permanecerá activado.
- Para liberar el freno de estacionamiento, apriete las palancas de freno hasta que las palancas de bloqueo a resorte salten hacia atrás. Suelte las palancas de freno para desactivar el freno.

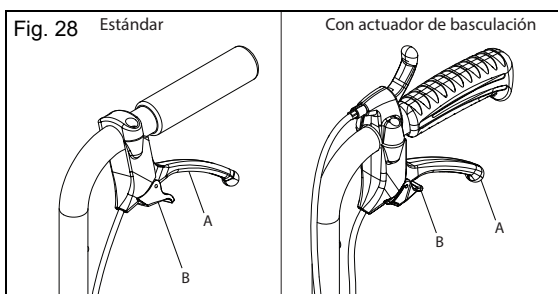

2. Regulación del freno

- Con una llave de 10 mm, desbloquee la contratuerca (Fig. 29:A) en el ajustador (Fig. 29:B). Desenrosque el ajustador para obtener un frenado más firme o enrósquelo para un frenado más leve.
- Se recomienda regular el freno hasta que haya un poco de arrastre en la rueda cuando se gira. Luego enrosque el ajustador hacia adentro alrededor de ½ vuelta, o lo que sea necesario para eliminar todo el arrastre de la rueda que gira.
- Vuelva a apretar la contratuerca a fin de bloquear el ajuste en su lugar. Repítalo en el lado opuesto de la silla.
- Confirme que el freno a tambor, cuando esté completamente accionado, siga impidiendo que las ruedas giren, tratando de empujar la silla de ruedas con el usuario en ella y las ruedas bloqueadas.

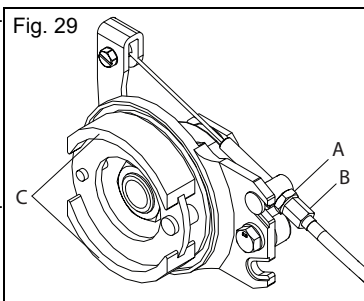

IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS


X. Soporte para bastón y muletas

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Siempre quite los elementos colocados momentáneamente en la silla de ruedas cuando viaje en un vehículo. Dejar elementos enganchados, sin retirarlos y asegurarlos por separado dentro al vehículo puede convertirlos en peligrosos proyectiles en caso de una frenada o virada súbita o abrupta. Es necesario también fijar bastones y/o muletas a la silla de ruedas de la manera correcta cuando se desplaza en ella. Estos elementos pueden encastrarse en la silla de ruedas y provocar una caída o vuelco. Las caídas y los vuelcos pueden dañar la misma o causar lesiones graves o muerte.

Cómo usar el soporte para bastón y muletas

1. Coloque el extremo estrecho del bastón o muleta en la parte inferior del receptáculo (Fig. 30:B).
2. Utilice el sujetador de velcro (Fig. 30:A) para fijar el bastón o muleta a la parte superior de la vara del espaldar. Confirme que el bastón o las muletas permanezcan firmes en su sitio tanto vertical como horizontalmente cuando la silla de ruedas esté en movimiento.

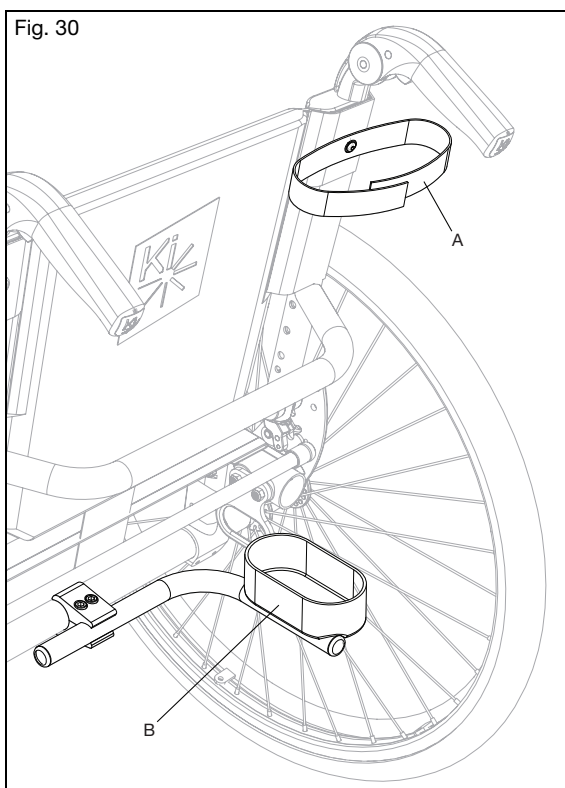


IV. USO Y CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

Y. Cubierta

Cómo usar la cubierta

1. Plegado de la cubierta (Fig. 31:A)
 - a. Para cerrar, levante el extremo frontal de la cubierta y tome el extremo delantero hasta el extremo posterior y doble la cubierta para apartarla.
 - b. Para abrir, tome el extremo frontal de la cubierta y tire hacia afuera y hacia abajo hasta que la cubierta esté completamente estirada.
2. Remoción rápida e instalación rápida (Fig. 31:C)
 - a. Empuje los pestillos hacia adentro (Fig. 31:D) a ambos lados de la cubierta y levántela sacándola de los alojamientos.
 - b. Para reinstalar la cubierta, instale ambos extremos en los alojamientos hasta que los seguros atrapen la parte inferior de las abrazaderas de montaje del tubo y se “traben” en su lugar.
3. Borde para contener la lluvia (Fig. 31:B)
 - a. El borde de la cubierta se puede doblar para contener las gotas de lluvia y desviarla del usuario que está sentado en la silla de ruedas.

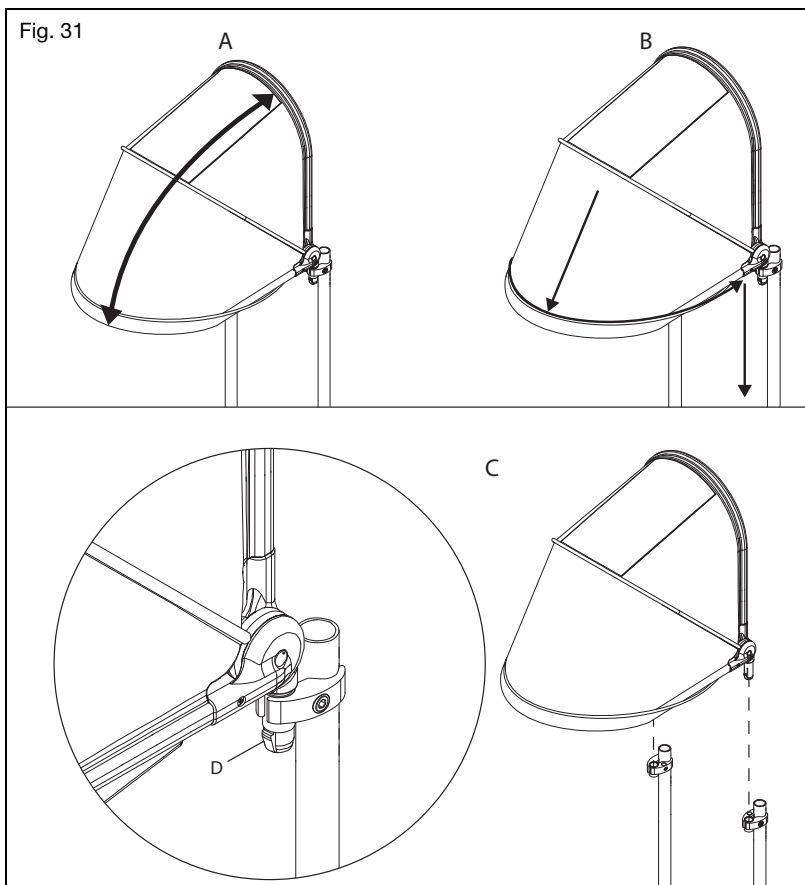

V. MANUTENCIÓN Y CUIDADO

A. Tabla de mantenimiento

La manutención regular y habitual extenderá la vida útil de su silla de ruedas a la vez que mejorará su desempeño. Reparar una silla de ruedas, sustituir piezas y efectuar cualquier control de manutención en los cuales no se sienta seguro debe ser llevada a cabo por un distribuidor oficial. Use únicamente piezas aprobadas por Ki Mobility cuando reemplace componentes. Póngase en contacto con su representante de servicio autorizado (puede valerse del localizador de distribuidores del sitio web de Ki Mobility) a fin de obtener información sobre piezas, identificación, pedidos e información técnica o instrucción adicional. La mayoría de los componentes se ilustran en "Ki Parts" en el sitio web de Ki Mobility.

Entre las herramientas comunes para realizar el mantenimiento autorizado tenemos: Medidor de presión de los neumáticos, Llaves de boca fija y métricas y Llaves Allen métricas.



PRECAUCIÓN


PRECAUCIÓN: No use disolventes, desengrasantes o agentes deshidratantes a base de petróleo (incluidos, entre otros, limpiadores para automóviles, alcoholes o WD-40). Pueden dañar los componentes, cojinetes o acabados.

Revise	Semanalmente	Mensualmente	Anualmente
Revise los niveles de inflado de los neumáticos e infle según sea necesario. Los niveles de inflado correctos están escritos en el neumático. (Consulte la tabla de conversión de presiones a continuación si es necesario - Fig. 32)	✓		
Revise la correcta activación y desactivación de los seguros de las ruedas. Los cambios de presión y el desgaste de los neumáticos requerirán regular los seguros de las ruedas. El capítulo Seguros de las Ruedas del presente manual contiene las instrucciones para regularlos.	✓		
Inspeccione los manguitos del eje para asegurarse de que sus tuercas estén apretadas.	✓		
Compruebe que los ejes de liberación rápida enganchen y desenganchen correctamente.	✓		
Compruebe que las ruedas casters, las ruedas antivuelco y las ruedas posteriores giren libremente. Es posible que sea necesario limpiar o reemplazar piezas si hay algún problema.	✓		
Limpie el área alrededor del alojamiento del caster y los cojinetes. Este es un lugar común para la acumulación de cabello.	✓		
Mantenga limpia la silla de ruedas. En caso de derrames corrosivos o exposición a riesgos biológicos, elimine las sustancias contaminantes de inmediato. Consulte las instrucciones del capítulo de Limpieza de este manual.	✓		
Revise que no haya puntos de desgaste o daños en los neumáticos posteriores, las ruedas antivuelco y las ruedas casters. Reemplácelos de inmediato si es necesario.	✓		
Revise los aros de las ruedas para asegurarse de que estén seguros y no estén dañados.	✓		
Verifique que las empuñaduras no giren ni se salgan. Reemplácelas de ser necesario.	✓		
Cerchiórese de que los alojamientos de los apoyabrazos no tengan sujetadores sueltos o faltantes y que estén firmes, regulados correctamente y se mantengan en su posición.	✓		
Compruebe que los antivuelco estén nivelados y sean funcionales.	✓		
Inspeccione el chasis y los antivuelco para detectar deformaciones, defectos, grietas, marcas o torceduras. Estos podrían ser signos de fatiga en la silla de ruedas que podrían dar como resultado una falla. Deje de usar la silla de ruedas de inmediato y póngase en contacto con un proveedor autorizado.		✓	
Revise el tapizado para detectar signos de desgaste, deshilachado o agujeros. Reemplácelo inmediatamente si es necesario.		✓	
Revise que las almohadillas para los brazos, los cojines y el espaldar no tengan daños, rasgaduras o roturas.		✓	
Inspeccione las ruedas en busca de rayos flojos, rotos o doblados. Reemplácelos de inmediato si es necesario.		✓	
Verifique que todos los sujetadores estén apretados. A menos que se indique lo contrario, los sujetadores deben apretarse a 40 in/lb (4.51 N·m).		✓	
Verifique que la silla de ruedas se desplace fácil y recta.		✓	
Haga que un técnico calificado de su proveedor autorizado revise y ajuste la silla de ruedas.			✓

V. MANUTENCIÓN Y CUIDADO

A. Tabla de manutención (Continuación)

Tabla de conversión de presiones

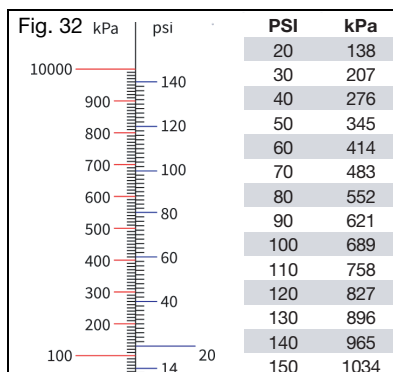

B. Limpieza



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN: Lavar los componentes tapizados que contienen retardadores de llama, como se indica en la etiqueta del tapizado, puede reducir la eficacia de los retardadores de llama con el tiempo. Esto puede aumentar el riesgo de ignición cuando se expone a llamas expuestas u otras fuentes de ignición, lo que puede aumentar el riesgo de lesiones.

Ejes, ruedas, neumáticos y piezas móviles:

1. Limpie semanalmente alrededor de los ejes y las ruedas con un trapo húmedo.
2. El pelo y la pelusa se alojan dentro y alrededor del alojamiento del caster y los ejes de las ruedas posteriores. Quite con un cepillo rígido o un punzón. Tenga cuidado de no dañar los sellos de los cojinetes.

Superficies pintadas

1. Lave a mano con un paño y un detergente suave.
2. Seque con un paño limpio o deje que la silla de ruedas se seque al aire.
3. Se puede usar cera no abrasiva para ayudar a preservar las superficies pintadas.

Tapizado:

1. Lave a mano con un paño y un detergente suave.
2. Deje que el tapizado se seque con el aire. **NO** seque con secarropas.

Componentes de plástico

1. Lave a mano con un paño y un detergente suave.
2. No use disolventes ni limpiadores agresivos, ya que pueden dañar los componentes de plástico.

Desinfección

1. Desinfecte las superficies con un desinfectante de venta libre con un mínimo de 70% de alcohol, o bien con toallitas. No empape con las soluciones de limpieza ni deje grandes cantidades de líquido acumuladas.
2. Deje actuar el desinfectante sobre la superficie al menos 15 minutos y luego retírelo con un paño aséptico.

V. MANUTENCIÓN Y CUIDADO

C. Almacenamiento

1. Cuando no esté en uso, mantenga su silla en un área limpia y seca. De lo contrario, la silla se oxidará o corroerá.
2. Si su silla ha estado almacenada durante más de dos meses, debe ser revisada por su proveedor autorizado antes de usarla.

D. Eliminación

Es posible que existan normativas locales específicas sobre la eliminación o el reciclaje de desechos; téngalas en cuenta cuando necesite deshacerse de desechos. Esto puede incluir la limpieza o descontaminación de la silla de ruedas antes de desecharla.

Si es obligatorio reciclar los materiales, tenga en cuenta los siguientes materiales generales usados en los componentes de la silla de ruedas:

- Aluminio - Chasis, horquilla del caster, montaje del caster, alojamiento de los cojinetes, ensamble del tubo del camber, placas de montaje del espaldar y su chasis, barra de liberación del espaldar, manijas de empuje, tubos del apoyapiés, bandeja apoyapiés, rieles del asiento, aros de las ruedas y llanta.
- Acero - Sujetadores, ejes de liberación rápida, vástagos de los casters, pestillo de liberación del espaldar, rayos de las ruedas, cojinetes y manguito del eje.
- Plástico - Ruedas posteriores, neumáticos de los casters, manijas de empuje, almohadillas del apoyabrazos y tapones de los tubos.
- Tapizado – Tela tramada de poliéster y espuma de poliuretano.

Si se desea reciclar los materiales o es requerido, como por la Directiva 2012/19/EU, WEEE (Desechos de equipos eléctricos y electrónicos) en Europa, tanto REAC como Mascot cumplen con WEEE y brindan una guía sobre reciclaje y eliminación. Es necesario un desmontaje adecuado para lograr una alta proporción de reutilización o reciclaje. Al manipular, es necesario usar herramientas y medidas de protección adecuadas para evitar el contacto con bordes afilados.

Los plásticos marcados con símbolos de reciclaje y las piezas termoplásticas se pueden reciclar. Las piezas de aluminio, cobre y acero, incluidos los sujetadores, pueden reciclarse. Los cables, baterías y PCB deben eliminarse por separado según los requerimientos locales.

Si tiene dudas o no logra deshacerse de la silla de ruedas como corresponde, devuélvala junto con los accesorios a su proveedor autorizado para que los elimine según las normas.

VI. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A. Problemas y soluciones

Para un rendimiento óptimo, su silla de ruedas debe ser regulada cada tanto. La siguiente es una lista de posibles problemas que puede encontrar durante la vida útil de su silla de ruedas y las soluciones sugeridas para cada problema. Para obtener los mejores resultados en la resolución de problemas, pruebe una solución a la vez, antes de pasar a una segunda solución. Si los problemas no mejoran o no está seguro de solucionarlos, se recomienda llevar la silla de ruedas a un centro de servicio autorizado para su reparación.

Soluciones:

A - Autocorrección si es posible o póngase en contacto con el distribuidor autorizado

B - Comuníquese con el distribuidor autorizado

		Problemas						
		La silla tira hacia un lado	Silla floja	Dificultad para girar	Caster suspendido en el aire	Caster que vibra	Chirridos, chasquidos o traqueteo	Bamboleo
Soluciones	A	Asegúrese de que la presión de todos los neumáticos sea correcta y uniforme entre ellos.	X	X	X			X
	A	Verifique que todos los sujetadores estén apretados apropiadamente; apriételos si es necesario.	X	X	X	X	X	X
	B	Apriete los rayos (si los hay).	X				X	X
	A	Verifique que los casters toquen el suelo y no estén suspendidos en el aire.	X	X		X		
	B	Optimize el seteo del Centro de Gravedad.		X		X		
	A	Inspeccione si hay interferencias en la rueda posterior y en los casters.	X	X			X	X
	A	Aplique un lubricante a base de teflón entre las conexiones del chasis y las correspondientes piezas de acoplamiento en las áreas sospechosas.					X	
	A	Quite los residuos de casters y cojinetes.	X	X		X		X

VII. GARANTÍA

Ki Mobility garantiza el chasis y los ejes de liberación rápida de esta silla de ruedas contra defectos de materiales y mano de obra durante la vida del comprador original. Todas las demás piezas y componentes hechos por Ki Mobility de esta silla de ruedas están garantizados ante defectos en materiales y mano de obra por un término de un año desde la fecha de compra del primer consumidor.

La vida estimada del chasis es de cinco años.

Limitaciones de la garantía

1. No garantizamos:
 - a. Artículos de desgaste: Tapizado, neumáticos, apoyabrazos y sus almohadillas, tubos y manijas de empuje.
 - b. Daños resultantes de negligencia, mal uso o instalación o reparación inadecuada.
 - c. Daño por exceder el límite de peso.
2. Esta garantía es NULA si se quita o altera la etiqueta original del número de serie de la silla de ruedas.
3. Esta garantía es NULA si la silla de ruedas original ha sido modificada con respecto a su estado originario y se determina que dicha modificación dio como resultado una falla.
4. Esta garantía es válida sólo en América del norte. Infórmese con su proveedor si tienen garantías de alcance internacional.

Responsabilidad de Ki Mobility

La única responsabilidad de Ki Mobility es sustituir o reparar, a su propia discreción, las piezas cubiertas por garantía. No existen otros recursos explícitos o implícitos.

Responsabilidad del comprador

- a. Cursar notificación a Ki Mobility a través de un proveedor autorizado y antes del final del período de validez de la garantía, y obtener una autorización de devolución (RA) para devolver o reparar las piezas cubiertas por garantía.
- b. Exigir que el proveedor envíe el artículo con devolución autorizada, con transporte prepago, a:
Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481, USA
- c. Pagar todo costo de mano de obra para reparar o instalar piezas.


VIII. ESPECIFICACIONES - CLIK

Fabricante: Ki Mobility	Masa máxima de ocupantes: 75 kg, 165 lb
Dirección: 5201 Woodward Dr., Stevens Point, WI 54481	Grupo de masa de ocupantes (I, II or III): II
Modelo: Little Wave Click	

Declaración informativa (ISO)								
Normativa de referencia	Medición	Valor fijo o mínimo	Valor máximo, de ser relevante	Normativa de referencia	Medición	Dim. N°	Valor fijo o mínimo	Valor máximo, de ser relevante
ISO 7176-5 8.2	Longitud total con apoyapiernas (Est o SRC)	885 mm 34.8 in	- mm - in	ISO 7176-1 11	¿El dispositivo antivuelco evitó que la silla de ruedas se volcara?			Yes
ISO 7176-5 8.2	Longitud total con apoyapiernas (MDC/MAC)	1524 mm 60 in	- mm - in	ISO 7176-3 7.2	Pendiente máxima cuesta arriba / cuesta abajo	N/A	>10°	9°
ISO 7176-5 8.3	Ancho total	510 mm 20.1 in	- mm - in	ISO 7176-3 6b	Potencia operativa del freno	N/A	50 N 11.2 lb	- N - lb
ISO 7176-5 8.4	Altura de la empuñadura (SRC/MDC)	675 mm 26.6 in	-mm - in	ISO 7176-30 5.10	Potencia operativa de la palanca (basculación/reclinación)	N/A	N lb	N lb
ISO 7176-5 8.5	Longitud plegada (SRC/MDC)	735 mm 28.9 in	- mm - in	ISO 7176-30 8	Potencia de regulación del espaldar reclinable	N/A	165 N 37 lb	- N - lb
ISO 7176-5 8.6	Ancho plegado (SRC/MDC)	540 mm 21.3 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.2	Ángulo del plano del asiento	(1)	4.3°	°
ISO 7176-5 8.7	Altura plegada (SRC/MDC)	675 mm 26.6 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.3	Profundidad efectiva del asiento	(2)	290 mm 11.4 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.8	Ascendente	38 mm 1.5 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.5	Ancho efectivo del asiento	(4)	280 mm 11.0 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.9	Masa total	14 kg 31 lb	- kg - lb	ISO 7176-7 7.3.6	Altura de la superficie del asiento en la parte delantera	(5)	360 mm 14.2 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.10	Masa de la parte más pesada	6 kg 13 lb	- kg - lb	ISO 7176-7 7.3.7	Ángulo del espaldar	(6)	8.9°	°
ISO 7176-5 8.13	Radio de giro (SRC/MDC)	1050 mm 413.3 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.8	Altura del espaldar	(7)	350 mm 13.8 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.15	Ancho requerido de un pasillo con ángulo (SRC/MDC)	650 mm 25.6 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.12	Distancia del apoyapiés al asiento	(11)	228 mm 9.0 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.16	Profundidad requerida de entrada en puertas (SRC/MDC)	960 mm 37.8 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.16	Ángulo de la pierna a la superficie del asiento	(15)	85°	- °
ISO 7176-5 8.17	Ancho requerido del pasillo para la apertura lateral (SRC/MDC)	645 mm 25.4 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.17	Distancia del apoyabrazos al asiento	(16)	229 mm 9 in	- mm - in
ISO 7176-1 8	Estabilidad estática cuesta abajo	>11°	°	ISO 7176-7 7.3.18	Distancia del frente del apoyabrazos al espaldar	(17)	241 mm 9.5 in	- mm - in
ISO 7176-1 9	Estabilidad estática cuesta arriba	>10°	°	ISO 7176-7 7.3.23	Ubicación frontal de la estructura del apoyabrazos	(22)	173 mm 6.8 in	- mm - in
ISO 7176-1 10	Estabilidad estática lateral	>9°	°	ISO 7176-7 7.3.24	Diámetro del aro de la rueda	(23)	446 mm 17.6 in	- mm - in
ISO 7176-1 11	Estabilidad estática con antivuelco	>10°	°	ISO 7176-7 7.3.26	Ubicación horizontal del eje	(25)	51 mm 2 in	- mm - in

Esta silla de ruedas cumple con las siguientes normas:				Sí	No	N/A
a) Requisitos y métodos de prueba para resistencias estáticas, de impacto y de fatiga (ISO 7176-8 e ISO 717-30, según corresponda)				X		
b) Requisitos para la resistencia a la ignición de acuerdo con la norma ISO 7176-16				X		

Consulte la sección Advertencias generales del manual para obtener más información sobre la inflamabilidad.

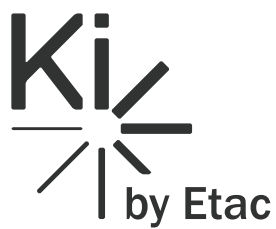

 Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, Wisconsin 54481
715-254-0991



DCN0256.3